Manual de utilizare

TRICICLU ELECTRIC

2217E, 2219E



CE

Versiune română - tradusă din secțiunea în limba engleză a manualului original Vermeiren.

Instrucțiuni pentru distribuitorul specializat

Acest manual de utilizare face parte integrantă din produs și trebuie să însoțească fiecare produs vândut.

Versiune: 2025-10

Toate drepturile rezervate, inclusiv traducerea. Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sub nicio formă fără permisiunea scrisă a editorului și nu poate fi procesată, duplicată sau distribuită prin sisteme electronice.

© Vermeiren - traducere în limba română pentru uz informativ.

Cuprins

Prefață	4
1. Produsul dumneavoastră	5
1.1. Opțiuni	7
2. Înainte de utilizare	7
2.1. Utilizare prevăzută	7
2.2. Instrucțiuni generale de siguranță	8
2.3. Simboluri pe triciclu	9
2.4. Depozitare	9
3. Utilizarea triciclului	10
3.1. Acționarea frânelor	10
3.2. Reglarea șeii	12
3.3. Starea bateriei și încărcarea	13
3.4. Deplasarea cu triciclul	17
3.5. Chei	18
4. Întreținere	18
4.1. Puncte de întreținere	18
4.2. Instrucțiuni de întreținere	20
4.3. Depanare	21
4.4. Durată de viață estimată	21
4.5. Reutilizare	21
4.6. Sfârșitul utilizării	21
4.7. Garanție	22
5. Specificații tehnice	22

Prefață

Felicitări! Sunteți acum proprietarul unui triciclu Vermeiren!

Acest triciclu este realizat de personal calificat și dedicat. Este proiectat și produs conform unor standarde ridicate de calitate, monitorizate de Vermeiren.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor Vermeiren. Pentru a vă sprijini în utilizarea acestui triciclu și a funcțiilor sale de operare, vă punem la dispoziție acest manual. Citiți cu atenție manualul; acesta vă va ajuta să vă familiarizați cu funcționarea, posibilitățile și limitele triciclului.

Dacă aveți în continuare întrebări după citirea manualului, nu ezitați să contactați distribuitorul specializat. Acesta vă va ajuta cu plăcere.

Notă importantă

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru prelungirea duratei de viață a produsului, îngrijiți-l corespunzător și solicitați verificări și service la intervale regulate.

Acest manual reflectă cele mai recente dezvoltări ale produsului. Vermeiren are dreptul să implementeze modificări asupra acestui tip de produs fără obligația de a adapta sau înlocui produse similare livrate anterior.

Imaginile sunt utilizate pentru clarificarea instrucțiunilor din manual. Detaliile produsului ilustrat pot diferi de produsul dumneavoastră.

Informații disponibile

Pe site-ul http://www.vermeiren.com/ veți găsi întotdeauna cea mai recentă versiune a informațiilor din acest manual. Consultați periodic acest site pentru eventuale actualizări.

Persoanele cu deficiențe de vedere pot descărca versiunea electronică a manualului și o pot reda cu ajutorul unei aplicații software de tip text-to-speech.

Manual de utilizare	Pentru utilizator și distribuitorul specializat
Instrucțiuni de instalare	Pentru distribuitorul specializat
Manual de service pentru tricicluri	Pentru distribuitorul specializat
Declarație CE de conformitate	

1. Produsul dumneavoastră



2217E



2219E

1. Mânere	5. Reflector frontal	9. Pedale	13. Coș
2. Sonerie	6. Aripă	10. Apărătoare lanț	14. Șa
3. Ghidon	7. Roată față	11. Roți spate	15. Baterie
4. Manetă de frână	8. Cadru	12. Reflector spate	16. Plăcuță de identificare

1.1. Opțiuni

Contactați distribuitorul specializat pentru informații despre opțiuni. Acesta vă va consilia cu plăcere.

2. Înainte de utilizare

2.1. Utilizare prevăzută

În acest paragraf este oferită o scurtă descriere a utilizării prevăzute a produsului. În plus, avertismente relevante sunt adăugate în instrucțiunile din celelalte paragrafe. Astfel dorim să vă atragem atenția asupra posibilelor utilizări necorespunzătoare.

- Acest produs este un dispozitiv medical.
- Indicații și contraindicații: utilizatorul poate conduce singur triciclul. Triciclul este destinat persoanelor cu articulații rigide sau afectate, insuficiență cardiacă sau circulație sanguină deficitară, tulburări de echilibru, cașexie etc. Asistența la pedalare este destinată utilizatorilor cu forță musculară redusă la nivelul picioarelor. NU utilizați acest triciclu dacă aveți deficiențe fizice sau mentale care v-ar putea pune pe dumneavoastră sau alte persoane în pericol în timpul deplasării. Consultați mai întâi medicul și asigurați-vă că distribuitorul specializat este informat despre recomandarea acestuia.
- Triciclul este potrivit pentru utilizare în exterior.
- Mediile de utilizare prevăzute sunt drumurile pavate și drumurile netede cu pietriș. Dispozitivul nu este destinat utilizării off-road sau ca bicicletă de munte și nu este destinat săriturilor sau curselor.
- Triciclul este proiectat și fabricat exclusiv pentru transportul unei singure persoane, cu greutatea maximă specificată în §5. Nu este proiectat pentru transportul mărfurilor grele sau al obiectelor și nici pentru alte utilizări decât cele descrise anterior.
- Utilizați numai accesorii și piese de schimb aprobate de Vermeiren.
- Citiți toate detaliile tehnice și limitele triciclului în capitolul 5.
- Garanția produsului se bazează pe utilizarea și întreținerea normală, conform acestui manual. Deteriorarea produsului cauzată de utilizare necorespunzătoare sau lipsă de întreținere va duce la anularea garanției.

2.2. Instrucțiuni generale de siguranță

ATENȚIE

Risc de vătămare și/sau deteriorare
• Citiți cu atenție și respectați instrucțiunile din acest manual. În caz contrar, vă puteți accidenta sau triciclul poate fi deteriorat.

Țineți cont de următoarele avertismente generale în timpul utilizării:

- Nu utilizați triciclul dacă sunteți sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe care vă pot afecta capacitatea de deplasare.
- Unele părți ale triciclului pot deveni foarte calde sau foarte reci din cauza temperaturii mediului, radiației solare sau dispozitivelor de încălzire. Fiți atent la atingere. Purtați îmbrăcăminte de protecție pe vreme rece.
- Nu modificați triciclul în niciun fel.
- Pentru a preveni vătămarea și/sau deteriorarea triciclului, asigurați-vă că niciun obiect și nicio parte a corpului nu sunt prinse între spițele roților.
- Observați efectele deplasării centrului de greutate asupra comportamentului triciclului, de exemplu pe pante ascendente sau descendente, pe suprafețe înclinate lateral sau la depășirea obstacolelor.
- Triciclul trebuie utilizat conform reglementărilor rutiere aplicabile.
- Adaptați deplasarea la condițiile meteo și de trafic.
- Pentru a fi mai vizibil la deplasarea pe întuneric, purtați haine cât mai deschise la culoare sau haine cu elemente reflectorizante și verificați ca reflectoarele montate în față și în spate să fie clar vizibile.
- Nu depășiți niciodată sarcina maximă a triciclului.
- Fiți prudent în viraje; triciclul își poate pierde stabilitatea laterală.
- Dacă ambalajul produsului a fost deteriorat, deschis accidental sau afectat de condiții de mediu la livrare, verificați integritatea produsului. Dacă aveți îndoieli, contactați distribuitorul specializat.

Orice incident grav [MDR (UE) 2017/745 §2 (65)] produs în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

2.3. Simboluri pe triciclu

Greutatea maximă a utilizatorului, în kg	Denumire tip
Număr catalog	Număr de serie
Dispozitiv medical	Producător
Data fabricației	Declarație de conformitate
Atenție: informații importante	Se recomandă citirea manualului
Risc de prindere	

2.4. Depozitare

Asigurați-vă că triciclul este depozitat într-un mediu uscat, pentru a preveni apariția mucegaiului și deteriorarea tapițeriei; consultați și capitolul 5.

Când produsul nu este utilizat zilnic, asigurați-vă că opriți atât bateria, cât și electronica de acționare, vezi §3.3.2. și §3.4.2.

3. Utilizarea triciclului


AVERTISMENT

Risc de vătămare
• Citiți mai întâi capitolele anterioare și informați-vă despre utilizarea prevăzută. NU utilizați triciclul înainte de a citi și înțelege complet toate instrucțiunile.
• În caz de îndoieli sau întrebări, contactați distribuitorul local, furnizorul de îngrijire sau consilierul tehnic.

3.1. Acționarea frânelor

AVERTISMENT

Risc de vătămare
• Funcționarea corectă a frânelor este influențată de uzura și contaminarea anvelopelor (apă, ulei, noroi etc.). Verificați starea anvelopelor înainte de fiecare utilizare.
• Frânele sunt reglabile și se pot uza. Verificați funcționarea frânelor înainte de fiecare utilizare.

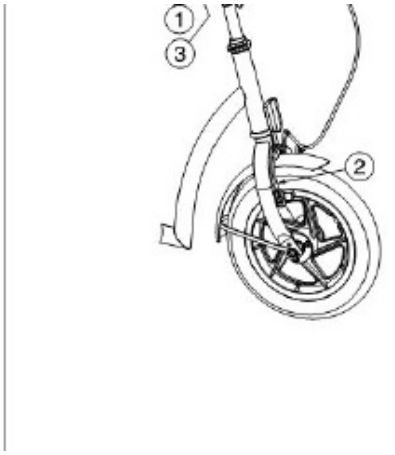

Pentru a acționa frâna manuală:


1. Trageți maneta de frână (1) spre mâner.

2. Frâna (2) va fi apăsată pe roata din față.

Pentru a elibera frâna manuală:

1. Eliberați maneta de frână (1).

Pentru activarea frânei de parcare: blocați frânele apăsând placa (3). Frâna roții din față și frâna roții din spate se activează urmând aceleași instrucțiuni. Partea stângă sau dreaptă a manetei poate fi aleasă la cumpărare.

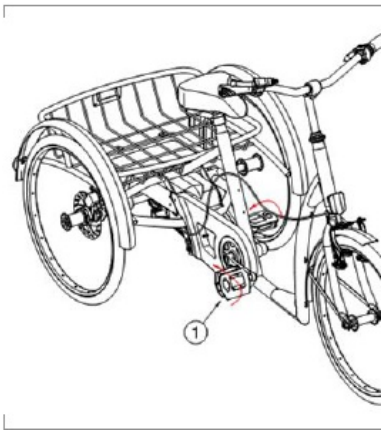


Pentru a acționa frâna torpedo pe roțile din spate:

1. Rotiți pedalele (1) înapoi.

ATENȚIE

Risc de vătămare
• Schimbați vitezele rotind maneta câte o treaptă pe rând și reduceți forța aplicată pedalelor în timpul schimbării. Dacă forțați maneta de schimbare în timp ce pedalele sunt acționate puternic, picioarele pot aluneca de pe pedale, iar triciclul se poate răsturna.

Rotiți maneta schimbătorului pentru a trece prin cele trei viteze.

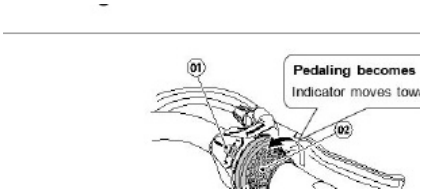

1. Indicator de viteză

2. Manetă schimbător

3.2. Reglarea șeii

ATENȚIE

Risc de vătămare
• Nu reglați niciodată șaua în timp ce utilizatorul este așezat pe ea.
• Verificați ca șaua să fie bine fixată înainte de utilizarea triciclului.

Pentru reglarea înălțimii șeii (continuu):

1. Slăbiți șurubul (1).

2. Reglați înălțimea șeii (2) într-o poziție confortabilă.

3. Strângeți corect șurubul (1).

Înălțimea maximă este indicată printr-o linie.

Adjust the height of the saddle (2) to a comfortable position.
Tighten the screw (1) properly.

ıe maximum height is indicated by a line.

3.3. Starea bateriei și încărcarea

AVERTISMENT

Risc de vătămare și deteriorare din cauza incendiului
• Utilizați numai încărcătorul de baterie livrat împreună cu triciclul. Folosirea altui încărcător poate fi periculoasă (risc de incendiu).
• Încărcătorul este destinat numai bateriilor livrate cu triciclul, nu altor baterii.
• Toate componentele sistemului de asistență la pedalare sunt corelate între ele. Nu modificați sistemul și nu adaptați cablurile, fișele sau încărcătorul. Nu deschideți și nu modificați bateria sau punctele de conectare.
• Protejați bateria și încărcătorul împotriva flăcărilor, temperaturilor ridicate și scăzute, umidității, soarelui și șocurilor puternice. NU utilizați bateria dacă a fost expusă acestor situații.
• Încărcați bateria cu încărcătorul, la interior, într-un spațiu bine ventilat, departe de copii.
• Scoateți bateria din triciclu înainte de transportul triciclului în mașină.
• Mențineți curate orificiile de ventilație ale încărcătorului. Îndepărtați praful și curățați carcasa cu o lavetă ușor umedă, dacă este necesar.

ATENȚIE

Risc de deteriorare
• Autodescărcarea bateriei și curentul de repaus al consumatorilor conectați vor reduce lent încărcarea. Bateria poate fi deteriorată ireversibil dacă este descărcată complet. Asigurați-vă că bateria este încărcată la timp.
• Când produsul nu este utilizat zilnic, opriți bateria și electronica de acționare.
• Citiți instrucțiunile de depozitare și întreținere din §4 și detaliile tehnice din §5.
• Nu încărcați bateriile sub 0°C. Mutați bateria într-un loc mai cald și începeți încărcarea.
• Păstrați punctul de conectare al încărcătorului fără praf sau contaminare.
• Dacă bateria nu poate fi încărcată conform instrucțiunilor, contactați distribuitorul specializat.

Se recomandă deconectarea încărcătorului de la rețea atunci când nu este utilizat, pentru a preveni consumul inutil de energie.

Verificați întotdeauna bateria pentru deteriorări înainte de încărcare. Apăsați butonul indicatorului de încărcare timp de 2 secunde pentru a porni bateria. Dacă niciun LED nu se aprinde, bateria poate fi deteriorată. Dacă se aprinde cel puțin un LED, dar nu toate, încărcați complet pachetul de baterii înainte de prima utilizare.

Nu încărcați și nu utilizați o baterie deteriorată; contactați distribuitorul specializat.

Pentru a asigura capacitatea completă, încărcați complet bateria cu încărcătorul înainte de prima utilizare. Bateria poate fi reîncărcată oricând, pe triciclu sau scoasă din triciclu.

Instrucțiuni pentru încărcarea bateriei

1. Opriți bateria.

2. Dacă doriți, scoateți bateria din locaș și preveniți pătrunderea murdăriei sau lichidelor în mufa de încărcare.

3. Conectați fișa încărcătorului la pachetul de baterii (1).

4. Conectați fișa de alimentare a încărcătorului la priza de perete.

5. Indicatorul LED al încărcătorului arată starea încărcării: roșu = încărcare; verde = standby / încărcare completă.

6. După încărcarea completă, scoateți încărcătorul din priza de perete și din baterie.




3.3.1. Indicatorul de încărcare a bateriei

Există două indicatoare ale nivelului de încărcare:

Pe pachetul de baterii (sub coș, în partea din spate a triciclului)	1. Apăsați butonul (2) de pe pachetul de baterii. 2. LED-urile indicatorului de încărcare (1) arată nivelul bateriei.
Panoul de comandă (pe ghidon, în partea din față)	Când sistemul electric este pornit, indicatorul bateriei (5, §3.4.1.) arată nivelul de încărcare: 1 LED = baterie scăzută, 4 LED-uri = baterie plină.

3.3.1. Battery charge


There are two battery c

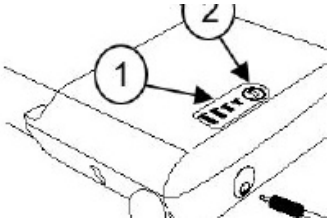

Din cauza cablajului, cele două indicații pot diferi ușor. În acest caz, luați în considerare indicația cea mai nefavorabilă.

3.3.2. Pornirea/oprirea dispozitivului electric

Apăsați comutatorul pornit/oprit aflat pe partea laterală a bateriei.

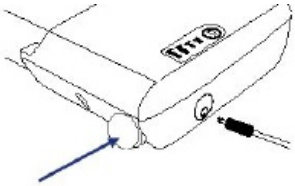

3.3.3. Montarea / scoaterea bateriei

Pentru montarea bateriei:

1. Introduceți cheia (1) și rotiți cheia spre simbolul de deblocare.

2. Introduceți bateria în locașul bateriei cât mai departe posibil. Există o singură modalitate de introducere a bateriei.

3. Rotiți cheia (1) spre simbolul de blocare.

4. Asigurați-vă că bateria este bine fixată.


5. Scoateți cheia (1). Nu scoateți niciodată cheia în timpul deplasării.

Pentru scoaterea bateriei:

1. Introduceți cheia (1).

2. Rotiți cheia (1) spre simbolul de deblocare.

3. Trageți ușor bateria din locaș.

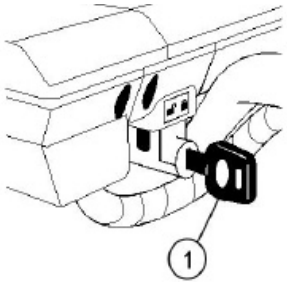

3.4. Deplasarea cu triciclul

AVERTISMENT

Risc de vătămare
• Înainte de utilizarea triciclului în zone aglomerate sau potențial periculoase ori pe drumuri cu trafic intens, familiarizați-vă cu funcționarea acestuia. Exersați într-un spațiu larg și deschis, de exemplu într-un parc. Încercați diferitele niveluri de asistență.

Când sistemul de asistență este pornit, sistemul electric se activează și oferă asistență numai în timpul pedalării. Puterea depinde de forța de pedalare și de nivelul de asistență. Când opriți pedalarea sau atingeți o viteză mai mare de 17 km/h, asistența se oprește automat. Când asistența este oprită (nivel de asistență: 0), puteți merge normal cu triciclul.

3.4.1. Interfața panoului de comandă



1. Buton PORNIT/OPRIT
2. Buton MODE
3. Indicator nivel asistență
4. Funcție de pornire asistată
5. Indicator nivel baterie

3.4.2. ON/OFF

Apăsați butonul pornit/oprit (1) pentru a porni/opri sistemul. Când triciclul se oprește și sistemul nu este utilizat timp de 5 minute, sistemul de asistență se oprește singur.

3.4.3. Alegerea nivelului de asistență

Apăsați butonul MODE (2) pentru a selecta nivelul de asistență dorit (1 = cel mai scăzut, 3 = cel mai ridicat).

La pornirea sistemului de comandă, indicatorul revine automat la nivelul de asistență „scăzut”.

3.4.4. Funcția de pornire asistată

Când pedalele se află într-o poziție incomodă pentru începerea pedalării, este disponibilă o funcție de pornire asistată, în care triciclul se deplasează cu o viteză maximă de 6 km/h.

Apăsați butonul de pornire asistată (4) pentru a activa funcția. Triciclul va continua să se deplaseze până când apăsați din nou butonul sau frâna.

3.5. Chei

Triciclul electric este livrat cu 2 chei: o cheie principală și o cheie de rezervă. Cheile sunt identificate printr-un număr de serie. Păstrați cheia de rezervă într-un loc sigur și notați numărul de serie pentru înlocuirea cheii.

4. Întreținere

Îngrijirea regulată asigură păstrarea triciclului într-o stare perfect funcțională. Pentru manualul de întreținere, consultați site-ul Vermeiren: www.vermeiren.com.

4.1. Puncte de întreținere

ATENȚIE

Risc de vătămare și deteriorare
• Reparațiile și înlocuirile pot fi efectuate numai de persoane instruite și numai cu piese de schimb originale Vermeiren.

Ultima pagină a acestui manual conține un formular de înregistrare pentru ca distribuitorul specializat să noteze fiecare service.

Frecvența service-ului depinde de frecvența și intensitatea utilizării. Contactați distribuitorul pentru a stabili un program comun de inspecție/întreținere/reparație.

4.1.1. Înainte de fiecare utilizare

Inspectați următoarele puncte:

- Toate piesele: prezente și nedeteriorate sau neuzate.
- Toate piesele: curate, vezi §4.2.2.
- Starea roților/anvelopelor, vezi §4.2.1.
- Starea componentelor cadrului: fără deformări, instabilitate, slăbiciune sau conexiuni slăbite.
- Frânele: nedeteriorate și funcționale.

Contactați distribuitorul specializat pentru eventuale reparații sau înlocuiri de piese.

4.1.2. Anual sau mai des

Solicitați verificarea și service-ul triciclului de către distribuitorul specializat cel puțin o dată pe an sau mai des. Frecvența minimă de întreținere depinde de utilizare și trebuie stabilită împreună cu distribuitorul specializat.

4.1.3. În caz de depozitare

Asigurați-vă că triciclul este depozitat într-un mediu uscat, pentru a preveni apariția mucegaiului și deteriorarea tapițeriei; consultați și capitolul 5.

Dacă triciclul este depozitat o perioadă mai lungă, opriți bateria și electronica de acționare conform §3.3.2. și §3.4.2.

4.2. Instrucțiuni de întreținere

4.2.1. Roți și anvelope

Funcționarea corectă a frânelor depinde de starea anvelopelor și se poate modifica din cauza uzurii și contaminării (apă, ulei, noroi etc.).

Mențineți roțile libere de fire, păr, nisip și fibre.

Verificați profilul anvelopelor. Dacă adâncimea profilului este mai mică de 1 mm, anvelopele trebuie înlocuite. Contactați distribuitorul specializat.

Umflați fiecare anvelopă pneumatică la presiunea corectă (vedeți indicația de presiune de pe anvelope).

4.2.2. Curățare

ATENȚIE

Risc de deteriorare din cauza umezelii
• Nu utilizați niciodată un furtun sau un aparat de curățare cu presiune înaltă pentru curățarea triciclului.

Ștergeți toate părțile rigide cu o lavetă umedă (nu îmbibată). Dacă este necesar, utilizați un săpun blând, potrivit pentru lacuri și materiale sintetice.

Tapițeria poate fi curățată cu apă călduță și săpun blând. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.

4.2.3. Dezinfectare

ATENȚIE

Risc de deteriorare
• Dezinfectarea poate fi efectuată numai de persoane instruite. Consultați distribuitorul specializat.

4.3. Depanare

Chiar dacă utilizați triciclul corect, poate apărea o problemă tehnică. În acest caz, contactați distribuitorul local specializat.

AVERTISMENT

Risc de vătămare și deteriorare
• Nu încercați NICIODATĂ să reparați singur triciclul.

Următoarele simptome pot indica o problemă gravă. Contactați întotdeauna distribuitorul specializat dacă observați:

- Sunete neobișnuite;
- Uzură neuniformă a profilului uneia dintre anvelope;
- Mișcări sacadate;
- Ansambluri de roți deteriorate sau rupte.

4.4. Durată de viață estimată

Triciclul este construit din componente din aluminiu. Este proiectat pentru o durată medie de viață de 5 ani. În funcție de frecvența de utilizare, condițiile de deplasare și întreținere, durata de viață poate crește sau scădea.

4.5. Reutilizare

Înainte de fiecare reutilizare, triciclul trebuie dezinfectat, inspectat și întreținut conform instrucțiunilor din §4.1 și §4.2.

4.6. Sfârșitul utilizării

La sfârșitul duratei de viață, triciclul trebuie eliminat conform legislației locale de mediu. Cea mai bună metodă este demontarea triciclului pentru a facilita transportul pieselor reciclabile.

4.7. Garanție

Garanția acestui produs este supusă termenilor și condițiilor generale din fiecare țară.

5. Specificații tehnice

Detaliile tehnice de mai jos sunt valabile numai pentru acest triciclu, la setări standard și în condiții ambientale optime. Țineți cont de aceste detalii în timpul utilizării. Valorile nu mai sunt aplicabile dacă triciclul a fost modificat, deteriorat sau este puternic uzat.

Marcă	Vermeiren	
Grup produs	Tricicluri	
Tip	2217E / 2219E	
Descriere	2217E	2219E
Greutate maximă utilizator	110 kg	125 kg
Sarcină maximă coș	25 kg	25 kg
Lungime totală	1600 mm	1808 mm
Lățime totală	670 mm	768 mm
Înălțime totală	986 mm - 1174 mm	1121 mm - 1309 mm
Masă totală	31,5 kg	33,8 kg
Pantă nominală	7°	7°
Gardă la sol	97 mm	125 mm
Înălțime tub cadru (înălțime acces)	174 mm	194 mm
Diametru roți față	20" x 1,75	24" x 1 3/8"
Presiune anvelope față	2,5 - 5 bar	3,5 bar
Diametru roți spate	20" x 1,75	24" x 1 3/8"
Presiune anvelope spate	2,5 - 5 bar	3,5 bar
Înălțime șa	709 mm - 950 mm	789 mm - 1030 mm
Distanță între șa și pedală	586 mm - 827 mm	640 mm - 880 mm
Înălțime mâner (de la sol)	Depinde de modelul ghidonului și de tijă	Depinde de modelul ghidonului și de tijă

Descriere	2217E	2219E
Înălțime minimă pedală	123 mm	150 mm
Înălțime maximă pedală	373 mm	455 mm
Distanță între șa și ghidon	372 mm - 401 mm; reglabil: -20 mm	417 mm - 446 mm; reglabil: -20 mm
Diametru minim de întoarcere	2750 mm	3000 mm
Viteză spate	3	3 sau 7
Viteză față	Nu se aplică	Nu se aplică
Raport transmisie	184%	184%
Frâne	V-brake - față; frână disc - spate (frână torpedo disponibilă; frână disc ca opțiune)	Frână disc - spate (frână torpedo disponibilă; frână disc ca opțiune)
Baterie	10 Ah	
Sistem	36V	
Motor	250W	
Asistență până la	17 km/h	
Nivel asistență	1-3	
Consum energetic*	79 km	
Temperatură depozitare și utilizare	-20°C - +35°C	
Umiditate depozitare și utilizare	30% - 70%	

Ne rezervăm dreptul de a introduce modificări tehnice. Toleranță de măsurare: +- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.

* Distanța teoretică de deplasare este influențată de nivelul de încărcare al bateriei, nivelul de asistență selectat, temperatură și vânt, greutatea utilizatorului și sarcina din coș, presiunea și starea anvelopelor, treapta selectată, accelerări, starea lanțului de transmisie, starea drumului, pante etc.

Formular de înregistrare service

Acest produs (nume): .....

a fost inspectat (I), întreținut (S), reparat (R) sau dezinfectat (D):

De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:
De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:
De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:
De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:
De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data:	De către (ștampilă): Tip lucrare: I / S / R / D Data: