RO

Manual de utilizare

ARIA 1.0

ARIA SPECIALE

ARIA AGILE

ARIA 2.0

ARIA ULTRA

ARIA KID

www.ariawheels.com

Ver 2025

Cuprins

1. INTRODUCERE ***pg. 4***
1.1 Informații referitoare la acest manual de utilizare
1.2 Explicarea simbolurilor
1.3 Garantie post-vânzare
1.4 Utilizarea conform scopului prevăzut
1.5 Limitarea răspunderii
1.6 Durata de viață a scaunului cu rotile

2. SIGURANȚĂ *pg.6*
2.1 Informații privind siguranța
2.2 Contraindicații
2.3 Echipament de siguranță

3. STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE. *pg.7*
3.1 Componentele scaunului cu rotile
3.2 Frâne de staționare
3.3 Spătare
3.4 Mânere
3.5 Apărători de noroi
3.6 Suport de picioare
3.7 Dispozitive anti-răsturnare
3.8 Centrul de greutate
3.9 Pernă de șezut căptușită
3.10 Unghiul de cădere al roților
3.11 Echilibrul în poziția șezând

4. ACCESORII *pg.15*

5. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE *pg.16*
5.1 Indicații de siguranță

6 DEPLASAREA CU SCAUNUL CU ROTILE *pg.16*
6.1 Indicații de siguranță
6.2 Frânarea în timpul deplasării
6.3 Așezarea și ridicarea din scaunul cu rotile
6.4 Deplasarea înainte și schimbarea direcției cu scaunul cu rotile
6.5 Urcarea și coborârea treptelor și a denivelărilor
6.6 Urcarea și coborârea scărilor
6.7 Urcarea rampelor și a suprafețelor înclinate
6.8 Stabilitate și echilibru

7. TRANSPORT *pg.24*
7.1 Indicații de siguranță
7.2 Închiderea și deschiderea (plierea și deplierea) scaunului cu rotile
7.3 Montarea și demontarea roților
7.4 Transportul scaunului cu rotile într-un vehicul

8. ÎNTREȚINERE *pg.30*
8.1 Indicații de siguranță
8.2 Plan de întreținere
8.3 Îngrijire
8.4 Dezinfectare

9. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR *pg.34*
9.1 Indicații de siguranță
9.2 Identificarea și remedierea defecțiunior

10. DUPĂ UTILIZARE *pg.36*
10.1 Reutilizare
10.2 Eliminare

11. DATE TEHNICE *pg.36*
11.1 Greutate și dimensiuni
11.2 Condiții de mediu
11.3 Anvelope. Presiunea optimă în funcție de tipul de anvelopă
11.4 Etichete

12. DECLARAȚII DE CONFORMITATE *pg.38*

1 INTRODUCERE

1.1 INFORMAȚII REFERITOARE LA PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales scaunul rulant ARIA.
Acest manual de utilizare conține indicații importante privind folosirea scaunului rulant.
Pentru a putea utiliza scaunul rulant și a vă deplasa în siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să respectați indicațiile de siguranță.
În cazul unor probleme de vedere, este posibil să vizualizați acest manual de utilizare în format PDF pe internet, la adresa www.ariawheels.com, și să măriți imaginea pe ecran în funcție de nevoile dumneavoastră. Dacă nu reușiți să măriți suficient textele și grafica, vă rugăm să contactați un distribuitor oficial ARIA din țara dumneavoastră; adresele sunt listate pe site. Dacă este necesar, vă vom furniza un fișier PDF al manualului, de înaltă rezoluție. În plus, este posibil să obțineți redarea audio a fișierului PDF folosind un software adecvat, care utilizează funcții lingvistice speciale instalate pe computerul dumneavoastră.

1.2 EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri în acest manual
Toate instrucțiunile din acest manual sunt marcate cu simboluri. În fața mesajelor individuale apar simboluri și cuvinte care indică gravitatea pericolului.

AVERTISMENT!
Indică un pericol potențial care poate provoca răni grave sau deces, dacă nu este evitat.



AVERTISMENT!

ATENȚIE !
Indică un pericol potențial care poate provoca vătămări ușoare până la moderate, dacă nu este evitat.



ATENȚIE!

IMPORTANT !
Indică un pericol potențial care poate provoca pagube materiale, dacă nu este evitat.
Indică sfaturi și recomandări utile pentru o utilizare eficientă și fără inconveniente a scaunului rulant.

IMPORTANT!

Acest produs este în conformitate cu Directiva (UE) 2017/745 privind produsele medicale.
Data lansării acestui produs este indicată în declarația de conformitate CE.

Simboluri de pe produs

Pe produs este aplicată o etichetă de identificare.
Simbolurile de pe etichetă sunt definite în detaliu în secțiunea 11.4 a prezentului manual de utilizare.

1.3 GARANȚIA POSTVÂNZARE

Aria Wheels Srl garantează absența defectelor și funcționalitatea scaunelor sale rulante. Garanția acoperă defectele care apar ca urmare a procesului de fabricație, a utilizării unor materiale de slabă calitate sau a funcționării necorespunzătoare a acestora. Drepturile ce decurg din garanție față de Aria Wheels Srl pot fi exercitate numai de către vânzător, nu și de utilizatorul scaunului rulant. Garanția comercială nu acoperă uzura normală, deteriorările sau defectele care rezultă direct sau indirect din accidente, căderi, coliziuni, utilizare necorespunzătoare, întreținere insuficientă și modificări efectuate de personal neautorizat. Piesele supuse uzurii și consumului specific (anvelope, pânze ale șezutului și ale spătarului...) nu sunt acoperite de garanție. Garanția își pierde valabilitatea dacă se efectuează modificări neprevăzute asupra scaunului rulant sau dacă se folosesc piese necorespunzătoare ori neoriginale. În cazul modificărilor neautorizate, garanția nu acoperă costurile rezultate din remedierea defectului, cum ar fi costurile de transport, costurile cu manopera, cheltuielile etc.
Garanția are o durată de 24 (douăzeci și patru) de luni începând de la data facturii.
Toate componentele care nu sunt fabricate de Aria Wheels Srl beneficiază de garanția propriului producător.
În plus, termenii și condițiile fac parte integrantă din condițiile generale și specifice aplicabile fiecărei țări în care produsul este comercializat.

1.4 UTILIZARE ÎN CONFORMITATE CU DESTINAȚIA PREVĂZUTĂ

Scaunul rulant ARIA este destinat a fi propulsat manual și servește exclusiv la deplasarea unei persoane afectate de dizabilități motorii, fie în mod autonom, fie cu ajutorul unui însoțitor. Fără ajutorul unui însoțitor, acesta trebuie utilizat doar de persoane care sunt capabile fizic și mental să controleze și să conducă scaunul rulant în siguranță (de exemplu deplasarea înainte, schimbarea direcției și frânarea). Scaunul rulant trebuie utilizat exclusiv pe suprafețe plane, teren accesibil și în interior. Acest scaun rulant activ trebuie să fie aprobat și adecvat pentru condițiile fizice specifice ale utilizatorului.



AVERTISMENT!

Orice utilizare care nu este conformă cu destinația prevăzută sau orice alt tip de utilizare poate conduce la situații periculoase.

1.5 LIMITAREA RĂSPUNDERII

Aria Wheels Srl nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din:

Nerespectarea Manualului de utilizare; utilizare incorectă; uzură naturală; montaj sau instalare incorectă realizată de cumpărător sau de o terță parte; modificări tehnice; modificări neautorizate și/sau utilizarea unor piese de schimb necorespunzătoare.
Trebuie obținută o autorizație scrisă din partea Aria Wheels Srl înainte de instalarea unor adaptări suplimentare pe un scaun rulant ARIA. În caz contrar, nu pot fi formulate pretenții de răspundere.

1.6 DURATA DE VIAȚĂ A SCAUNULUI RULANT

Durata de viață estimată a produsului este de patru ani, presupunând o utilizare zilnică, cu condiția ca acesta să fie folosit în conformitate cu instrucțiunile privind siguranța, întreținerea și utilizarea prevăzută, indicate în prezentul manual.

2. SIGURANȚĂ

2.1 Informații de siguranță

Acest capitol conține aspecte importante privind siguranța, menite să protejeze utilizatorul scaunului rulant și însoțitorul său (atunci când este prezent), precum și să garanteze o utilizare sigură și fără inconveniente a scaunului rulant.



AVERTISMENT!

Pericol de accidente și de vătămări grave pentru pacient.
Dacă scaunul rulant nu este reglat corect, poate duce la accidente cu vătămări grave.
Reglajele scaunului rulant trebuie efectuate întotdeauna de către un distribuitor specializat.



AVERTISMENT!

Pericol rezultat dintr-un comportament de conducere neadecvat.
Deplasarea pe suprafețe umede, pietriș și teren denivelat poate duce la alunecare.
Adaptați întotdeauna viteza și modul de deplasare la diferitele situații (condițiile atmosferice, suprafața, abilitățile individuale etc.).



AVERTISMENT!

Pericol de vătămare pentru pacient. În cazul unei coliziuni, există posibilitatea de a fi rănit în zonele care ies în afara scaunului rulant (cum ar fi picioarele sau mâinile).
Evitați orice coliziune, după ce ați încercat să utilizați frânele.
Nu conduceți niciodată scaunul rulant în obiecte.
Traversați cu prudență pasajele înguste.



AVERTISMENT!

Pericol cauzat de deplasarea imprudentă.
Deplasarea cu viteză mare vă poate face să pierdeți controlul asupra scaunului rulant și să cădeți.
Nu depășiți niciodată viteza de 5 km/h.
Evitați toate tipurile de coliziune.



ATENȚIE!

Pericol de arsuri.
Componentele scaunului rulant se pot încălzi dacă sunt expuse la radiații solare puternice.

2.2 CONTRAINDICAȚII

Nu au fost identificate contraindicații, cu excepția cazurilor de sensibilitate dovedită la materialele componentelor.

ATENȚIE!

Risc de strivire a degetelor!
Există întotdeauna riscul de a vă strivi degetele sau brațele în părțile mobile ale scaunului rulant. La acționarea mecanismelor de pliere sau la introducerea pieselor mobile, cum ar fi axul detașabil al roții din spate sau dispozitivul anti-răsturnare, asigurați-vă că nimic nu poate rămâne blocat.

2.3 ECHIPAMENTE DE SIGURANȚĂ


AVERTISMENT!


Pericol de accident!
Echipamentele de siguranță (frâne, dispozitiv anti-răsturnare), dacă sunt reglate incorect sau nu funcționează, pot provoca accidente. Înainte de fiecare utilizare a scaunului rulant, verificați funcționarea echipamentelor de siguranță și solicitați verificarea lor periodică de către un distribuitor specializat.

Funcționarea echipamentelor de siguranță este descrisă în capitolul 3 Structură și funcționare.

3 STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE

3.1 Componentele scaunului rulant și materialele

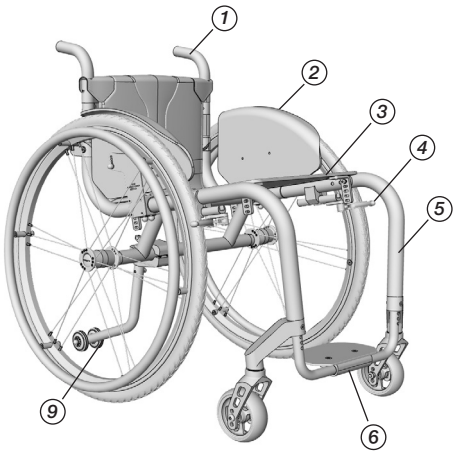

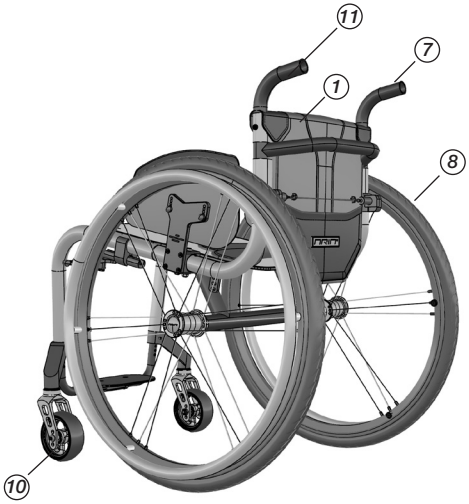

1) Spătar
2) Apărătoare de noroi sau cotiere
3) Șezut
4) Frână de parcare
5) Cadru
6) Suport pentru picioare
7) Mâner de împingere (în spatele spătarului)
8) Roți principale
9) Dispozitiv anti-răsturnare
10) Roată reglabilă stânga și dreapta

	Articol	Material
	Spătar postural și husă	Corp spătar: fibră de carbon sau aluminiu ori material textil Husă: material textil respirabil și spumă poliuretanică Suporturi pentru curele: poliuretan și material textil Bandă: material textil și Velcro
	Apărătoare de noroi	Fibră de carbon sau ABS
	Cotieră	Structura cotierei: aluminiu Apărătoare de noroi integrată: fibră de carbon Căptușeală: poliuretan (PU)
	Cadru	Aria 2.0: aliaj de aluminiu Aria 1.0: aliaj de aluminiu KID: aliaj de aluminiu ULTRA: aliaj de magneziu SPECIALE: aliaj de magneziu
	Suport pentru picioare	Aliaj de aluminiu sau fibră de carbon
	Șezut	Structură: fibră de carbon sau tapițerie Pernă: nu este furnizată

Scurtă descriere

Modelele de scaune rulante Aria Wheels Srl sunt de tip superușor, cu cadru rigid.
„Echiparea efectivă a scaunului rulant poate fi diferită față de imaginile din manual,
deoarece fiecare scaun rulant este construit conform indicațiilor din comandă.”

3.2 FRÂNE DE PARCARE

Frânele de parcare sunt concepute pentru a opri scaunul rulant și a împiedica orice mișcări involuntare.
Sunt disponibile tipurile Push to Lock și Scissor Lock.



AVERTISMENT!

Risc de cădere în urma unei opriri bruște!
Dacă în timpul deplasării utilizați frânele de parcare, nu mai este posibil să controlați direcția, i
ar scaunul rulant se poate bloca și poate provoca coliziuni sau o cădere din scaunul rulant.
Nu acționați niciodată frânele de parcare în timpul deplasării.

AVERTISMENT!

Pericol de cădere!
Funcționarea frânelor de parcare este garantată numai dacă anvelopele au presiune suficientă.
Verificați presiunea corectă a anvelopelor, 11.3 Anvelope.

Figura 1
Montarea frânei de roată de tip Push to Lock

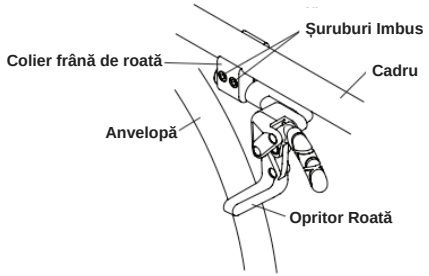


Figura 2
Montarea opțională a frânei de roată de tip Push to Lock

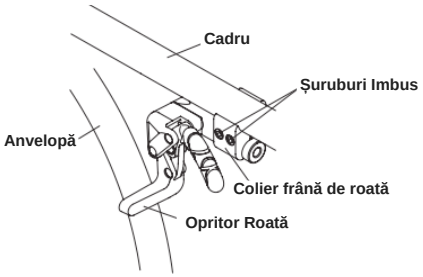


Figura 2
Montarea opțională a frânei de roată de tip Push to Lock


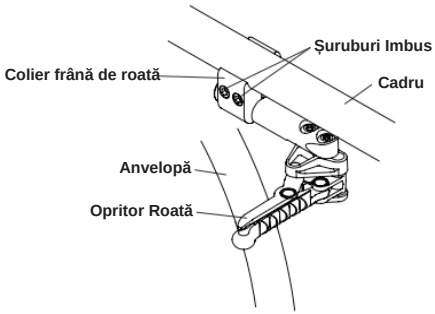


Figura 2
Montarea opțională a frânei de roată de tip Push to Lock

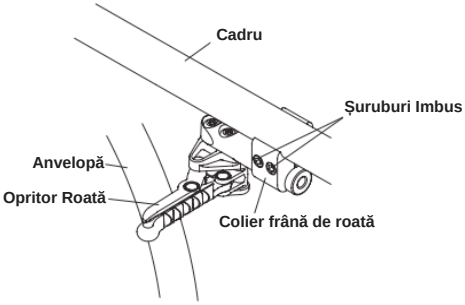


3.3 Spătar

Husă pentru spătar
Scaunele rulante Aria sunt livrate standard cu o husă căptușită pentru spătar. Husa din material textil respirabil este detașabilă și lavabilă.


Înălțimea spătarului postural
Înălțimea spătarului postural poate fi reglată. Îndepărtați husa, desfiletați cele 4 șuruburi și fixați-le din nou la înălțimea dorită. Reglajul trebuie efectuat de către distribuitorul dumneavoastră specializat (img. 1).

IMG 1

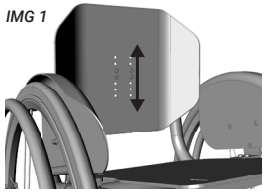


Spătar cu tensionare reglabilă
Tensiunea benzilor spătarului poate fi reglată. Îndepărtați tapițeria și tensionați benzile în funcție de postura dorită. Reglajul trebuie efectuat de către distribuitorul specializat (img. 2).

IMG 2

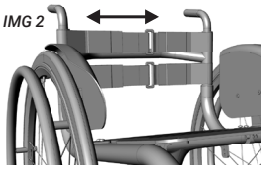


Înclinarea spătarului postural
Este posibilă reglarea înclinării spătarului prin desfiletarea șuruburilor corespunzătoare, ajustarea înclinării dorite și strângerea lor din nou. Aceasta se poate realiza diferit în funcție de modelul scaunului rulant (img. 3 și img. 4). Reglajele trebuie efectuate de către distribuitorul dumneavoastră specializat.

IMG 3

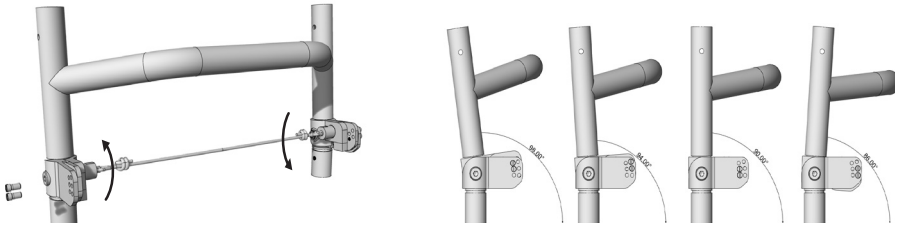


IMG 4

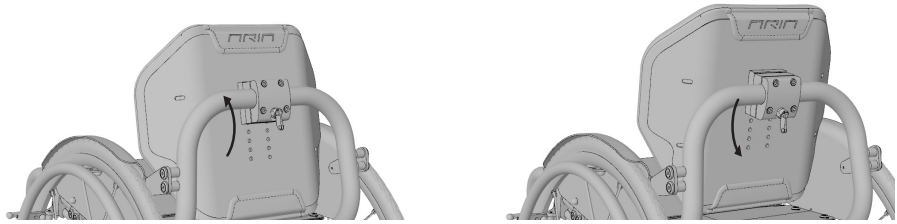


Îndepărtarea spătarului detașabil
La unele modele este posibilă îndepărtarea spătarului postural din clemă, așa cum este prezentat în fotografie (img. 5).

IMG 5

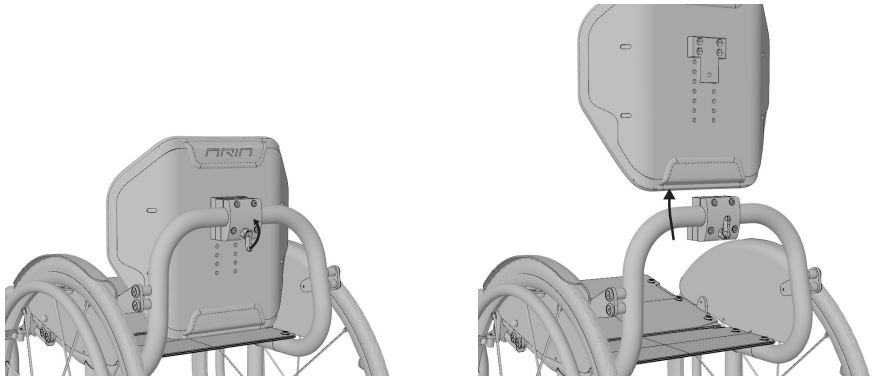

3.4 MÂNERE DE ÎMPINGERE


Scaunele rulante ARIA pot fi echipate cu o bară de împingere sau cu mânere de împingere (care funcționează și ca suport pentru rucsac). Înălțimea barei și a mânerelor de împingere poate fi reglată. Desfiletați șuruburile, setați-le la înălțimea dorită și înfiletați-le la loc. Reglajul trebuie efectuat de către distribuitorul dumneavoastră specializat.

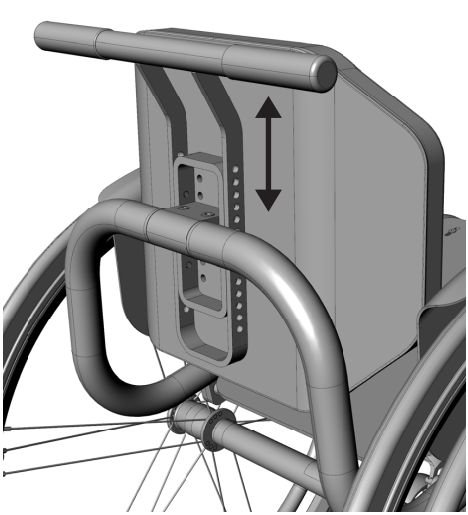




3.5 APĂRĂTOARE DE NOROI


În funcție de solicitare, apărătoarea de noroi poate fi dreaptă sau curbată, urmând forma anvelopei. Modelul drept este montat și în combinație cu cotierele. Ambele modele sunt interschimbabile, cu excepția faptului că modelul curbat nu poate fi montat în combinație cu cotierele.

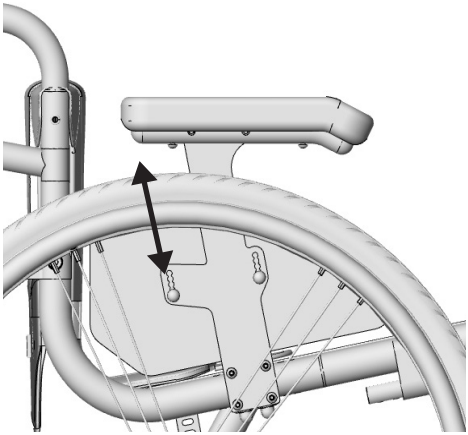


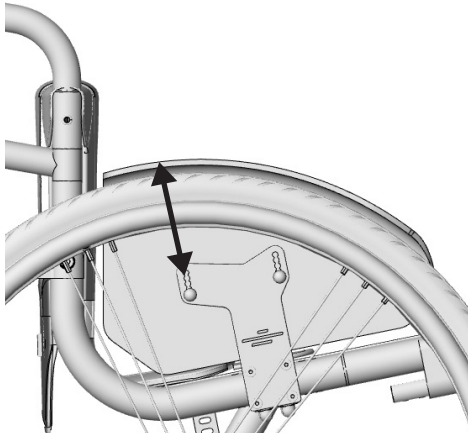

3.6 Suport pentru picioare


Este posibilă reglarea înălțimii suportului pentru picioare prin desfiletarea celor două șuruburi de pe cadru, ajustarea la înălțimea dorită și strângerea lor din nou. În unele cazuri, este posibilă și reglarea unghiului suportului pentru picioare prin slăbirea șuruburilor aflate sub partea din aluminiu sau fibră de carbon. După ce unghiul a fost reglat conform dorinței, strângeți din nou șuruburile. Reglajele trebuie efectuate de către distribuitorul specializat.

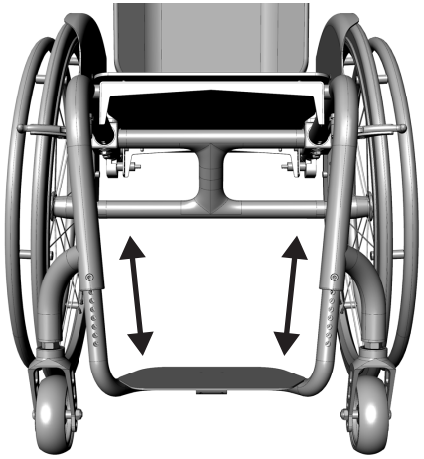


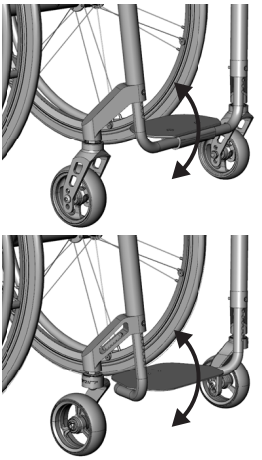

3.7 DISPOZITIV ANTI-RĂSTURNARE

Un dispozitiv anti-răsturnare împiedică scaunul rulant să se răstoarne pe spate. Dispozitivul este reglabil în funcție de diferite nevoi. Este atașat de axul roții din spate cu ajutorul unei cleme speciale. Poate fi poziționat pe partea dreaptă sau stângă. Sunt disponibile diferite tipuri de dispozitive anti-răsturnare. Consultați manualul pieselor de schimb pe site-ul Aria.

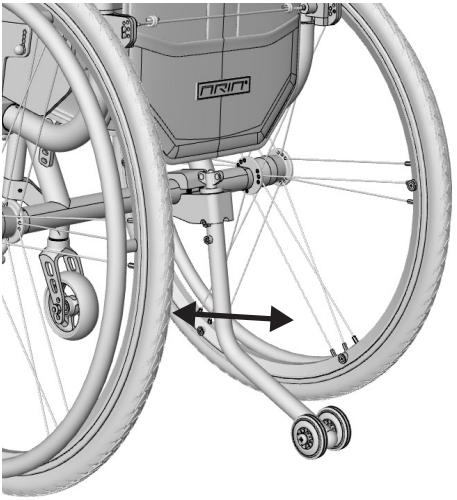

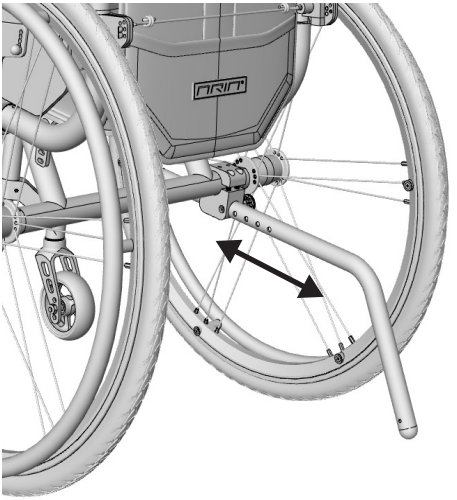

AVERTISMENT

Pericol de cădere!
Un dispozitiv anti-răsturnare reglat incorect sau nefuncțional poate provoca căderi.
Înainte de fiecare utilizare a scaunului rulant, verificați funcționarea acestuia și, dacă este necesar, solicitați montarea sau reglarea dispozitivului anti-răsturnare de către un distribuitor specializat.


AVERTISMENT!


Pericol de răsturnare
Pe teren denivelat sau moale, dispozitivul anti-răsturnare se poate afunda în gropi sau în sol, limitând sau compromițând funcția sa corectă de siguranță.
Utilizați dispozitivul anti-răsturnare numai atunci când vă aflați pe o suprafață plană și compactă.

3.8 CENTRUL DE GREUTATE

La unele produse este posibilă reglarea centrului de greutate prin desfiletarea celor patru șuruburi speciale de pe cadru (două pe fiecare parte), ajustarea centrului de greutate dorit și strângerea lor din nou.
Reglajul trebuie efectuat de către distribuitorul dumneavoastră specializat.



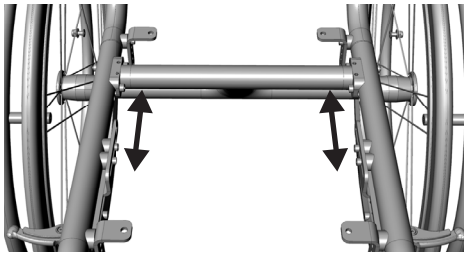

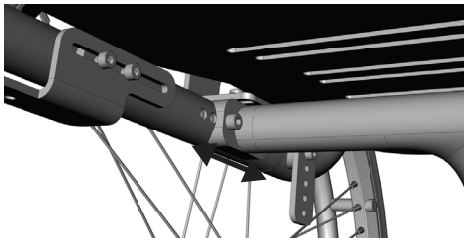

3.9 PERNĂ PENTRU ȘEZUT

O pernă pentru șezut, căptușită corespunzător, este necesară pentru a asigura o distribuție optimă a presiunii pe suprafața șezutului, indiferent dacă acesta este realizat din material textil sau din fibră de carbon solidă.
Perna este atașată de șezut și este împiedicată să alunece prin benzi Velcro fixate pe șezut.

3.10 CAMBRAJ


Cambrajul roților este ales în momentul comandării scaunului rulant ARIA. Ulterior, acesta poate fi modificat prin înlocuirea axului roților. Înlocuirea trebuie efectuată de către distribuitorul specializat.


3.11 ECHILIBRUL ÎN POZIȚIA ȘEZÂND

Stabilitate anti-răsturnare
Poziția de ședere, și implicit stabilitatea anti-răsturnare, poate fi reglată. Reglajul trebuie efectuat de către distribuitorul specializat.

Înălțimea frontală a șezutului
Înălțimea frontală a șezutului poate fi reglată în anumite cazuri. Reglajul trebuie efectuat de către distribuitorul specializat.

Înălțimea posterioară a șezutului
Înălțimea posterioară a șezutului poate fi reglată în anumite cazuri. Reglajul trebuie efectuat de către distribuitorul specializat.

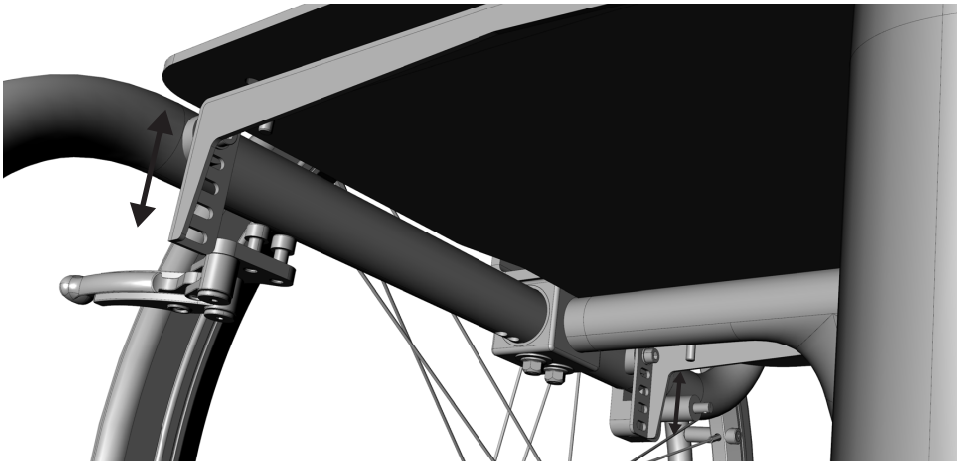

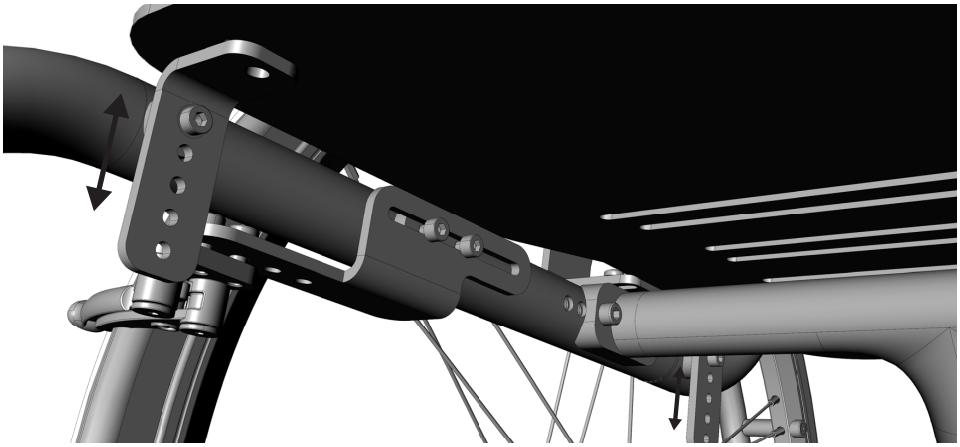


4. ACCESSORII

DISPOZITIV ANTI-RĂSTURNARE ȘI PEDALĂ DE BASCULARE
Pedala de basculare îi permite unui însoțitor să încline cu ușurință scaunul rulant spre spate pentru a trece peste o treaptă. Pentru aceasta, coborâți cu piciorul dispozitivul anti-răsturnare (ca în imaginea din dreapta).



MÂNER DE ÎMPINGERE (ȘI SUPORT PENTRU GEANTĂ)

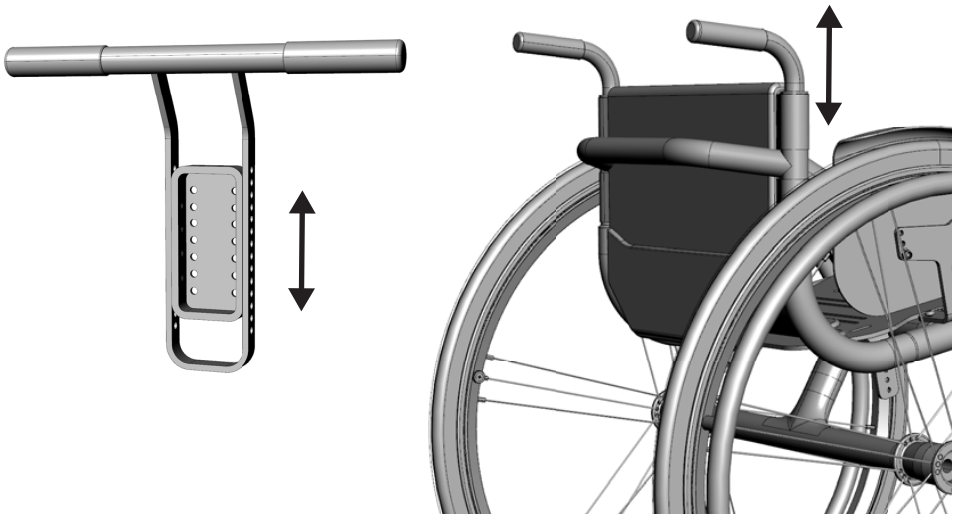

5. PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

5.1 INDICAȚII DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE!

Pericol de vătămare pentru pacient.
Înainte de punerea în funcțiune a scaunului rulant, verificați dacă acesta este în stare bună și funcționarea celor mai importante funcții. Consultați planul de întreținere, secțiunea 8.

Distribuitorul dumneavoastră de încredere va pregăti scaunul rulant pentru utilizare. Distribuitorul vă va explica funcțiile principale și se va asigura că scaunul rulant corespunde cerințelor și nevoilor dumneavoastră.

6. DEPLASAREA CU SCAUNUL RULANT

6.1 INDICAȚII DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT!

Pericol de accident!
Comportamentul scaunului rulant în timpul deplasării poate fi afectat considerabil dacă presiunea din anvelope nu este aceeași.
Verificați presiunea anvelopelor înainte de orice deplasare.



ATENȚIE!

Pericol de strivire!
Distanța dintre roata din spate și apărătoarea de noroi a roții poate fi atât de mică încât să provoace strivirea degetelor.
Asigurați-vă întotdeauna că deplasați scaunul rulant folosind exclusiv inelele de propulsie.



ATENȚIE!

Pericol de strivire!
Distanța dintre roata din spate și frâna de parcare poate fi atât de mică încât să provoace strivirea degetelor.
Asigurați-vă întotdeauna că deplasați scaunul rulant folosind exclusiv inelele de propulsie.

6.2 FRÂNAREA ÎN TIMPUL DEPLASĂRII

În timpul deplasării, este posibil să frânați scaunul rulant aplicând presiune cu mâinile pe inelele de propulsie.



AVERTISMENT!

Risc de cădere după o frânare bruscă!
Dacă utilizați frânele de parcare în timpul deplasării, nu mai este posibil să controlați direcția de mers, iar scaunul rulant se poate bloca brusc, ceea ce poate duce la o coliziune sau la căderea din scaunul rulant.
Nu acționați niciodată frânele de parcare în timpul deplasării.



AVERTISMENT!

Risc de a cădea din scaunul rulant dacă acesta este încetinit brusc de un însoțitor care trage de mânerele de împingere; utilizatorul poate cădea din scaunul rulant.
Fixați întotdeauna centura de siguranță, dacă este prezentă.
Asigurați-vă că însoțitorul a primit instruire individuală privind modul de împingere a scaunelor rulante ocupate.



ATENȚIE!

Risc de arsuri la nivelul pielii
Inelele de propulsie se pot încălzi dacă frânați scaunul rulant pentru o perioadă lungă de timp.
Vă puteți arde palmele.
Purtați o pereche adecvată de mănuși.

Prindeți inelele de propulsie și aplicați o presiune uniformă cu ambele mâini, până când scaunul rulant se oprește complet.

6.3 TRANSFERURI DIN SCAUNUL RULANT



AVERTISMENT!

Risc de cădere!
În timpul transferurilor, riscul de cădere este foarte mare.
Așezați-vă și ridicați-vă din scaunul rulant fără ajutor numai dacă sunteți capabil fizic să faceți acest lucru.



AVERTISMENT!

Risc de cădere!
Scaunul rulant se poate răsturna în față dacă stați în picioare pe suportul pentru picioare.
Nu călcați niciodată pe suportul pentru picioare în timp ce vă așezați sau vă ridicați din scaunul rulant.



ATENȚIE!

Dacă frânele sunt dezactivate sau defecte, scaunul rulant se poate deplasa necontrolat.
Nu vă sprijiniți pe frâne în timp ce vă așezați sau vă ridicați din scaunul rulant.

1. Acționați frânele de parcare.
2. Așezați picioarele pe sol.
3. Țineți-vă bine de scaunul rulant și, dacă este necesar, de un obiect fix din apropiere.
4. Deplasați-vă încet pe scaun.

6.4 DEPLASAREA ÎNAINTE ȘI SCHIMBAREA DIRECȚIEI CU SCAUNUL RULANT

Folosind inelele de propulsie, este posibil să deplasați scaunul rulant înainte și să schimbați direcția.
Înainte de a vă deplasa fără ajutorul unui însoțitor, este necesar să identificați punctul de răsturnare al scaunului rulant.



AVERTISMENT!

Pericol de răsturnare
Scaunul rulant se poate răsturna pe spate dacă nu este instalat un dispozitiv anti-răsturnare.
La determinarea punctului de răsturnare al scaunului rulant, un însoțitor trebuie să stea direct în spatele scaunului rulant pentru a-l prinde înainte ca acesta să se răstoarne.
Pentru a împiedica răsturnarea scaunului rulant, instalați un dispozitiv anti-răsturnare.



AVERTISMENT!

Pericol de răsturnare
Scaunul rulant se poate răsturna în față.
La reglarea scaunului rulant, verificați comportamentul acestuia în cazul unei tendințe de răsturnare în față și adaptați-vă stilul de deplasare în consecință.

ATENȚIE!

Pericol de răsturnare
O încărcătură grea atașată de spătar poate modifica centrul de greutate al scaunului rulant. În acest caz, adaptați-vă comportamentul de deplasare ținând cont de încărcătură.

Determinarea punctului de răsturnare

1. Eliberați frâna.
2. Deplasați-vă puțin înainte, țineți ambele inele de propulsie și mișcați-vă înapoi, dând un ușor impuls.
3. Determinați punctul de răsturnare prin deplasarea greutății corpului și prin controlul mișcării inelelor de propulsie.



6.5 URCAREA ȘI COBORÂREA TREPTELOR ȘI A DENIVELĂRILOR

AVERTISMENT!


Pericol de cădere!
La urcarea și coborârea treptelor vă puteți pierde echilibrul și puteți răsturna scaunul rulant. Deplasați-vă întotdeauna încet și cu grijă când treceți peste trepte, cum ar fi bordurile, și peste denivelări. Nu treceți peste trepte mai înalte de 25 cm.

ATENȚIE!

Un dispozitiv anti-răsturnare împiedică scaunul rulant să se răstoarne pe spate. Îndepărtați dispozitivul anti-răsturnare înainte de a trece peste trepte sau denivelări.

Coborârea unei trepte cu ajutorul unui însoțitor

1. Aduceți scaunul rulant la marginea treptei și apucați mânerul de împingere.
2. Însoțitorul apucă ferm mânerele de împingere, pune un picior pe dispozitivul anti-răsturnare (dacă este instalat) și înclină scaunul rulant spre spate, astfel încât roțile din față să se ridice de la sol.
3. Însoțitorul menține scaunul rulant în această poziție, îl împinge cu grijă peste treaptă și înclină scaunul rulant înainte, astfel încât roțile din față să atingă din nou solul.

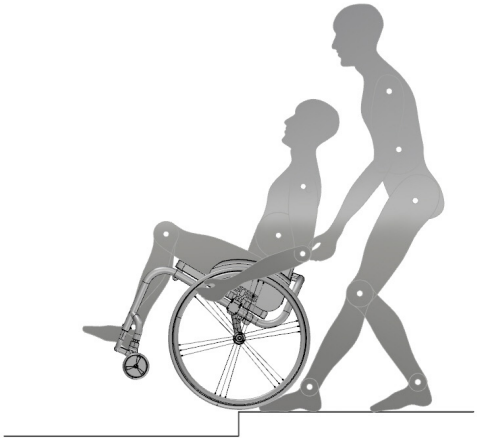


Coborârea unei trepte fără ajutorul unui însoțitor



AVERTISMENT!

Pericol de răsturnare
Dacă coborâți o treaptă fără ajutorul unui însoțitor, există riscul de răsturnare pe spate dacă nu aveți control asupra scaunului rulant.
Învățați mai întâi cum să coborâți o treaptă cu ajutorul unui însoțitor.
Învățați cum să vă echilibrați pe roțile din spate.


1. Aduceți scaunul rulant la marginea treptei, ridicați roțile din față și mențineți echilibrul.
2. Lăsați roțile din spate să alunece încet de-a lungul marginii. Apucați ferm cu ambele mâini inelele de propulsie și
mențineți-vă până când roțile din față ating din nou solul.

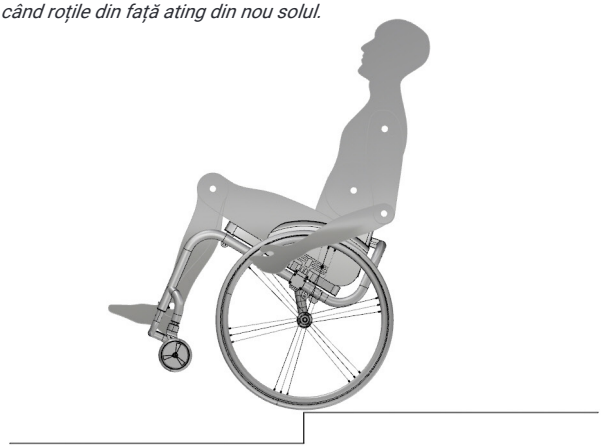

AVERTISMENT!

Risc de vătămare pentru utilizator.
Spătarul scaunului rulant se poate deteriora mai repede decât este de așteptat dacă urcați frecvent trepte și borduri; se recomandă să manevrați scaunul rulant de cadru sau de mânerul de împingere, dacă acesta este instalat. Utilizatorul poate cădea din scaunul rulant. Îndepărtați dispozitivul anti-răsturnare atunci când urcați trepte și borduri.

1. Împingeți scaunul rulant cu spatele, pe roțile din spate, până la marginea treptei.
2. Însoțitorul apucă mânerele de împingere și înclină scaunul rulant astfel încât roțile din față să fie ridicate de la sol; apoi trage roțile din spate peste marginea treptei până când este posibil să așeze din nou roțile din față pe sol.

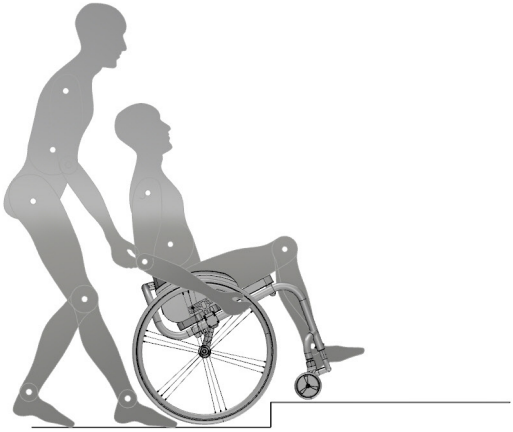

6.6 URCAREA ȘI COBORÂREA SCĂRILOR

AVERTISMENT!

Pericol de cădere.
La urcarea și coborârea scărilor vă puteți pierde echilibrul și puteți cădea din scaunul rulant. Urcați și coborâți întotdeauna scările cu mai mult de o treaptă numai cu ajutorul a 2 însoțitori.

1. Este posibil să coborâți un rând de scări câte o treaptă pe rând, așa cum este descris în imagine. Primul însoțitor va sta în spatele scaunului rulant și va ține de mânerele de împingere.
Al doilea însoțitor va ține de o parte fixă a cadrului frontal, asigurând din față poziția corectă a scaunului rulant.



6.7 URCAREA RAMPELOR ȘI A SUPRAFEȚELOR ÎNCLINATE

AVERTISMENT!

Pericol cauzat de o deplasare necontrolată! La deplasarea pe suprafețe înclinate, scaunul rulant se poate răsturna pe spate, lateral sau în față.
Parcurgeți suprafețele lungi înclinate, de preferință, cu ajutorul unui însoțitor aflat în spatele scaunului rulant.
Evitați înclinarea laterală. Evitați suprafețele cu o pantă mai mare de 7°.
Evitați schimbarea bruscă a direcției pe o suprafață înclinată.


ATENȚIE!

Scaunul rulant se poate deplasa involuntar chiar și pe suprafețe ușor înclinate, dacă nu este controlat prin inelele de propulsie.
Acționați frânele de parcare dacă vă aflați cu scaunul rulant pe o suprafață înclinată.

Urcare

Pentru a urca o pantă, trebuie să dați un ușor impuls, să mențineți elanul și, în același timp, să controlați direcția.


1. Aplecați-vă înainte și deplasați scaunul rulant înainte, aplicând împingeri rapide și energice pe ambele inele de propulsie.

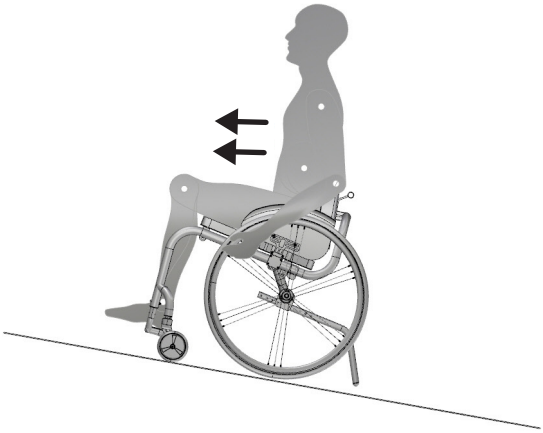

Coborâre

La coborârea unei pante, este important să controlați direcția de deplasare și, mai presus de toate, viteza.

1. Sprijiniți-vă de spătar și lăsați cu grijă inelele de propulsie să alunece prin mâini. Trebuie să puteți opri întotdeauna scaunul rulant folosind inelele de propulsie.

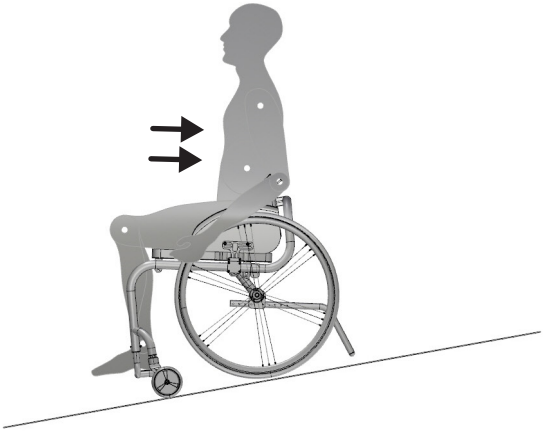



AVERTISMENT!

Pericol de arsuri
Inelele de propulsie se pot încălzi dacă frânați scaunul rulant pentru o perioadă lungă de timp.
Vă puteți arde palmele.
Purtați o pereche adecvată de mănuși.

6.8 STABILITATE ȘI ECHILIBRU

Unele activități și mișcări din utilizarea zilnică vă pot solicita să vă aplecați în afara scaunului rulant, înainte, lateral sau înapoi. Acest lucru afectează considerabil stabilitatea scaunului rulant. Pentru a vă asigura că vă mențineți întotdeauna echilibrul, țineți cont de următoarele:

Aplecarea înainte



AVERTISMENT!

Pericol de a cădea din scaunul rulant!
Dacă vă aplecați înainte, puteți cădea din scaunul rulant.
Nu vă aplecați prea mult înainte și nu vă deplasați corpul dincolo de șezut pentru a ajunge
/
a un obiect.
Nu vă aplecați înainte depărtând genunchii pentru a ajunge la un obiect aflat pe sol.

1. Aliniați roțile din față (pentru a face acest lucru, deplasați scaunul rulant puțin înainte și apoi înapoi).
2. Acționați ambele frâne de parcare.
3. Aplecați-vă înainte doar până în punctul în care partea superioară a corpului este încă deasupra roților din față.

Aplecarea înapoi



AVERTISMENT!

Pericol de a cădea din scaunul rulant!
Dacă vă aplecați prea mult înapoi, puteți răsturna scaunul rulant.
Nu vă aplecați înapoi dincolo de scaunul rulant.
Folosiți un dispozitiv anti-răsturnare.

1. Aliniați roțile din față (pentru a face acest lucru, deplasați scaunul rulant puțin înainte și apoi înapoi).
2. Nu acționați frânele de parcare.
3. Apucați doar obiectele la care puteți ajunge fără să vă modificați poziția de ședere.

7. TRANSPORT

7.1 INDICAȚII DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT!

Risc de vătămare dacă scaunul rulant nu este fixat corect și în siguranță.
În cazul unui accident, al unei frânări etc., pot apărea vătămări grave din cauza părților scaunului rulant care nu sunt fixate. Scoateți întotdeauna roțile atunci când transportați scaunul rulant.
Fixați ferm toate componentele scaunului rulant în vehicul pentru a împiedica slăbirea acestora în timpul transportului.





ATENȚIE!

Uzura excesivă a materialului poate compromite rezistența părților de susținere.
Nu deplasați scaunul rulant cu roțile demontate pe o suprafață abrazivă
(de exemplu, trăgând cadrul pe asfalt).

7.2 ÎNCHIDEREA ŞI DESCHIDEREA SCAUNULUI RULANT

Spătarul se rabatează prin tragerea șnurului din spate, apoi prin tragerea spătarului înainte și coborârea acestuia pe șezut. Indiferent de geometria spătarului, principiul de operare este același pentru toate produsele.

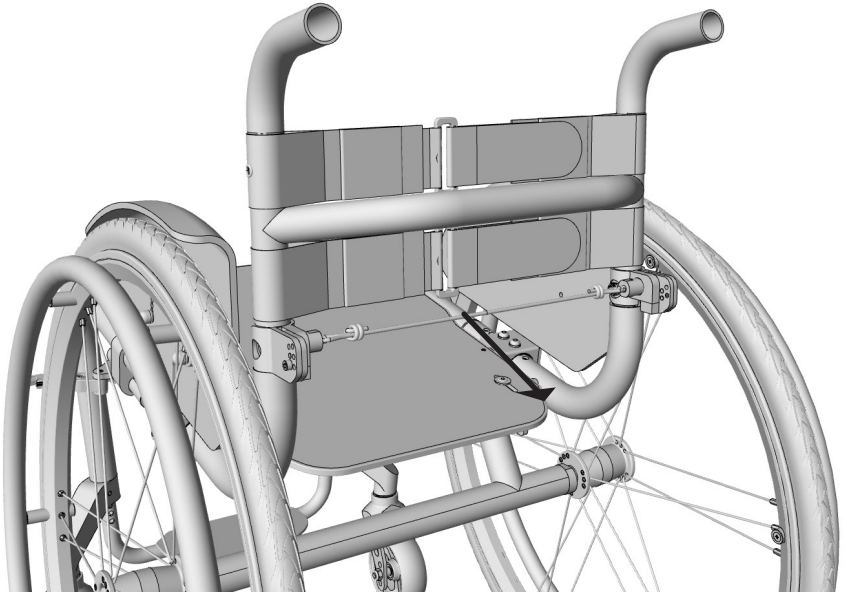

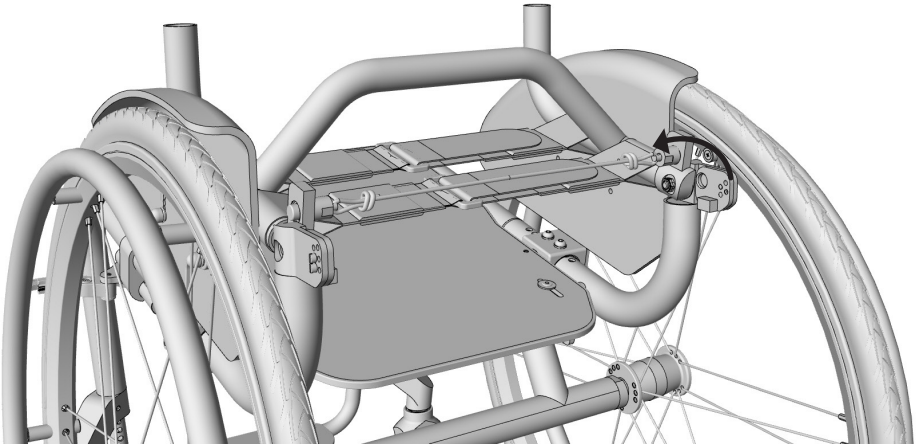


AVERTISMENT!

Pericol de răsturnare!
Dacă axul cu eliberare rapidă al roții din spate nu este blocat complet, roata poate cădea în timpul utilizării. Acest lucru poate provoca răsturnarea. Verificați întotdeauna ca axele cu eliberare rapidă să fie complet blocate de fiecare dată când montați o roată.


Demontarea roților din spate

Apăsați pe butonul axului cu eliberare rapidă și scoateți roata în același timp.

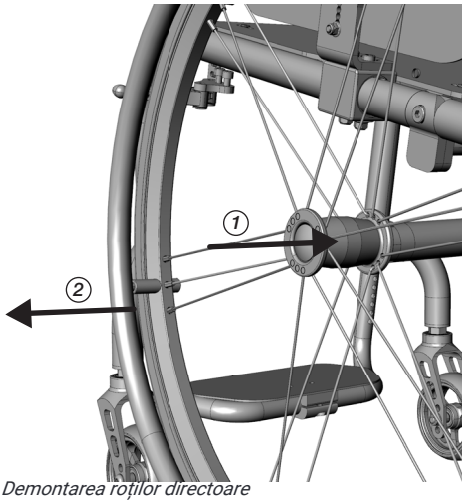


Montarea roților din spate

Apăsați pe butonul axului cu eliberare rapidă și poziționați roata în același timp până când axul se blochează.

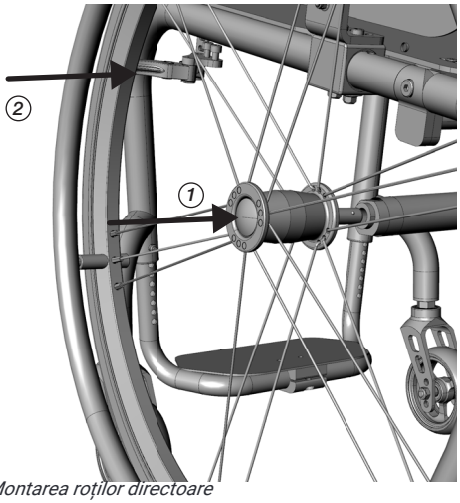


Demontarea roților directoare

Desfiletați axul cu o cheie imbus specială și scoateți roata.

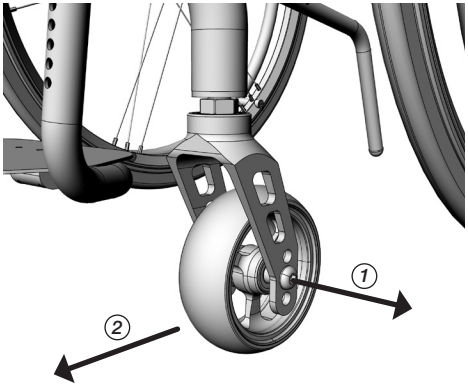

Montarea roților directoare

Urmați în sens invers procesul de demontare, având grijă să strângeți bine axul.

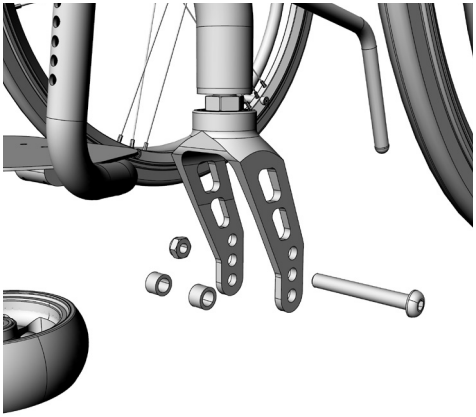

7.4 TRANSPORTUL SCAUNULUI RULANT OCUPAT ÎNTR-UN VEHICUL

Chiar și atunci când scaunul rulant ARIA este fixat corect și sunt respectate următoarele reguli, în cazul unui impact sau al unei opriri bruște pot apărea vătămări ale pasagerilor. Prin urmare, Aria Wheels Srl recomandă cu tărie transferarea utilizatorului scaunului rulant pe un scaun al vehiculului și fixarea centurii de siguranță.
Nu efectuați nicio modificare sau înlocuire la scaunul rulant (structură, cadru sau piese) fără acordul scris al Aria Wheels Srl.



AVERTISMENT!

Risc de vătămări grave sau deces
Pentru a utiliza scaunul rulant ca scaun în vehicul, înălțimea spătarului trebuie să fie de cel puțin 400 mm.

Pentru transportul scaunului rulant ocupat în interiorul unui vehicul, acesta trebuie să aibă instalat un sistem de fixare.



AVERTISMENT!

Dacă, din orice motiv, nu este posibil transferul utilizatorului scaunului rulant pe un scaun al vehiculului, scaunul rulant poate fi utilizat ca scaun în vehicul atâta timp cât sunt respectate următoarele reguli și proceduri:

- Scaunul rulant trebuie fixat în vehicul folosind un sistem de ancorare în patru puncte pentru scaune rulante.
- Utilizatorul trebuie să poarte un sistem de siguranță în trei puncte pentru pasageri, fixat de vehicul.
- În scaunul rulant, utilizatorul trebuie să aibă centura de susținere posturală fixată.

Atât sistemul de ancorare în patru puncte pentru scaune rulante, cât și sistemul de siguranță în trei puncte pentru pasageri trebuie să fie omologate în conformitate cu standardul ISO 10542-1:2012.



AVERTISMENT!

Înainte de plecare, contactați persoana responsabilă de transport și solicitați informații privind disponibilitatea echipamentelor enumerate aici.
Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul scaunului rulant și al utilizatorului pentru a evita ca acesta din urmă să atingă alți pasageri ai vehiculului, părți neacoperite ale vehiculului, accesoriile scaunului rulant și punctele de ancorare ale sistemului de fixare.



AVERTISMENT!

Verificați ca punctele de ridicare ale scaunului rulant să nu fie deteriorate și ca frânele de parcare să funcționeze perfect.
Se recomandă utilizarea anvelopelor anti-pană pentru transport, pentru a evita problemele cu frânele cauzate de scăderea presiunii în anvelope.


AVERTISMENT!

Pot apărea vătămări sau daune din cauza componentelor sau accesoriilor scaunului rulant care se pot desprinde după un impact sau o oprire bruscă. Asigurați-vă că toate componentele și accesoriile detașabile sau extractibile sunt îndepărtate de pe scaunul rulant și depozitate în siguranță în vehicul.
Este esențial ca scaunul rulant să fie verificat de un specialist după un accident, o coliziune etc.

IMPORTANT!

Se recomandă instruirea privind utilizarea corectă a unui produs prevăzut cu sistem
de fixare.
Consultați manualul de utilizare furnizat împreună cu sistemul de fixare.
Imaginile următoare pot diferi în funcție de furnizorul sistemului de fixare.

Fixarea scaunului rulant cu ajutorul unui sistem de fixare în 4 puncte

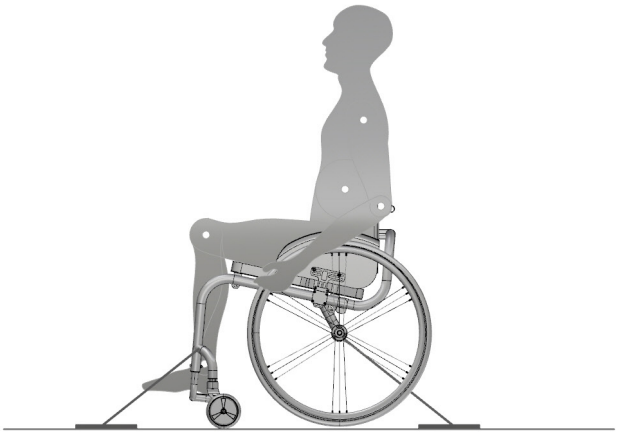

ATENȚIE!

În interiorul vehiculului, poziționați scaunul rulant ocupat de utilizator cu fața în direcția de deplasare.
Acționați frânele de parcare ale scaunului rulant.
Activați sistemul anti-răsturnare (dacă este instalat).

Pozițiile de ancorare ale scaunului rulant, unde trebuie plasate centurile sistemului de fixare, sunt marcate cu simboluri care indică cârligele de prindere.

1. Atunci când utilizați atât centurile frontale, cât și pe cele din spate ale sistemului de fixare în 4 puncte, fixați scaunul rulant de cârligele de prindere montate în vehicul. Consultați Manualul de utilizare furnizat împreună cu sistemul de fixare în 4 puncte.

Poziții de ancorare pentru centurile frontale

1. Fixați centurile frontale pe suporturile roților.
2. Prindeți centurile frontale de sistemul cu cârlige de prindere, conform instrucțiunilor furnizate de producătorul centurii de siguranță.
3. Eliberați frânele de parcare și fixați centurile frontale de tensionare trăgând scaunul rulant spre spate.
4. Reactivați frânele de parcare.

Poziții de ancorare pentru cârligele de prindere din spate

1. Fixați cârligele de prindere pe axul din fibră de carbon.
2. Fixați centurile din spate la sistemul lateral, conform instrucțiunilor furnizate de producătorul centurii de fixare.
3. Strângeți centurile.

IMPORTANT!

Asigurați-vă că cârligele de prindere sunt acoperite cu material antiderapant pentru a evita alunecarea laterală a axului.

IMPORTANT!

Verificați ca pivoții să fie complet introduși pe ambele părți și poziționați în aceeași poziție ca secțiunea panoului lateral. Asigurați-vă că unghiul de înclinare dintre cârligele de prindere și centuri este cuprins între 40° și 45°.

Reglarea centurii de susținere posturală

ATENȚIE!

Centura de susținere posturală trebuie utilizată suplimentar, însă nu poate înlocui niciodată un sistem omologat de siguranță pentru pasageri (centură în 3 puncte).

1. Reglați centura de menținere posturală astfel încât să se adapteze utilizatorului scaunului rulant.

Fixarea sistemului de siguranță în 3 puncte pentru pasageri



ATENȚIE!

Asigurați-vă că sistemul de siguranță în 3 puncte pentru pasageri este fixat pe corpul utilizatorului cât mai strâns posibil, fără a provoca disconfort și fără răsucirea centurii.
Asigurați-vă că sistemul de siguranță în 3 puncte nu este ținut la distanță de corpul utilizatorului de nicio parte a scaunului rulant, cum ar fi cotierele sau roțile etc.
Asigurați-vă că sistemul de siguranță al utilizatorului merge de la utilizator la punctul de ancorare fără nicio interferență din partea altor elemente ale vehiculului, scaunului rulant, scaunelor sau accesoriilor.
Asigurați-vă că centura subabdominală trece exact peste pelvisul utilizatorului și că nu alunecă în sus spre zona abdominală.
Asigurați-vă că utilizatorul poate ajunge la mecanismul de eliberare fără a avea nevoie
de ajutor.

IMPORTANT!

Așezați partea pelviană a sistemului de siguranță în 3 puncte bine de-a lungul pelvisului, astfel încât înclinarea centurii pelviene să se încadreze în zona preferată (A), între 30° și 75° față de planul orizontal. O înclinare mai mare este de preferat, dar niciodată peste 75°.

8. ÎNTREȚINERE

8.1 INDICAȚII DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE!

Unele materiale sunt supuse îmbătrânirii naturale. Acest lucru poate provoca deteriorarea unor piese ale scaunului rulant.
Solicitați verificarea scaunului rulant de către un distribuitor specializat după o perioadă î
ndelungată sau cel puțin o dată pe an.

Distribuitorul dumneavoastră Aria Wheels Srl vă va ajuta cu plăcere în efectuarea intervențiilor periodice de întreținere. Pentru a găsi un distribuitor autorizat în apropiere, vă rugăm să contactați Aria Wheels Srl la datele de contact de la sfârșitul manualului.

8.2 PLAN DE ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea necesare, efectuați în mod regulat următoarele lucrări de întreținere sau solicitați efectuarea lor de către distribuitorul dumneavoastră.

	Săptămânal	*Lunar*	*Anual*
Verificarea presiunii anvelopelor	*X*		
Verificarea poziției roților din spate	*X*		
Verificați reglajul articulației spătarului	*X*		
Verificați centura de menținere posturală	*X*		
Verificare vizuală		*X*	
Curățarea roților din față		*X*	
Verificați conexiunile cu șuruburi		*X*	
Verificați spițele roților		*X*	
Verificați frânele de parcare		*X*	
Solicitați verificarea scaunului rulant de către un distribuitor specializat			*X*

Verificați presiunea anvelopelor

Măsurați presiunea anvelopelor verificând valorile de presiune corespunzătoare (vezi capitolul 11.3 Anvelope).
1. Umflați anvelopa la presiunea necesară.
2. Verificați și profilul anvelopei.
3. Dacă este necesar, înlocuiți anvelopele.

Verificați poziția corectă a roților din spate

1. Trageți de roata din spate pentru a verifica dacă axul este poziționat corect în locașul său. Nu trebuie să fie posibilă extragerea roții.
2. Dacă roțile din spate nu se blochează corect în locașul lor, îndepărtați orice depunere de murdărie și calcar. Dacă problema persistă, solicitați unui distribuitor specializat să regleze din nou axul.

Verificați reglajul articulației spătarului

1. Așezați-vă în scaunul rulant și sprijiniți-vă de spătar. Spătarul trebuie să fie blocat corect.
2. Trageți șnurul de eliberare. Pivoții trebuie să se poată mișca liber pe ambele părți. În caz contrar, articulația spătarului va trebui reasamblată de către un distribuitor specializat.

Verificați centura de menținere posturală

1. Verificați dacă centura de menținere posturală este reglată corect.

IMPORTANT!

Centurile de menținere posturală slăbite trebuie reglate de către un distribuitor specializat.
Centurile de menținere posturală deteriorate trebuie înlocuite de către un distribuitor specializat.

Verificare vizuală

1. Verificați dacă scaunul rulant prezintă piese slăbite, fisuri sau alte defecte.
2. În cazul în care sunt identificate defecte, solicitați imediat unui distribuitor specializat să verifice scaunul rulant.

Curățarea roților din față

1. Verificați dacă roțile din față se pot roti liber.
2. Îndepărtați orice murdărie și fire de păr din rulmenții roților din față.

Verificarea strângerii șuruburilor

Șuruburile se pot slăbi din cauza utilizării constante a scaunului rulant.
1. Verificați dacă șuruburile sunt strânse corect (suport pentru picioare, husă de șezut, părți laterale, spătar, cadru, modul șezut).
2. Strângeți orice piulițe slăbite cu un cuplu adecvat.

IMPORTANT!

Piulițele și șuruburile de siguranță își pierd eficiența după ce au fost slăbite și strânse de mai multe ori.
Solicitați unui distribuitor specializat să înlocuiască piulițele și șuruburile de siguranță.

Verificați tensiunea spițelor

Spițele nu trebuie să fie slăbite sau deformate.
1. Solicitați unui distribuitor specializat să regleze tensiunea spițelor slăbite.
2. Solicitați unui distribuitor specializat să înlocuiască orice spițe rupte.

Verificați frânele de parcare

1. Verificați poziția corectă a frânelor de parcare în locașul lor.
Frâna este reglată corect dacă, atunci când este acționată, sabotul de frână pătrunde în anvelopă câțiva milimetri.
2. Dacă observați că reglajul este incorect, solicitați unui distribuitor specializat să regleze corect frâna.

IMPORTANT!

După înlocuirea sau schimbarea poziției roților din spate, este necesară reglarea din nou a frânelor de parcare.

Verificare după o coliziune sau un impact puternic



IMPORTANT!

Scaunul rulant poate suferi deteriorări cauzate de o coliziune sau un impact puternic, care să nu fie vizibile cu ochiul liber.
Prin urmare, este esențial să solicitați unui specialist să verifice scaunul rulant după o coliziune sau un impact puternic.

Repararea sau înlocuirea camerei de aer

1. Demontați roata din spate și eliminați orice aer rămas din camera de aer.
2. Ridicați un talon al anvelopei de pe marginea jantei. Utilizați o unealtă pentru demontarea anvelopelor de bicicletă; nu folosiți un obiect ascuțit, de exemplu o șurubelniță, pentru a evita deteriorarea camerei de aer.
3. Scoateți camera de aer din anvelopă.
4. Reparați camera de aer folosind un kit de reparație pentru biciclete sau, dacă este necesar, înlocuiți camera de aer.
5. Umflați ușor camera de aer până când capătă o formă rotunjită.
6. Introduceți valva în orificiul pentru valvă din jantă și introduceți camera de aer în anvelopă (camera de aer trebuie să se adapteze la circumferința anvelopei fără a forma cute).
7. Ridicați taloanele anvelopei pe marginea jantei. Începeți din zona din jurul valvei și folosiți o unealtă pentru demontarea anvelopelor de bicicletă.
Verificați pe toată circumferința ca camera de aer să nu fie prinsă nicăieri între anvelopă și jantă.
8. Umflați anvelopa la presiunea maximă. Asigurați-vă că nu există scurgeri de aer din anvelopă.

8.3 ÎNGRIJIRE

Scaunul dumneavoastră rulant vă va însoți mulți ani dacă aveți grijă de el în mod regulat.



IMPORTANT!

Nisipul și apa de mare pot deteriora rulmenții, iar piesele din oțel pot rugini dacă suprafața este deteriorată.
Expuneți scaunul rulant la nisip și apă de mare doar pentru scurt timp și curățați-l după ce a fost folosit pe plajă.



IMPORTANT!

Nu utilizați substanțe abrazive, detergenți agresivi și aparate de curățare cu presiune înaltă.

1.Curățați tapițeria și piesele metalice cu o lavetă moale, umedă.
2. Uscați cu grijă scaunul rulant după utilizarea lui în ploaie sau sub duș.
3. Dacă scaunul rulant este murdar, înmuiați murdăria și îndepărtați-o; apoi uscați cu grijă scaunul rulant.

8.4 DEZINFECȚIE

Respectați concentrația și timpii de expunere indicați de producătorul dezinfectantului. Produsul este adecvat pentru dezinfectare prin pulverizare și ștergere, folosind dezinfectanți obișnuiți de uz casnic. Toate suprafețele trebuie șterse cu o lavetă curată, umezită cu dezinfectant. Aplicați dezinfectantul uniform. Nu clătiți și lăsați produsul să se usuce la aer. Ulterior, produsul trebuie verificat pentru curățenie și eventuale deteriorări.



IMPORTANT !

Pentru a primi o listă cu toate produsele dezinfectante omologate, vă rugăm să întrebați distribuitorul dumneavoastră de încredere.

9. SOLUȚII PENTRU DEFECȚIUNI

9.1 INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Utilizarea zilnică, reglajele noi sau variația forțelor la care este supus scaunul rulant pot cauza defecțiuni. Tabelul de mai jos oferă indicații despre modul de recunoaștere și eliminare a defecțiunilor.



ATENȚIE!

În cazul în care sunt observate anomalii ale scaunului rulant, de exemplu o modificare a comportamentului la deplasare, contactați imediat distribuitorul dumneavoastră specializat.



IMPORTANT!

Unele dintre intervențiile menționate trebuie efectuate de către un distribuitor specializat autorizat. Acestea au fost marcate corespunzător. Recomandăm ca toate reglajele să fie efectuate de către un distribuitor specializat.

9.2 IDENTIFICAREA ȘI REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

DEFECȚIUNE	*CAUZĂ POSIBILĂ*	*SOLUȚIE*
Scaunul rulant nu se deplasează înainte în linie dreaptă	*Presiunea uneia dintre roțile din spate este incorectă*	*Reglați presiunea anvelopei > 11.3 Anvelope*
	Una sau mai multe spițe sunt rupte	*Înlocuiți spița/spițele rupte > Distribuitor specializat*
	Tensiunea spițelor este diferită	*Solicitați reglarea tensiunii spițelor slăbite > Distribuitor specializat*
	Rulmentul roții din față este murdar sau deteriorat	*Curățați sau înlocuiți rulmentul > Distribuitor specializat*
Scaunul rulant se răstoarnă ușor pe spate	*Roțile din spate au fost montate prea în față*	*Reglați baricentrul > Distribuitor specializat*
	Înclinarea spătarului este excesivă	*Reduceți înclinarea spătarului > Distribuitor specializat*
Frânele acționează incorect sau asimetric	*Presiunea anvelopelor roților din spate este insuficientă*	*Reglați presiunea anvelopelor > 11.3 Anvelope*
	Reglajul frânei este incorect	*Corectați reglajul frânei > Distribuitor specializat*
Rezistența la deplasare este foarte mare	*Presiunea anvelopelor roților din spate este insuficientă*	*Reglați presiunea anvelopelor > 11.3 Anvelope*
	Roțile din spate nu sunt paralele	*Verificați ca roțile din spate să fie paralele > Distribuitor specializat*
Roțile din față vibrează la deplasare cu viteză mare	*Tracțiunea blocului rulmentului roții din față este insuficientă*	*Strângeți ușor șurubul de pe axul blocului rulmentului >Distribuitor specializat*
	Roata din față este uzată	*Înlocuiți roata din față > Distribuitor specializat*
Roata din față virează cu dificultate sau este blocată	*Rulmentul cu bile este murdar sau defect*	*Curățați sau înlocuiți rulmentul cu bile > Distribuitor specializat*

10. DUPĂ UTILIZARE

10.1 REUTILIZARE

Scaunul rulant poate fi reutilizat. Este necesar să se efectueze următoarele operațiuni:
• Curățare și dezinfectare conform descrierilor din capitolul 8.3 Îngrijire și capitolul 8.4 Dezinfectare din prezentul Manual de utilizare.
• Inspecție conform descrierii din capitolul 8.2 Plan de întreținere din prezentul Manual de utilizare.
• Reglare în funcție de utilizator, pe baza documentației de Asistență tehnică disponibile la sediul principal Aria Wheels Srl.

10.2 ELIMINARE

Protejați mediul prin asigurarea eliminării corespunzătoare a scaunului dumneavoastră rulant.
Respectați legislația națională și reglementările locale privind eliminarea.
Pentru o eliminare corectă, contactați distribuitorul dumneavoastră specializat sau administrația publică locală pentru a obține adresa unui centru local de eliminare.

11. DATE TEHNICE

11.1 GREUTATE ȘI DIMENSIUNI

Toate specificațiile privind greutatea și dimensiunile se referă la lățimea șezutului și la adâncimea acestuia,
În toate configurațiile posibile ale scaunului rulant. Dimensiunile și greutatea pot varia în funcție de configurațiile diferite.

Lățimea șezutului:	*240 - 460 mm (în trepte de 20 mm)*
Adâncimea șezutului:	*280 - 460 mm (în trepte de 20 mm)*
Distanța dintre șezut și suportul pentru picioare:	*120 - 180 mm (în trepte de 20 mm)*
Înălțimea spătarului:	*240 - 420 mm (în trepte de 15 mm)*
Lungimea genunchi–călcâi:	*300 - 440 mm (în trepte de 10 mm)*
Înălțimea frontală a șezutului:	*450 - 520 mm (în trepte de 10 mm)*
Înălțimea posterioară a șezutului:	*360 - 430 mm (în trepte de 10 mm)*
Centrul de greutate:	*100 - 150 mm (în trepte de 10 mm)*
Unghiul spătarului:	*85° - 95° față de podea*
Axul roții din spate:	*0° sau 3°*
Unghiul cadrului:	*83° sau 93°, disponibil doar pentru anumite modele*

Greutatea scaunului rulant SW440 cu roți spate standard: *(spătar postural inclus)*	*aproximativ 8.9 kg* pentru Aria 1.0* *aproximativ 10.7 kg* pentru Aria 2.0* *aproximativ 8.1 kg* pentru Aria ULTRA* *aproximativ 7.1 kg* pentru Aria SPECIALE* *aproximativ 7.5 kg* pentru Aria KID*
Greutatea scaunului rulant SW440 fără roți din spate: *(spătar postural inclus)*	*aproximativ 4.9 kg* pentru Aria 1.0* *aproximativ 7.5 kg* pentru Aria 2.0* *aproximativ 4.9 kg* pentru Aria ULTRA* *aproximativ 3.9 kg* pentru Aria SPECIALE* *aproximativ 4.5 kg* pentru Aria KID*
Sarcina nominală:	*120 kg pentru Aria 1.0 și Aria 2.0* *100 kg pentru Aria ULTRA și Aria SPECIALE* *75 kg pentru Aria KID*

Greutatea depinde de configurațiile posibile. Este posibil ca unele dimensiuni să nu fie disponibile pentru anumite modele de scaune rulante. Consultați formularele de comandă ale produsului pentru specificații.

11.2 CONDIȚII DE MEDIU
Nu expuneți scaunul rulant la temperaturi sub -20 °C și peste 40 °C.

11.3 ANVELOPE
Presiunea optimă depinde de tipul anvelopei:

Presiune maximă în anvelope
Anvelope pentru deplasare ușoară: 7 bar / 700 kPa / 101 psi
Anvelope profilate (Marathon): 7,5 bar / 750 kPa / 108 psi
Anvelope slick (speed run): 10 bar / 1000 kPa / 145 psi
Anvelope de mountain bike: 4 bar / 400 kPa / 58 psi
Anvelope din cauciuc plin: - -



LĂȚIME TOTALĂ(TW)
(cambrare 0°) SW + 180 mm
(cambrare 3°) SW + 225 mm



ADÂNCIME TOTALĂ (TD)
83° =SD+120 mm +130 mm +100 mm +(100 mm -CG)
93° =SD+120 mm +130 mm +100 mm +(100 mm -CG) +35 mm

11.4 ETICHETE

Simbolurile menționate pe etichetă sunt cele conforme cu reglementările UNI EN ISO 15223-1:2021 / ISO 20417:2021.

SIMBOLURI	*SEMNIFICAȚIE*
REF	*Număr de catalog*
	Producător
	*Data fabricației*
	*Citiți manualul de utilizare*
SN	*Număr de serie*
CE	*Conform cu reglementările CE*
	*Sarcină nominală*
	*Atenție*
MD	***MDR 2017/745 (UE)***

12. Declarație de conformitate

Vizitați ariawheels.com pentru a obține declarațiile de conformitate.

NOTIFICARE PENTRU UTILIZATOR:

RAPORTAȚI ORICE INCIDENT GRAV SURVENIT ÎN LEGĂTURĂ CU DISPOZITIVUL CĂTRE PRODUCĂTOR ȘI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN STATUL MEMBRU DE REȘEDINȚĂ

NOTAȚI PE ACEASTĂ PAGINĂ LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE EFECTUATE