INSTRUCTIUNI DE CITIRE

Cititi si respectati toate instructiunile din acest manual inainte de a utiliza remorca pentru prima data. Daca nu intelegeti ceva din manual sau aveti nevoie de asistenta suplimentara pentru montaj, contactati furnizorul autorizat WISKING.

Utilizarea in siguranta a produsului WISKING depinde de respectarea atenta a avertismentelor, precautiilor si instructiunilor din acest manual. Depinde si de buna dumneavoastra judecata si de simtul practic, precum si de cele ale furnizorului, ingrijitorului si/sau specialistului medical. WISKING nu raspunde pentru vatamari sau daune cauzate de nerespectarea avertismentelor, precautiilor si instructiunilor din acest manual. WISKING nu raspunde pentru vatamari sau daune cauzate de lipsa de prudenta ori de bun-simt.



Simbolurile de mai jos sunt folosite in acest manual pentru a identifica avertismentele si precautiile. Este foarte important sa le cititi si sa le intelegeti complet.

AVERTISMENT! Nerespectarea avertismentelor din manual poate duce la deteriorarea Q8 si la vatamari corporale.

AVERTISMENT! Compania Wisking nu isi asuma raspunderea pentru accidentele sau daunele cauzate de utilizarea acestui produs.
NOTA! Atrage atentia utilizatorului asupra aspectelor care pot deteriora Q8.

CUPRINS

I. INTRODUCERE..... 3

II. Structura si parametrii produsului..... 4

III. REMORCA DVS. 5

IV. METODA DE INSTALARE..... 8

(I) INSTALAREA CAPULUI..... 8

(II) INSTALAREA PIESEI DE CONECTARE..... 9

1.CONECTARE NORMALA PE DOUA PARTI..... 10

2.NORMAL INTERMEDIATE INTERMEDIARA..... 12

III. CONECTARE NOUA PE DOUA PARTI..... 14

IV. CONECTARE NOUA INTERMEDIARA..... 16

V. BATERII SI INTRETINERE..... 18

VI. Intretinere 21

VII. Aspecte importante pentru conducere in siguranta..... 23

VIII. GARANTIE..... 24

I. INTRODUCERE

Bun venit la Wisking Electric Machine Co., Ltd. (Wisking). Felicitari pentru achizitionarea noii remorci Wisking. Designul remorcii

combina componente moderne, de ultima generatie, cu un stil actual si atractiv. Suntem siguri ca dotarile si functionarea fara probleme vor aduce mai multa comoditate in viata de zi cu zi si va vor oferi satisfactie deplina.

La Wisking, siguranta dumneavoastra este cea mai importanta. Cititi si respectati toate instructiunile din acest manual inainte de a utiliza remorca pentru prima data. Aceste instructiuni au fost elaborate in beneficiul dumneavoastra. Intelegerea lor este esentiala pentru utilizarea in siguranta a noii remorci Wisking.

Wisking nu raspunde pentru daune materiale sau vatamari corporale rezultate din utilizarea nesigura a remorcii Wisking. De asemenea, Wisking nu raspunde pentru daune materiale sau vatamari corporale rezultate din nerespectarea instructiunilor si recomandarilor din acest manual, din alte materiale Wisking referitoare la remorca sau de pe remorca Wisking.


La data publicarii, acest manual reflecta cele mai noi standarde tehnice si informatii despre produs. Ne rezervam dreptul de interpretare si revizuire a manualului. Pot exista mici diferente intre modificarile produsului, ilustratiile si explicatiile din manual si produsul achizitionat. Daca intampinati probleme pe care nu le puteti rezolva in timpul utilizarii in siguranta a remorcii sau considerati ca instructiunile ori recomandarile din manual nu permit o operare sigura, solicitati ajutorul distribuitorului local WISKING.





Daca aveti sugestii sau solicitari, va rugam sa ne contactati prin telefon, fax sau sa lasati un mesaj pe site-ul nostru. Apreciem opiniile dumneavoastra si vom continua sa imbunatatim calitatea si serviciile noastre. Wisking va fi intotdeauna un partener de incredere.

Companie	Shanghai Wisking Electric Machine Co., Ltd			
Fabrica adresa	No.168 Ping Gang Road, Situan Town , Fengxian District, Shanghai, China			
	Tel：	13402073772	Fax：	021-51012038
	E-mail：	ww5668@126.com		
Website	www.wisking.com.cn			

II. STRUCTURA SI PARAMETRII PRODUSULUI

Frana

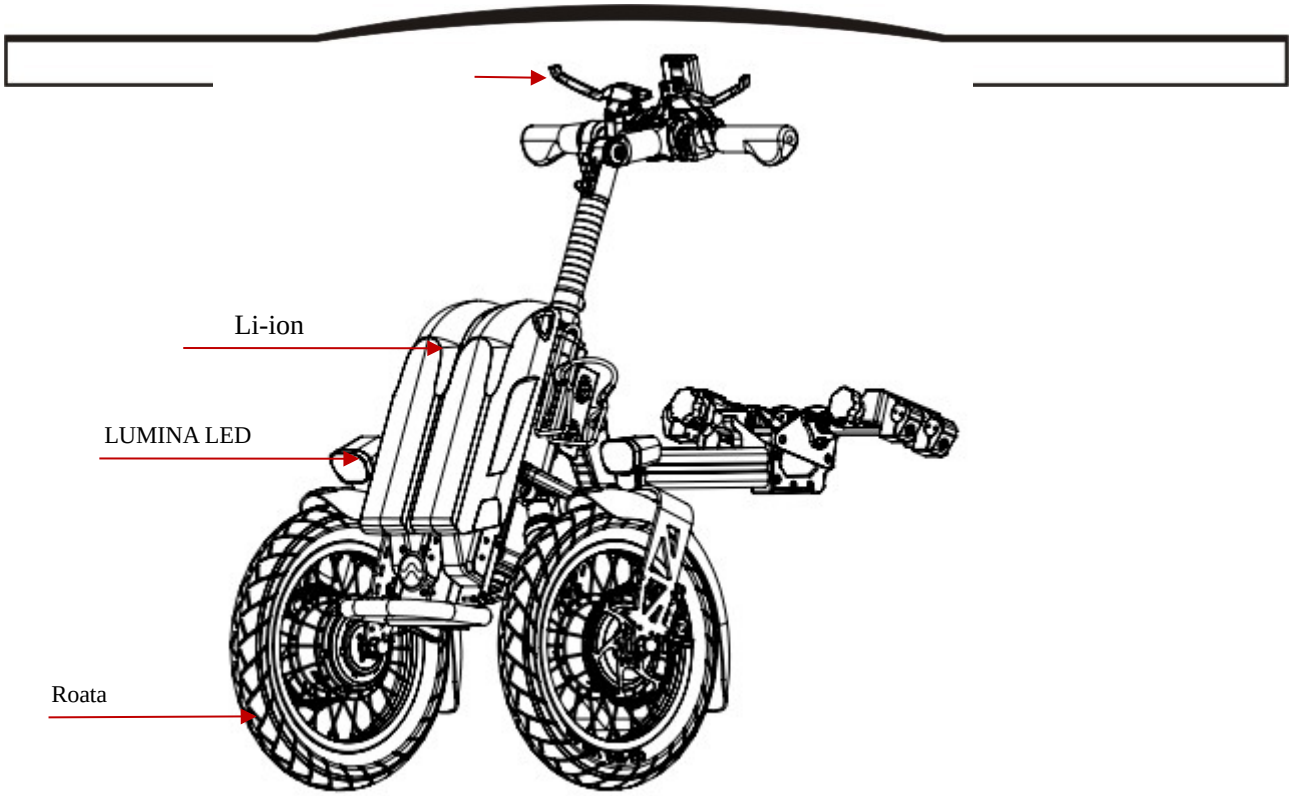

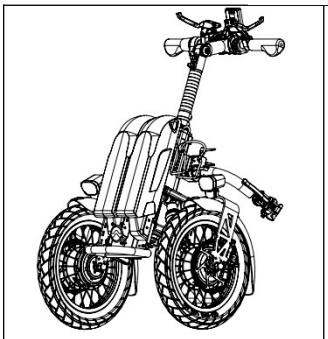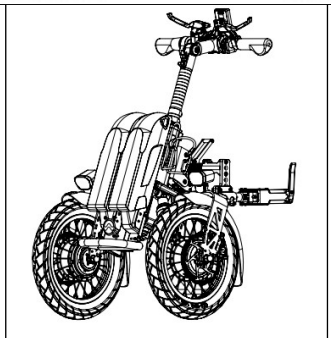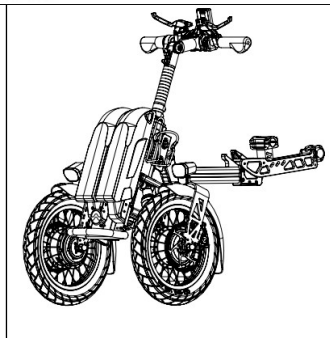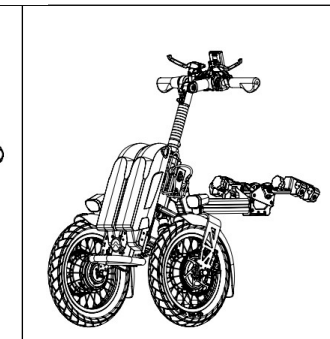			
CONECTARE NORMALA PE DOUA PARTI	**CONECTARE NORMALA INTERMEDIARA**	**CONECTARE NOUA RAPIDA**	**CONECTARE SPEEDY NOUA**
Potrivit pentru scaun rulant rigid		**Potrivit pentru scaun rulant rigid, necesita doua bare**	**Potrivit pentru scaune rulante pliabile**

ANVELOPA:	14 inch, cu aer	BATERIE:	36V/15AH Li-ion x2
VITEZA MAXIMA:	25 KM/H +/-5 KM	AUTONOMIE:	80+/-5 KM (variaza in functie de drum, panta, starea scaunului rulant, greutate, vant, conditii de drum si alti factori)
Motor:	450W x2	Greutate:	24 KG fara baterie si piesa de conectare

III. DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRA

（I）CAP

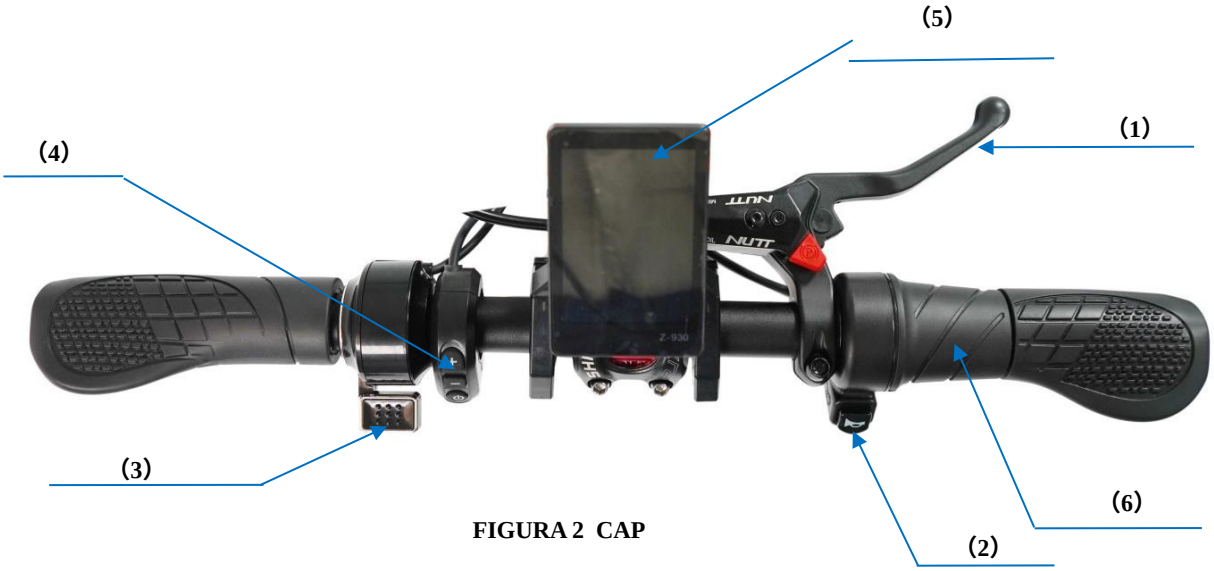


FIGURA 2 CAP

(1) Frana mecanica

(2) Comutator claxon

(3) Frana electromagnetica

(4) Reglaj treapta

(5) Afisaj LCD: pentru metodele specifice de utilizare, cititi sectiunea urmatoare, "Descrierea afisajului LCD".

(6) Tasta inainte/inapoi: apasati spre stanga pentru deplasare inainte; apasati spre dreapta pentru mers inapoi.

II. Descrierea functiilor tastelor



1. Tasta: pornire/oprire

Tineti apasat 3 secunde pentru pornire/oprire

2. **+ tasta: apasati scurt + pentru a creste treapta; tineti apasata tasta + pentru a porni/opri farurile.**

3. **- tasta: apasati scurt tasta - pentru a reduce treapta**


Tineti apasata tasta - pentru a comuta in modul de mers inapoi

4. Setari meniu functii:


Apasati simultan tastele + si - pentru a intra in meniul functiilor. Apasati scurt tasta pentru a schimba optiunile; apasati + sau - pentru a seta valorile corespunzatoare. Dupa finalizare, apasati simultan + si - pentru iesire.

III. DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRA

II. Afisaj

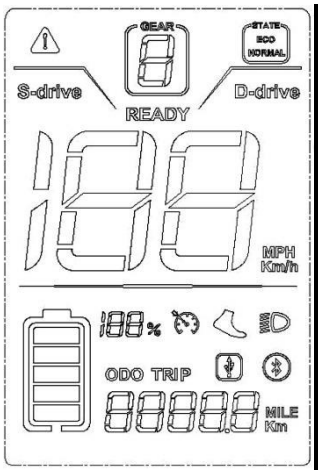

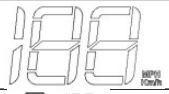

1		Afisaj viteza pana la 199 KM/H.
2		De jos in sus, nivelul de incarcare creste treptat. Partea de jos a celulei afisate indica putere scazuta, iar partea de sus indica putere ridicata. Partea dreapta afiseaza procentul corespunzator de energie ramasa.
3		Afiseaza: kilometraj total, kilometraj partial, tensiune in timp real, avertizare timp de functionare, avertizare defect, valoare tensiune rotativa
4		ECO: indica modul de pornire non-zero. NORMAL: indica modul de pornire de la zero.
5		P gear: reverse gear Treapta 1: viteza minima Treapta 2: viteza intermediara Treapta 3: viteza maxima
6		De la stanga la dreapta, functiile afisate sunt: modul cruise, modul asistenta 6 KM, indicator far aprins, indicator incarcare USB, indicator stare conexiune Bluetooth
7		Zona de afisare a defectiunilor. Numarul din zona multifunctionala reprezinta starea specifica a defectiunii corespunzatoare, dupa cum urmeaza.

Trailer status meaning code:

Status code	Status meaning
ERRO 1	MOTOR ERROR
ERRO 2	THROTTLE ERROR
ERRO 3	CHROLLER ERROR
ERRO 4	ELECTRONIC BRAKE ERROR
ERRO 5	LOW-VOLTAGE PROTECTION
ERRO 6	CONNECTION ERROR , THE CONTROLLER CAN' T RECEIVE THE OUTPUT
ERRO 7	CONNECTION ERROR , THE CONTROLLER CAN' T RECEIVE THE OUTPUT 0

III. Reglarea unghiului capului

Capul remorcii poate fi reglat in sus sau
downward:
1. 1. Folositi imbusul nr. 5 pentru a slabi surubul (surubul nu trebuie desfacut complet; slabiti-l doar atat cat unghiul
sa poata fi reglat);
2. Reglati ghidonul in sus sau in jos la
unghiul dorit;
3. Strangeti suruburile.



IV. METODA DE INSTALARE

(1) INSTALAREA CAPULUI

PROCEDURA DE INSTALARE (imaginile din aceasta sectiune sunt doar schematice; unele elemente pot sa nu se aplice din cauza actualizarilor sau personalizarilor produsului)



CORPUL DISPOZITIVULUI

SUPORT

	 (2) (1)	
Pasul 1: Introduceti tubul suport pe teava corespunzatoare	Pasul 2: Daca exista doua baterii cu litiu, instalati mai intai bateria (1) din dreapta imaginii, apoi bateria (2).	Pasul 3: Aliniati bateria cu fanta de fixare si coborati-o in baza bateriei. Cand se aude un clic, dispozitivul este montat corect. Dupa fixarea bateriei din dreapta, scoateti cheia.

si strangeti surubul de fixare.





Pasul 4: La instalarea bateriei (2), porniti butonul de alimentare al bateriei, aliniati bateria cu sina bateriei, apoi asezati-o in baza bateriei. Dupa ce se aude un clic, bateria este instalata corect.

IV. METODA DE INSTALARE

Mai jos sunt pozitiile de reglare care nu au fost prezentate anterior:

1. Asigurati-va ca piciorul de sprijin nu atinge suportul pentru picioare si reglati distanta dintre remorca si utilizator.

-- Reglarea lungimii conexiunii cu carlig

2. Verificati daca atinge picioarele dupa asezare

-- Unghi suport/inaltime cap/inaltime picior/unghi rotire cap



Reglarea lungimii piesei de conectare cu carlig

Folositi imbusul nr. 4 pentru reglarea lungimii



Reglati unghiul capului

Folositi imbusul nr. 5 pentru reglarea unghiului



Reglarea unghiului manerului capului

Folositi imbusul nr. 5 pentru reglarea unghiului



Reglarea inaltimii piciorului de sprijin

Desfaceti surubul de fixare, reglati inaltimea suportului si strangeti din nou.

AVERTISMENT! Este important sa va asigurati ca toate suruburile handbike-ului sunt stranse inainte de deplasare.
AVERTISMENT! Evitati virajele la viteza mare si virajele laterale.

IV. METODA DE INSTALARE

1. INSTALAREA CONECTARII NORMALE PE DOUA PARTI

1) Prezentarea produsului

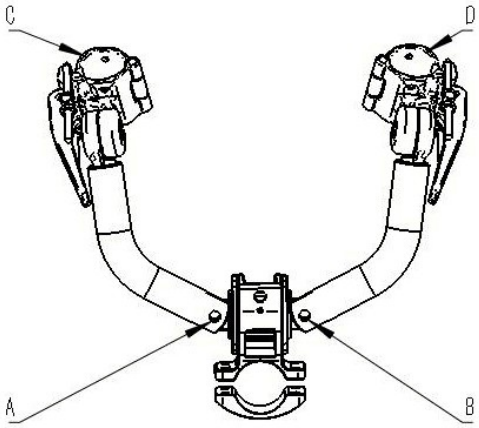


FIGURA 5

REGLAREA LATIMII CONEXIUNII:

Figura 5, slabiti suruburile A si B; distanta liniara dintre C si D poate fi modificata pentru scaune rulante cu latimi diferite. (Latimea se refera la distanta sectiunii frontale a tubului-punte al scaunului rulant. Dupa reglarea corecta, suruburile A si B trebuie blocate. Aceasta operatie se face o singura data, cu exceptia schimbarii scaunului rulant.)

REGLAREA DIMENSIUNII CLEMEI:

Folositi o cheie fixa pentru a regla piulita de pe bara rotunda in forma de U (figura 6), modificand lungimea acesteia si dimensiunea clemei.



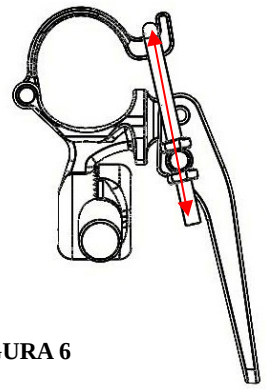


FIGURA 6

REGLAREA UNGHIULUI CLEMEI:

Ansamblul clemei capului este conectat la bratul de legatura prin filet. Folositi o cheie imbus pentru a slabi surubul, trageti blocul de reglare a unghiului, apoi strangeti surubul dupa modificarea unghiului.



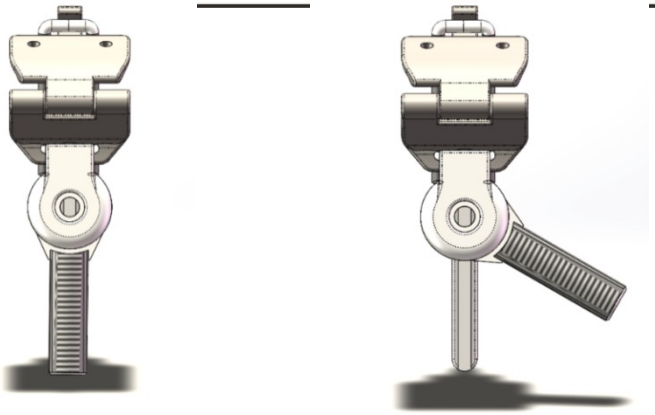


FIGURA 7

Figura 8 Inainte (stanga) si dupa reglare

IV.INSTALARE METHOD

2) Pasi de instalare (imaginile din aceasta sectiune sunt doar schematice; unele elemente pot sa nu se aplice din cauza actualizarilor sau personalizarilor produsului).



PASUL 1: Tineti surubul rosu cu o mana, ridicati piesa de conectare cu cealalta mana, trageti piesa de conectare pana la pozitia orizontala a scaunului rulant si eliberati surubul rosu.



PASUL 2: Asezati capul de tractare in acelasi plan cu scaunul rulant si strangeti surubul negru. Dupa strangere, mecanismul de conectare nu mai trebuie tinut cu mana, ceea ce usureaza instalarea.



PASUL 3: Prindeti tubul-punte al scaunului rulant si strangeti suruburile. (Clemele de pe ambele parti trebuie sa fie la acelasi nivel.)



PASUL 4: Slabiti suruburile negre de fixare pentru pasul urmator.




PASUL 5: Prindeti capul cu ambele maini si ridicati-l pana la pozitia potrivita, apoi strangeti surubul negru.




PASUL 6: Verificati inaltimea de ridicare a rotilor fata ale scaunului rulant; aceasta trebuie sa fie mai mare de 5 cm.


IV. METODA DE INSTALARE

2、CONECTARE NOUA RAPIDA((imaginile din aceasta sectiune sunt schematice; unele elemente pot sa nu se aplice din cauza actualizarilor sau personalizarilor produsului).

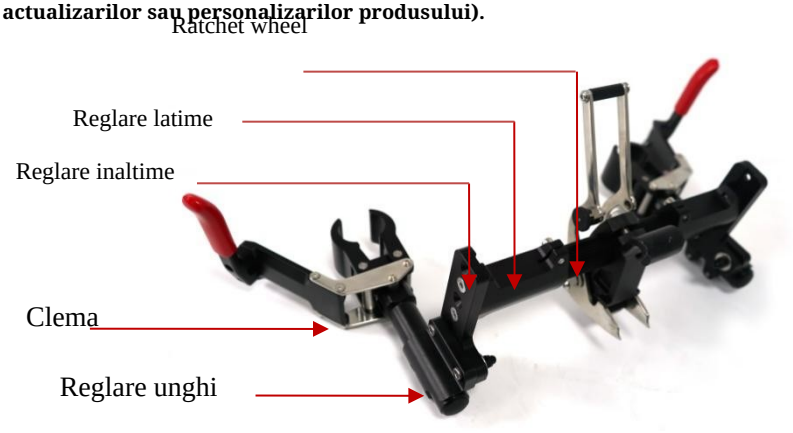


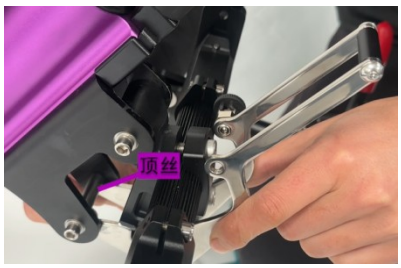


PASUL 1: Piesa de conectare atinge usor surubul de fixare dar nu se agata.

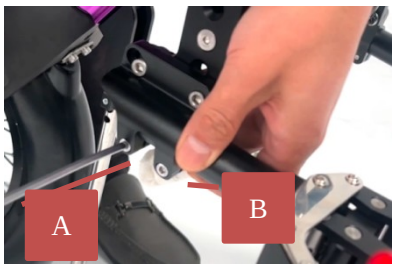


PASUL 2: Folositi imbusul nr. 4 pentru a slabi cele 4 suruburi A si B.

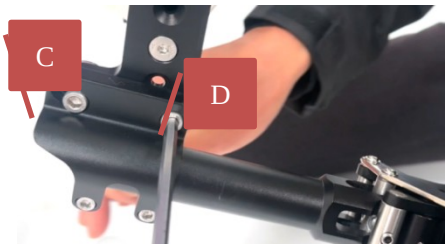


PASUL 3: Folositi imbusul nr. 5 si cheia pentru a slabi cele 4 suruburi din jurul C si D.

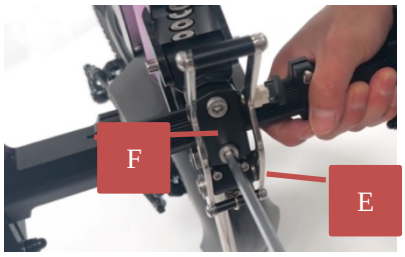



PASUL 4: Folositi imbusul nr. 6 pentru a slabi cele doua suruburi de la E si F.

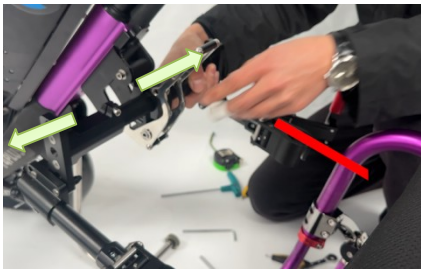

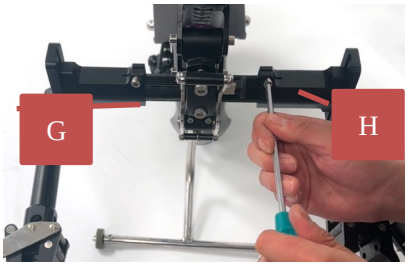


PASUL 5: Dupa alinierea scaunului rulant cu tubul-punte, fixati suruburile E si F la roata dintata, asigurandu-va ca aceasta este in pozitia centrala.	PASUL 6: Folositi imbusul nr. 5 pentru a slabi cele doua suruburi de la G si H.

IV. METODA DE INSTALARE

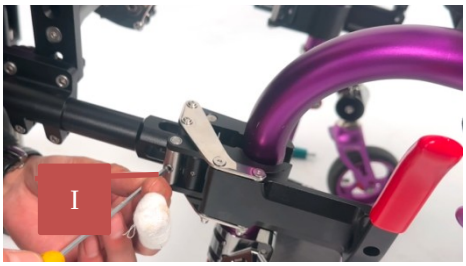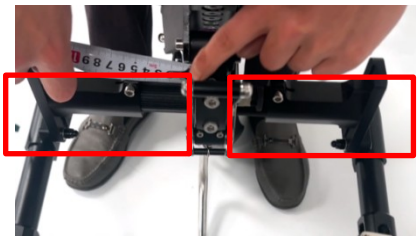	
PASUL 7: Conectati piesa de legatura la tubul scaunului rulant, asigurati o latime suficienta, iar pozitia tubului-punte trebuie sa fie pe aceeasi orizontala.	PASUL 8: Acordati atentie gradului de potrivire (strangere) dintre clema si tubul-punte. Daca este prea slab sau prea strans, imbusul nr. 6 poate fi rotit spre interior sau exterior.
	
PASUL 9: Folositi o rigla pentru a verifica daca dimensiunile rotii dintate de pe ambele parti sunt identice; dupa confirmare, strangeti cele 2 suruburi de la G si H.	PASUL 10: Reglati distanta dintre bratul frontal si scaunul rulant. Dupa ce masurati aceeasi distanta pe ambele parti cu o rigla, strangeti suruburile A, B, C, D, E si F.
	
PASUL 11: Dupa strangerea tuturor suruburilor, reglajul este finalizat; puteti ridica partea frontala, iar un "clic" indica blocarea in pozitie.	PASUL 12: Dupa blocarea in pozitie, trageti stiftul de siguranta in pozitia blocata pentru a preveni contactul accidental in timpul deplasarii.



PASUL 13: Dupa instalare, verificati inaltimea rotii fata fata de sol; aproximativ 3 cm este potrivit.

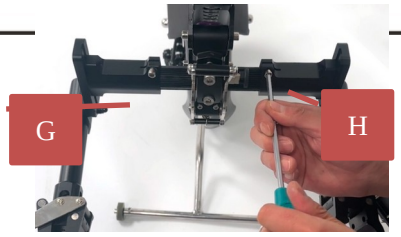

PASUL 14: Pentru a regla inaltimea rotii fata fata de sol, rotiti roata dintata mentionata la pasul 4.

IV. METODA DE INSTALARE

3. CONECTARE SPEEDY NOUA (imaginile din aceasta sectiune sunt doar schematice; unele elemente pot sa nu se aplice din cauza actualizarilor sau personalizarilor produsului)



CAP PART





CONECTARE NOUA RAPIDA



CONECTARE SPEEDY NOUA

1: CONECTARE NOUA RAPIDA

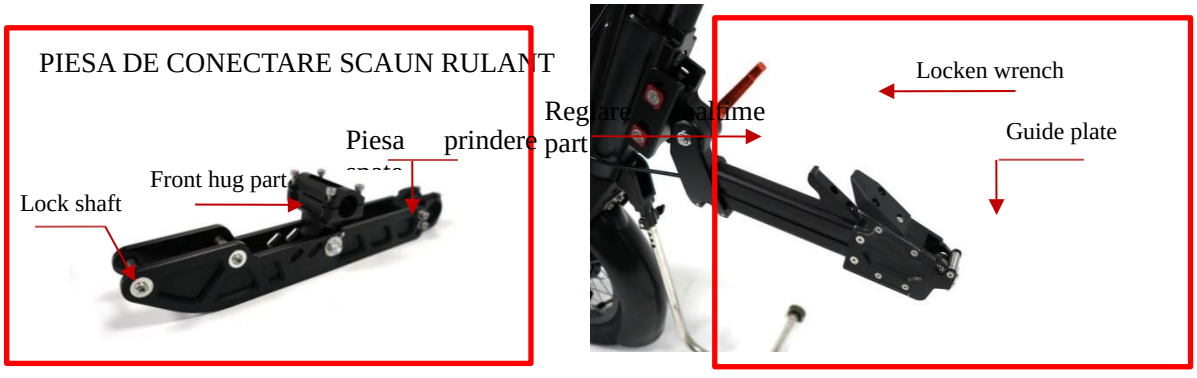

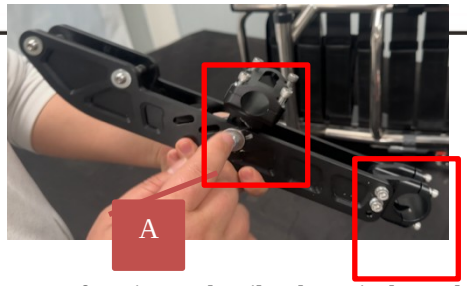

PASUL 1: Desfaceti suruburile de prindere de pe piesele de fixare fata si spate. Surubul A indicat este slabit astfel incat sa fie in stare mo



PASUL 2: Determinati distanta dintre centrele celor doua bare ale scaunului rulant pentru a asigura distanta corecta a piesei de conectare.



PASUL 3: Folositi imbusul nr. 4 pentru a monta piesa de fixare spate, preinstalata aici. Nu strangeti complet



PASUL 4: Folositi imbusul nr. 4 pentru a monta piesa de fixare fata, preinstalata aici. Nu strangeti complet.

IV. METODA DE INSTALARE



PASUL 5: Dupa preinstalare, folositi o rigla pentru a masura distanta dintre piesa de fixare spate si bara, asigurandu-va ca piesa este centrata. Strangeti alternativ cele 4 suruburi, dar nu le strangeti complet.



PASUL 6: Agatati piesa de conectare a scaunului rulant si piesa de fixare fata, apoi verificati inaltimea rotii fata. Deoarece piesa de fixare fata de la pasul 4 nu este stransa, inaltimea poate fi reglata direct prin apasare sau ridicare.



PASUL 7: Daca ridicarea rotii fata nu poate fi reglata
la pasul 6, reglati gaurile de la suruburile indicate la A.



PASUL 8: Inaltimea rotii fata fata de sol trebuie sa fie de aproximativ 3-4 cm. Dupa stabilirea inaltimii, strangeti toate suruburile conexiunilor scaunului rulant, inclusiv cele 8 suruburi de pe suporturile fata si spate si suruburile indicate la A. (Daca scaunul rulant are sezut rigid, indepartati sezutul.)







PASUL 9: Slabiti mecanismul de conectare, apropiati piesa de conectare a scaunului rulant de piesa frontala si verificati pozitia axului de blocare si a placii de ghidare. Pozitia corecta: placa de ghidare este cu aproximativ 5 mm mai sus decat axul de blocare. Daca nu, efectuati pasii 10 si 11 pentru reglare.	PASUL 10: Slabiti B, C si suruburile corespunzatoare de pe piesa de reglare a inaltimii (4 in total). Mecanismul frontal de conectare se poate deplasa in sus si in jos; reglati-l in pozitia potrivita si strangeti cele 4 suruburi.
 PASUL 11: Daca pasul 10 nu este suficient, reglati gaurile piciorului. Instalarea este completa cand pozitia este reglata corect.	

IV.INSTALARE METHOD


4:NEW SPEDDY CONNECTION

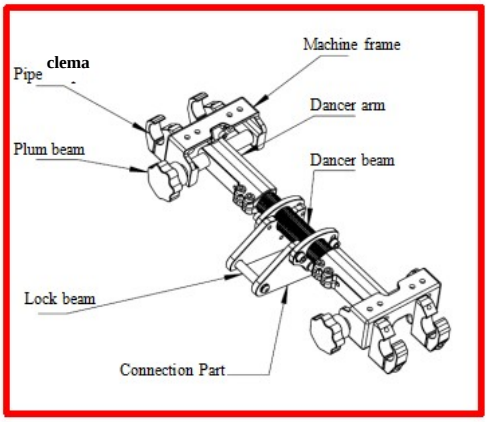

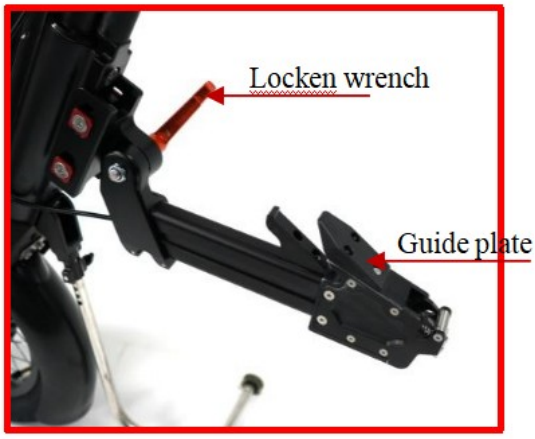

Pasul 1: Instalati clema de teava orientata in sus pe cadrul scaunului rulant. Daca montajul interfereaza cu frana, indepartati mai intai frana.	 Pasul 2: Instalati cele doua suporturi. Acordati atentie pozitiei de instalare si asigurati-va ca pozitia orizontala a celor doua suporturi este aceeasi.



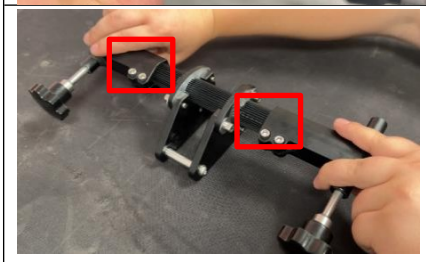


Pasul 3: Folositi imbusul nr. 5 pentru a slabi cele 4 suruburi de pe tija de reglare, pentru a usura instalarea si reglajul pe subcadru.



Pasul 4:
Gasiti o suprafata orizontala, cu axul de blocare la aproximativ 1 cm deasupra planului orizontal.
(aprox. grosimea unui telefon), apoi instalati bratul orizontal. Acesta este un unghi de instalare bun; dupa conectarea rotii fata, inaltimea fata de sol va fi potrivita.



Pasul 5: Instalati bara de conectare pe sasiu si strangeti axul de cuplare.

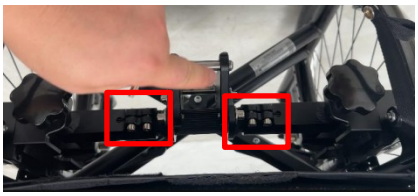


Pasul 6: Verificati daca placa de conectare este centrata pe bratul de reglare; dupa centrare, strangeti cele patru suruburi de pe tija de reglare.


IV. METODA DE INSTALARE




Pasul 7: Agatati piesa de conectare a scaunului rulant si piesa frontala de conectare; verificati inaltimea rotii fata fata de sol. Daca este prea mare sau prea mica, reglati inaltimea axului de blocare.

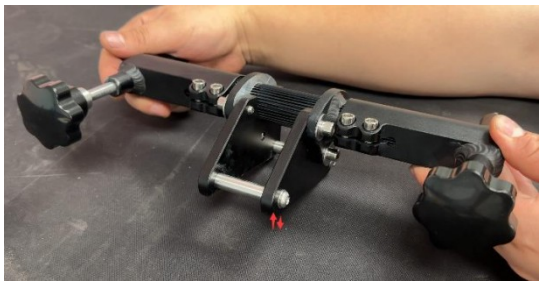


Pasul 8: Inaltimea axului de blocare poate fi reglata conform metodei de la pasul 4. Cand inaltimea rotii fata fata de sol este prea mare, axul de blocare se muta cu o pozitie in sus; cand este prea mica, se muta cu o pozitie in jos. Nu reglati prea mult dintr-o data. Inaltimea rotii fata fata de sol trebuie sa fie de aproximativ 3-4 cm.

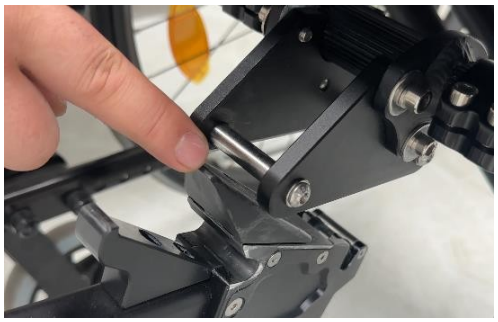

Pasul 9: Slabiti mecanismul de conectare, apropiati piesa de conectare a scaunului rulant de piesa frontala si verificati pozitia axului de blocare si a placii de ghidare. Pozitia corecta: placa de ghidare este cu aproximativ 5 mm mai sus decat axul de blocare. Daca nu, efectuati pasii 10 si 11 pentru reglare.

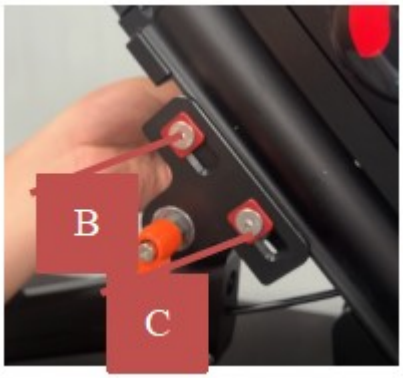

Pasul 10: Slabiti B, C si suruburile corespunzatoare de pe reglajul inaltimii (4 in total). Mecanismul frontal de conectare se poate deplasa in sus si in jos; reglati-l in pozitia potrivita si strangeti cele 4 suruburi.

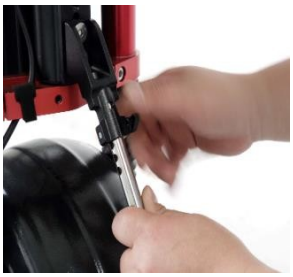


Pasul 11: Daca pasul 10 nu este suficient, reglati gaura piciorului de sprijin. Instalarea este completa cand pozitia este reglata corect.

V. BATERII SI INTRETINERE

I. Model baterie

Tip: baterie cu litiu	Tensiune: 48V	Capacitate: 18AH

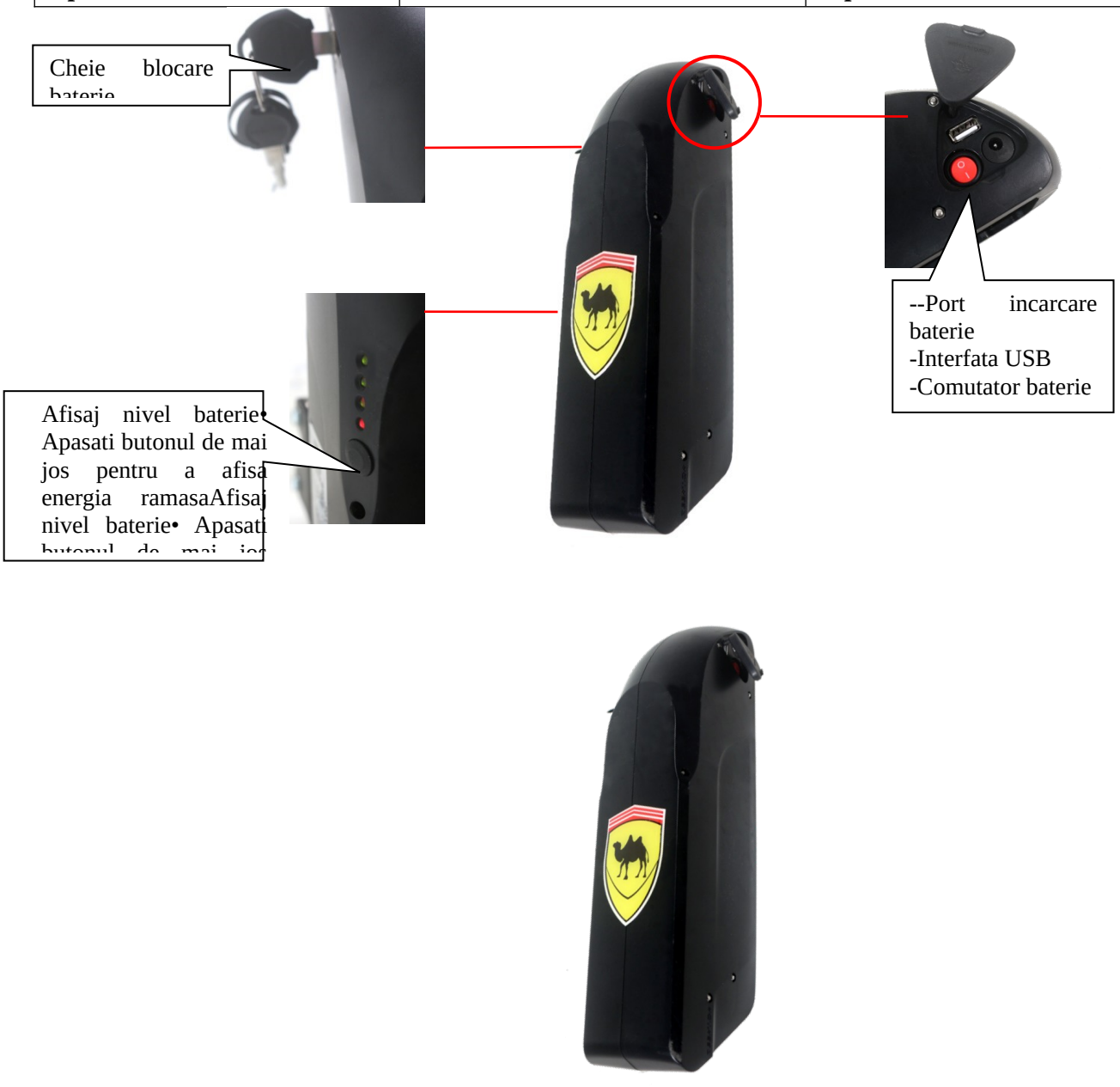

II. Scoaterea/instalarea bateriei

1). Opriti alimentarea;

2). Deschideti incuietoarea bateriei cu cheia;

3). Scoateti bateria in directia indicata de sageata;

4). Instalarea bateriei: pe fanta bateriei, orientata spre baza, apasati bateria in jos pentru a va asigura ca legatura este ferma.

Figura 9 Scoaterea bateriei

AVERTISMENT! Cadrul suport al bateriei, mufa si accesoriile aferente includ cablu si conector de cablu. Spalati-va pe maini dupa atingere.

AVERTISMENT! Nu scoateti bateria cu forta; contactul bateriei se poate deteriora.

INCARCAREA BATERIILOR

Pregatire pentru incarcare:

1. Conectati mufa metalica a incarcatorului metal plug (i.e. Figura 9. End A) la portul de alimentare al bateriei;

2. Conectati celalalt capat al incarcatorului (figura 9, capatul B) la o priza de 110 V sau 220 V;

3,Then tindicatorul incarcatorului este rosu Light Turn green indica faptul ca incarcarea este completa

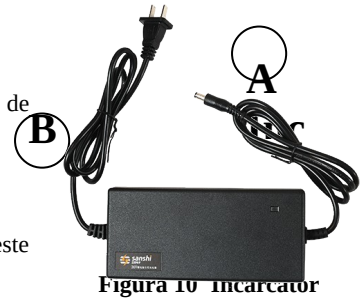


Figura 10 Incarcator

V. BATERII SI INTRETINERE

RETINETI! Cand sursa de alimentare nu este aproape de Q8, puteti scoate bateria si o puteti incarca langa priza. Cand montati bateria la loc, conectarea trebuie sa fie corecta, iar baza bateriei bine fixata; consultati scoaterea bateriei.

AVERTISMENT! Folositi doar incarcatorul furnizat; incarcatoarele auto sunt interzise.

AVERTISMENT! Respectati durata si tensiunea de incarcare indicate.

AVERTISMENT! Nu incarcati noaptea sau nesupravegheat; exista risc de incendiu.

AVERTISMENT! Nu incarcati in interior si nu lasati incarcarea nesupravegheata.

AVERTISMENT! Folositi un incarcator separat; curentul nu trebuie sa depaseasca 5 A, iar tensiunea trebuie sa fie 36 V. Pentru mai multe

contactati furnizorul.

AVERTISMENT! Nu folositi baterii modificate/hibride sau celule uzate.

Acestea prezinta riscuri de siguranta.

AVERTISMENT! Nu folositi baterii, fire sau conectori neconformi in paralel

in parallel without factory guidance

III. Imbunatatirea performantei bateriei

Pentru performanta maxima a bateriei, retineti:

1. Inainte de prima utilizare, incarcati complet bateria noua; astfel performanta bateriei poate atinge un nivel mai ridicat.

2. Folositi capul de tractare acasa si deplasati-va incet la inceput; nu va indepartati prea mult pana cand nu stapaniti utilizarea si nu puteti estima traseul in functie de nivelul bateriei.

IV. Frecventa de incarcare

Multi factori influenteaza ciclul de incarcare, indiferent daca folositi produsul zilnic sau doar o data la cateva saptamani.

1. Utilizare zilnica

Daca folositi Q8 zilnic si il incarcati imediat dupa utilizare, Q8 poate fi folosit toata ziua. Recomandam incarcare 6-10 ore, dar nu mai mult de 12 ore.

2. Utilizare ocazionala

Daca nu il folositi foarte des (o data pe saptamana sau mai rar), incarcati-l cel putin o data pe saptamana timp de 6-10 ore.

Daca nu veti folosi handbike-ul o perioada lunga, incarcati bateria inainte de depozitare. Pastrati Q8 intr-un mediu cald si uscat, ferit de frig extrem si caldura, si nu incarcati o baterie inghetata.

RETINETI! Daca handbike va fi depozitat o perioada, se recomanda sa puneti o placa sub suport pentru a-l izola de sol si a evita contactul anvelopei cu solul.

NOTA! Pastrati bateria uscata si evitati descarcarea profunda; nu incarcati mai mult de 12 ore la o incarcare.

V. Alte informatii relevante despre baterie:

1. De ce capacitatea de lucru a bateriei noi pare foarte slaba?

Avem o relatie stransa cu furnizorul bateriei, care ne ofera cea mai buna baterie Q8. Din fabrica, bateria noua este complet incarcata; in timpul transportului, temperaturile extreme ii pot afecta performanta initiala, iar temperaturile ridicate pot reduce

V. BATERII SI INCARCARE

puterea bateriei, iar temperaturile scazute pot reduce eficienta si pot prelungi timpul de incarcare (ca la bateriile auto). Pot fi necesare cateva zile pentru stabilizare la noua temperatura ambianta.

Incarcarea corecta este benefica pentru baterii.

NOTA! Durata de viata a bateriei depinde de intretinerea acesteia.

2. Cum se depoziteaza handbike-ul si bateria?

Daca nu folositi Q8 foarte des, recomandam intretinerea bateriei cel putin o data pe luna.

Daca nu veti folosi Q8 o perioada lunga, incarcati bateria inainte de depozitare. Deconectati cablul bateriei si pastrati Q8 intr-un mediu cald si uscat, ferit de frig extrem si caldura, si nu incarcati o baterie inghetata.

3. Cum se transporta?

Va recomandam sa contactati compania de transport pentru a confirma specificatiile de expediere. Daca doriti ca o companie externa sa expedieze Q8 la destinatie, se recomanda refolosirea ambalajului original Q8 si ambalarea separata a bateriei.

Depanare:

VI. Intretinere

Defectiune	Cauza defectiunii	Metoda de remediere
Incarcatorul nu incarca corect	1、 Cablul de alimentare este deteriorat sau priza nu functioneaza; 2、 Siguranta incarcatorului este arsa; 3、 Cablajul bateriei este deconectat.	1、 Reparati cablul de alimentare sau fixati priza; 2、 Inlocuiti cu acelasi tip de siguranta; 3、 Conectati toate cablurile.
Incarcarea este normala, dar autonomia nu este suficienta	1、 Frana pe disc este reglata prea strans; 2、 Deplasare indelungata cu viteza mare, urcari, vant din fata sau porniri/franari prea frecvente; 3、 Bateria este imbatranita sau deteriorata.	1、 Reglati corespunzator jocul cablului de frana; 2、 Evitati deplasarea indelungata cu viteza mare si franarea frecventa; 3、 Inlocuiti sau reparati bateria.
Motorul de tractare nu functioneaza corect	1、 Conexiunile cablurilor pentru baterie, motor, controler etc. sunt slabite sau cazute.	1. Verificati bateria, motorul, controlerul si celelalte cabluri; reconectati ferm.

Q8 este un handbike electric matur si, asemenea altor vehicule electrice, necesita intretinere regulata. Puteti face singur unele verificari de rutina, iar pentru altele este nevoie de asistenta dealerului. Intretinerea este foarte importanta; daca respectati programul de verificari din aceasta sectiune, puteti utiliza Q8 ani de zile usor si placut. Contactati dealerul Q8 pentru intrebari despre intretinere sau utilizare.

	**AVERTISMENT! Q8 este vulnerabil la mediul natural ca majoritatea echipamentelor electrice sau mecanice. Evitati mediile umede; contactul direct cu apa sau umiditatea poate duce la defectiuni electrice sau mecanice, coroziunea componentelor electronice si ruginirea cadrului.**

A intrat "Q8" in contact cu apa?

1. Uscati cat mai bine apa cu o carpa;

2. Puneti Q8 intr-un loc cald si uscat, pentru ca apa sa se evapore;

3. Inainte de utilizare, efectuati toate testele de siguranta si functionare;

4. Daca observati anomalii, contactati dealerul Q8.

In primul rand, recomandari generale

Evitati lovirea handbike-ului;

Evitati expunerea prelungita la conditii dure, precum caldura excesiva, frig sau umiditate;

Pastrati handbike-ul curat;

Verificati toate conexiunile electrice pentru a va asigura ca sunt fixate si sigure, inclusiv conexiunea cablului incarcatorului;

Cand toate luminile indicatorului bateriei sunt aprinse, bateria este complet incarcata si sistemul functioneaza corect;

Daca indicatorul bateriei are o lumina rosie care clipeste lent, bateria este descarcata si trebuie incarcata;

- Verificati toate conexiunile cablurilor pentru a va asigura ca sunt stranse si necorodate, iar bateriile trebuie asezate corect si la nivel in compartimentul lor;

- Toti rulmentii rotilor sunt lubrifiati si etansati si nu necesita adaugarea de lubrifiant.

In al doilea rand, verificarea produsului

1. Verificare zilnica:

Opriti alimentarea, verificati butoanele, asigurati-va ca nu sunt indoite sau rupte si ca revin corect in pozitie cand le eliberati;

- Inspectati vizual cablurile pentru a va asigura ca nu au crapaturi, rupturi sau fire expuse. Daca exista probleme, contactati furnizorul.
- **2. Verificare saptamanala:**

Verificati daca baza bateriei este deteriorata; faceti doar o verificare vizuala, fara a o demonta sau repara. Daca aveti intrebari, contactati furnizorul;

Asigurati-va ca toate piesele handbike-ului sunt bine conectate si nu strangeti suruburile excesiv.

Verificati franele; aceasta verificare trebuie efectuata pe o suprafata orizontala, cu spatiu liber de 1,5 metri in jur.

Verificarea franelor:

Note: When this test is performed,Q8 moves.

VI. Intretinere

1. Porniti alimentarea;
2. Verificati indicatorul bateriei pentru a va asigura ca bateria are energie;
3. Apasati incet butonul de acceleratie inainte, deplasati-va o distanta scurta, apoi franati si verificati daca distanta de franare este prea lunga.

3. Verificare lunara:

Verificati uzura handbike-ului; daca sunt necesare reparatii, contactati furnizorul;

- Pastrati Q8 curat si fara resturi precum par, alimente, bauturi, reziduuri etc. Inspectiile anuale la dealer vor asigura functionarea corecta a Q8 si vor preveni problemele.

In al treilea rand, inlocuirea bateriei

1. Asigurati-va ca handbike-ul este oprit;
2. Pentru detalii despre scoaterea bateriei, consultati "scoaterea bateriei";
3. Introduceti bateria noua.

Nota: este important sa va asigurati ca baza bateriei este conectata ferm. RETINETI! Eliminati bateriile vechi conform reglementarilor locale privind deseurile.

In al patrulea rand, intretinere corectiva

Daca indicatorul starii bateriei nu se aprinde:

Verificati baza bateriei pentru a asigura o conexiune ferma;

Verificati intrerupatorul circuitului; daca este necesar, reporniti;

Daca toate verificarile de mai sus sunt corecte, bateria poate fi verificata cu un tester de capacitate. Testerele sunt disponibile in magazinele de instrumente auto. Deschideti conexiunea bateriei inainte de testare, urmati instructiunile testerului si inlocuiti bateria daca rezultatele sunt slabe. If Q8 still does not provide power, contact your dealer.

In al cincilea rand, alte situatii relevante

1. Temperatura

Unele piese ale handbike-ului sunt sensibile la temperatura.

La temperaturi foarte scazute, bateria poate ingheta. Exista multi factori care pot provoca inghetarea, precum tipul incarcatorului, modul de utilizare si compozitia bateriei (de exemplu, baterii etanse cu plumb-acid sau cu gel);

Temperatura prea ridicata poate incetini handbike-ul.

2. Depozitare:

Q8 trebuie depozitat intr-un mediu uscat, ferit de temperaturi extreme. In timpul depozitarii, bateria trebuie scoasa. Nerespectarea acestor conditii poate provoca ruginirea cadrului si deteriorarea sistemului electric.

3. Curatare:

Nu clatiti "Q8" cu apa si nu il puneti in contact direct cu apa;

"Q8" poate fi sters usor cu o carpa umeda; nu folositi agenti chimici pentru curatare;

4. In ce situatii este necesar service-ul

Urmatoarele simptome pot indica o problema grava la Q8. Daca este necesar, contactati furnizorul. Inainte de a suna, pregatiti informatii precum numarul modelului, numarul de serie si tipul defectului.

◆ Zgomot excesiv al motorului ◆ Inclinare intr-o parte

◆ Firele sunt puternic roase ◆ Conectorii sunt grav crapati sau rupti

◆ Nu poate functiona ◆ Uzura severa a anvelopei

◆ Exista alimentare, dar vehiculul nu porneste. ◆ Apar vibratii puternice VII. Aspecte importante pentru conducere in siguranta

Pentru a utiliza aparatul in siguranta, respectati urmatoarele cerinte:

1. Inainte de prima deplasare, exersati conducerea intr-un spatiu deschis si familiarizati-va complet cu accelerarea, decelerarea, franarea si alte performante ale produsului inainte de a circula pe drum.

2. Circulati pe drum respectand regulile de circulatie. Se recomanda mentinerea unei viteze moderate; viteza maxima creste semnificativ consumul de energie, reduce autonomia si scade siguranta. Circulati pe drumuri pentru vehicule nemotorizate si nu intrati pe benzile pentru autovehicule.

3. Alegeti o suprafata plana pentru deplasare. Daca trebuie sa treceti peste obstacole, cele doua roti ale scaunului rulant trebuie sa treaca simultan; altfel exista risc ridicat de rasturnare.

4. Cand conduceti in interior, in zone aglomerate sau in supermarketuri, mentineti viteza redusa si controlati distanta de franare.

La viraje, viteza nu trebuie sa depaseasca 2 km/h. ☆

5. Acest produs nu trebuie utilizat pe ploaie; evitati pe cat posibil trecerea prin apa. Defectiunile cauzate de apa nu sunt acoperite de garantie.

6. Acest produs nu este potrivit pentru spatii inchise; nu intrati in lifturi, locuinte sau statii de metrou, pentru a preveni eventualele accidente.

7. Opriti intotdeauna comutatorul de alimentare cand nu conduceti, pentru a preveni utilizarea gresita de catre copii sau alte persoane.

8. Inainte de deplasare, asigurati-va ca intrerupatorul bateriei este pornit (pentru handbike cu baterie de 15AH).

9. Asigurati-va ca stiftul rapid intra complet in orificiul corespunzator.

10.Before driving, make sure that all suruburile etc. sunt stranse.

11. Nu modificati datele afisajului pana cand nu sunteti familiarizat cu handbike-ul.

VIII. Asigurarea calitatii

Acoperirea garantiei de calitate

Wisking ofera servicii de garantie pentru urmatoarele accesorii:

- Cadru principal (garantie un an)
- Ansamblu de tractare (garantie un an)
- Incarcator (garantie un an)
- Roti (garantie un an).
- Bateria (garantie un an; pierderea de putere cauzata de neincarcarea la timp sau scaderea naturala a capacitatii de stocare nu este acoperita de garantie);
- Rulmentii, bucsele, comutatoarele etc. sunt piese consumabile (producatorul ofera garantie de trei luni);

Nota: accesoriile de mai sus nu sunt acoperite de garantie daca sunt deteriorate prin impact extern, apa, lichide, modificari sau demontari neautorizate de Wisking.

In afara garantiei

- Toate piesele din plastic si cauciuc sunt consumabile si nu sunt acoperite de garantie;
- Anvelopele si carcasele nu sunt acoperite de garantie;
- Elementele decorative si sezutul;
- Repararea sau modificarea oricarei piese fara acordul expres prealabil al Wisking;
- Costuri de manopera pentru intretinere, telefon, transport si alte costuri fara aprobarea speciala a Wisking;
- Daune cauzate intentionat de utilizator;
- Scurgeri sau revarsari de lichid din baterie;
- Daune cauzate de abuz, manipulare gresita, accident sau neglijenta;
- Daune cauzate de operare, intretinere sau depozitare incorecta;
- Daune cauzate de inlocuirea neautorizata a bateriilor sau incarcatoarelor;
- Produsele utilizate in alte scopuri, transformate pentru uz comercial sau alte destinatii, supraincarcate ori folosite pe pante excesive etc. nu sunt acoperite de garantie;

Niciuna dintre situatiile de mai sus nu este acoperita de garantie.

Daca exista contradictii intre termenii de garantie anteriori, aceasta clauza prevaleaza.

Nota: pentru a obtine garantia produsului, clientul trebuie sa furnizeze numarul de serie exact al produsului!

Shanghai Wisking Electric Machine Co., Ltd

Aceasta garantie este valabila incepand cu 10 aprilie 2017

