

BUTTERFLY

RO

Manual de utilizare

CE

MODELE STANDARD DISPONIBILE



Academy Butterfly

DIMENSIUNI STANDARD DISPONIBILE

CM	INCH
40x20	16x8
45x20	18x8
50x20	20x8

* Lățime x înălțime



fig. A

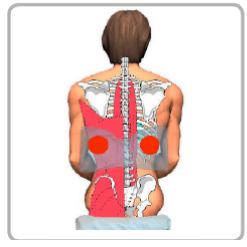




fig. C

RO

INTRODUCERE

Vicair® Academy Butterfly este conceput pentru a fi utilizat conform descrierii din acest manual. Citiți întregul manual înainte de utilizare.

Butterfly este alcătuit din următoarele părți:

Husă de spate și pernă interioară

Husa de spate și perna interioară sunt integrate într-o singură componentă. Husa de spate este prevăzută cu două chingi pentru fixarea Butterfly în jurul spătarului scaunului sau al scaunului cu rotile.

Perna interioară este formată din compartimente cu fermoar. Fiecare compartiment este umplut cu un număr specific de SmartCells™, triunghiulare și umplute cu aer.

Husă exterioară

Husa exterioară este realizată din Comfair, un material respirabil, elastic în două direcții. Husa exterioară se prinde cu fermoar de husa de spate.

INSTALARE

Vicair recomandă instalarea și reglarea Academy Butterfly sub supravegherea directă a terapeutului sau distribuitorului dumneavoastră.

- Îndepărtați ambalajul transparent din plastic.
- Asigurați-vă că Butterfly se potrivește dimensiunilor corpului și scaunului sau scaunului cu rotile.
- Așezați Butterfly pe spătarul scaunului sau al scaunului cu rotile. Asigurați-vă că eticheta de pe spate este orientată în jos.
- Închideți cataramele și strângeți chingile de spate în jurul spătarului scaunului sau al scaunului cu rotile.

Poziții de ședere

Butterfly poate fi utilizat pentru diferite poziții de ședere:

Poziție activă de ședere (fig. A)

Pentru susținerea bazinului și a părții inferioare a coloanei vertebrale. Fixați Butterfly jos pe spătar.

Poziție relaxată de ședere (fig. B)

Pentru susținerea părții inferioare a cutiei toracice. Fixați Butterfly invers și puțin mai sus pe spătar.

Poziție stabilă de ședere (fig. C)

Pentru susținerea bazinului, părții inferioare a coloanei și cutiei toracice. Fixați două Butterfly (unul jos, unul sus) pe spătar.

UTILIZARE

Verificarea contactului cu partea din spate a pernei

Spatele și coloana vertebrală nu trebuie să atingă partea din spate a sistemului Butterfly. Verificarea trebuie făcută la prima utilizare și după modificarea umplerii pernei.

- Stați cu spatele sprijinit de Butterfly aproximativ 20 de minute.
- Aplecați-vă ușor înainte în scaun sau scaunul cu rotile.
- Rugați terapeutul sau distribuitorul să introducă o mână între Butterfly și spatele dumneavoastră.
- Asigurați-vă că spatele este susținut de cel puțin un strat complet de SmartCells™.
- Nu utilizați Butterfly dacă apare contactul cu partea din spate. În majoritatea cazurilor, reglarea gradului de umplere a compartimentelor rezolvă problema.

Reglarea umplerii pernei

Butterfly este umplut în exces cu SmartCells™. Dacă este necesar, fermitatea poate fi ajustată prin îndepărtarea sau adăugarea de celule în diferitele compartimente ale pernei interioare.

Verificarea înroșirii pielii

Verificați periodic pielea pentru roșeață, mai ales în primele zile. Dacă roșeața apare și nu dispare după 15 minute, opriți utilizarea Butterfly. Consultați terapeutul sau distribuitorul.

Utilizarea la altitudine mare

Deoarece fiecare SmartCell™ este umplută cu aer, Butterfly se poate comporta diferit la altitudine mare sau într-o aeronavă. În aceste situații, fermitatea pernei poate fi ajustată prin îndepărtarea câtorva celule din fiecare compartiment. Vicair® recomandă să nu utilizați Butterfly peste 2400 m (8000 ft) deasupra nivelului mării.

Utilizarea în vehicule motorizate

În prezent nu sunt disponibile date de testare privind utilizarea în siguranță a Butterfly în vehicule motorizate. Prin urmare, nu recomandăm utilizarea Butterfly în vehicule motorizate.

Transferul Butterfly către alt utilizator

Înainte ca o a doua persoană să utilizeze Butterfly, curățați perna interioară și spălați husa exterioară. Dezinfectați ambele părți. Asigurați-vă că perna este reglată corect pentru a doua persoană.

Înlocuirea husei exterioare

În condiții normale de utilizare, Vicair recomandă înlocuirea husei exterioare în fiecare an. Husele de schimb pot fi achiziționate separat.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Inflamabilitate

Nu utilizați și nu lăsați Butterfly aproape de flacără deschisă sau de o sursă de căldură la temperatură ridicată.

Atenție: Nu curățați Butterfly cu abur și nu îl sterilizați în autoclavă. Butterfly nu rezistă la căldură sau presiune excesivă.

Verificarea uzurii și a celulelor sparte

La fiecare trei luni, verificați Butterfly pentru uzură și celule dezumflate sau colapsate. În caz de deteriorare gravă sau de număr mare de celule colapsate, nu continuați utilizarea Butterfly. Consultați distribuitorul.

Curățarea pernei interioare

- Ștergeți perna interioară cu o lavetă umedă și detergent blând. Petele dificile se pot curăța prin umezirea prealabilă a zonei și folosirea unei perii moi pentru desprinderea murdăriei.
- Dacă este necesară îndepărtarea celulelor pentru curățare, notați numărul de celule din fiecare compartiment.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi și nici obiecte ascuțite pentru curățarea pernei interioare.
- Nu scufundați perna interioară în apă sau în alt lichid.
- Nu spălați perna interioară umplută sau celulele în mașina de spălat.

Curățarea husei exterioare

Husa exterioară poate fi spălată la mașină. Consultați instrucțiunile de pe eticheta atașată pe interiorul husei.

Dezinfectarea Butterfly

În caz de murdărire cu fluide corporale și la transferarea Butterfly către alt utilizator, produsul trebuie dezinfectat pentru a evita contaminarea încrucișată.

- Curățați perna interioară și husa exterioară conform instrucțiunilor de mai sus. La spălarea husei exterioare, utilizați de preferință un agent antibacterian.
- Pulverizați dezinfectant pe husa exterioară și pe perna interioară. Îndoiți compartimentele spre exterior pentru a vă asigura că pulverizarea ajunge în spațiile dintre ele.

GARANȚIE

Vicair oferă o garanție limitată pentru defecte de fabricație și materiale pentru o perioadă de doi (2) ani de la data inițială a achiziției, cu condiția ca produsul să fi fost utilizat normal. Orice deteriorare rezultată din utilizare anormală sau cauzată de manipulare, curățare necorespunzătoare ori neglijență este exclusă din această garanție.

Dacă în termen de doi (2) ani de la data inițială a achiziției apare un defect de material sau de fabricație, Vicair va repara sau va înlocui produsul gratuit, la alegerea sa. Husa exterioară este exclusă din această garanție.

Remediile pentru încălcarea garanțiilor explicite din prezentul document sunt limitate la repararea sau înlocuirea produsului. În niciun caz despăgubirile pentru încălcarea oricărei garanții nu vor include daune indirecte și nu vor depăși costul bunurilor neconforme vândute.

Pentru informații suplimentare despre produs, consultați site-ul nostru: www.vicair.com.