

Manual de instalare

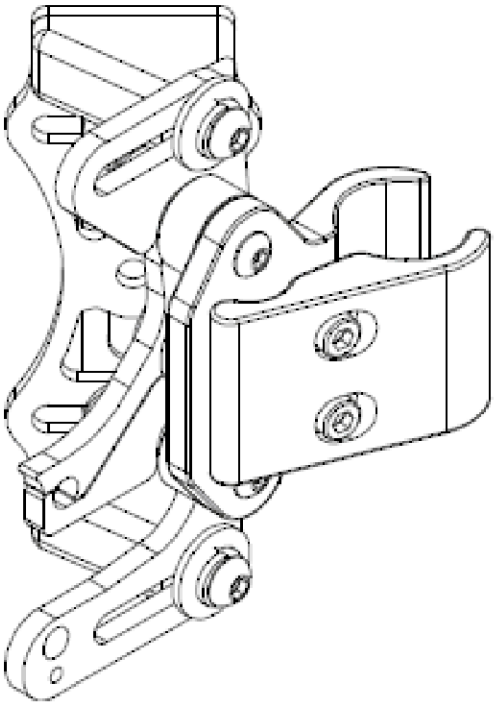

1.0 Hardware de montare cu eliberare rapidă Pentru toate suporturile de spate din seriile aluminiu și carbon

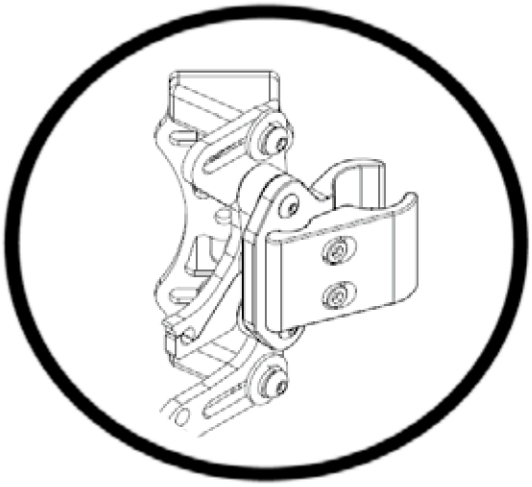

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR

Stealth Products: BR1102

Compatible with

Stealth's: ADI Aluminum / Carbon Fiber Backs

1.1 Satisfacția clientului

Stealth Products urmărește satisfacția 100% a clienților. Satisfacția dumneavoastră completă este importantă. Vă rugăm să ne contactați cu feedback sau sugestii de modificare care ne vor ajuta să îmbunătățim calitatea și ușurința de utilizare a acestor produse. Ne puteți contacta la:

Stealth Products, LLC
104 John Kelly Dr.
Burnet, TX 78611
Telefon: (512) 715-9995 Apel gratuit: 1 (800) 965-9229
Fax: (512) 715-9954 Apel gratuit: 1 (800) 806-1225
info@stealthproducts.com www.stealthproducts.com

EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germania

1.2 Etichete de avertizare

1.2.1 Etichete de avertizare

Avertismentele sunt incluse pentru siguranța utilizatorului, clientului, operatorului și a proprietății. Vă rugăm să citiți și să înțelegeți ce înseamnă cuvintele de semnalizare SIGURANȚĂ, NOTĂ, ATENȚIE, AVERTISMENT și PERICOL, precum și modul în care acestea pot afecta utilizatorul, persoanele din jurul utilizatorului și proprietatea.

PERICOL	Identifică o situație iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la vătămări grave, deces și daune materiale.
AVERTISME	Identifică o situație potențială care, dacă nu este evitată, va duce la vătămări grave, deces și daune materiale.
ATENȚIE	Identifică o situație potențială care, dacă nu este evitată, va duce la vătămări minore sau moderate și la daune materiale.
NOTĂ	Identifică informații importante care nu sunt legate de vătămare, ci de posibile daune materiale.
SIGURANȚĂ	Indică pași sau instrucțiuni pentru practici sigure, mementouri privind proceduri sigure sau echipamente de siguranță importante care pot fi necesare.

1.2.2 Răspundere limitată

Stealth Products, LLC nu acceptă nicio răspundere pentru vătămări corporale sau daune materiale care pot apărea din nerespectarea de către utilizator sau altă persoană a recomandărilor, avertismentelor și instrucțiunilor din acest manual.

1.2.3 Testare

Configurarea inițială și conducerea trebuie efectuate într-o zonă deschisă, fără obstacole, până când utilizatorul este complet capabil să conducă în siguranță.

Produsul trebuie testat întotdeauna fără nicio persoană așezată în scaunul rulant, până când orice modificare a instalării fizice sau a reglajului este finalizată.

1.3 Cuprins

1.0 Instalarea hardware-ului cu eliberare rapidă


1.1 Satisfacția clientului 2
1.2 Etichete de avertizare 2
1.2.1 Etichete de avertizare
.....2
1.2.2 Răspundere limitată
.....2
1.2.3 Testare
.....2
1.3 Cuprins 3
1.4 Piese și accesorii 4
1.4.1 Pachet hardware de montare cu eliberare rapidă 4
1.4.2 Unelte necesare pentru instalare și reglare
.....5
1.4.3 Specificația cuplului
.....5
1.5 Instrucțiuni de instalare 6
1.5.1 Instalarea plăcii cu știfturi și a blocului U (pachet BR5001) 6
1.5.2 Fixarea ansamblului zăvorului cu eliberare rapidă pe blocul U 6
1.5.3 Ansamblul clemei pe montantul spătarului scaunului rulant 7
1.5.4 Reglarea înălțimii seria AL/AFT
.....8
1.5.5 Reglarea lățimii
.....8
1.5.6 Reglarea unghiului
.....9
1.5.7 Reglarea adâncimii
.....10
1.5.8 Instalarea spătarului pe cleme
.....10

2.0 Instalarea hardware-ului cu eliberare rapidă aprobat WC20

2.1 Aprobat WC20 13
2.1.1 Hardware cu eliberare rapidă WC20 13
2.2 Informații de transport WC20 13
2.2.1 Înainte de transport
.....13
2.3 Siguranță WC20 16
2.3.1 Siguranța utilizatorului
.....16
2.4 Instalarea hardware-ului WC20 17
2.4.1 Instalarea hardware-ului WC20 17
2.4.2 Instalarea etichetei pe husă 17
2.4.3 Scoaterea știftului WC20 18
2.5 Întreținere 18
2.5.1 Curățare
.....18
2.5.2 Dezinfectare
.....18
2.6 Prima utilizare 19
2.6.1 Asistență din partea distribuitorului 19
2.6.2 Testarea de către utilizator 19
2.6.3 Condiții de utilizare
.....19
2.7 Garanție 19
2.7.1 În caz de defectare a produsului 19

1.4.1 Pachet hardware de montare cu eliberare rapidă


Pachet BR1102

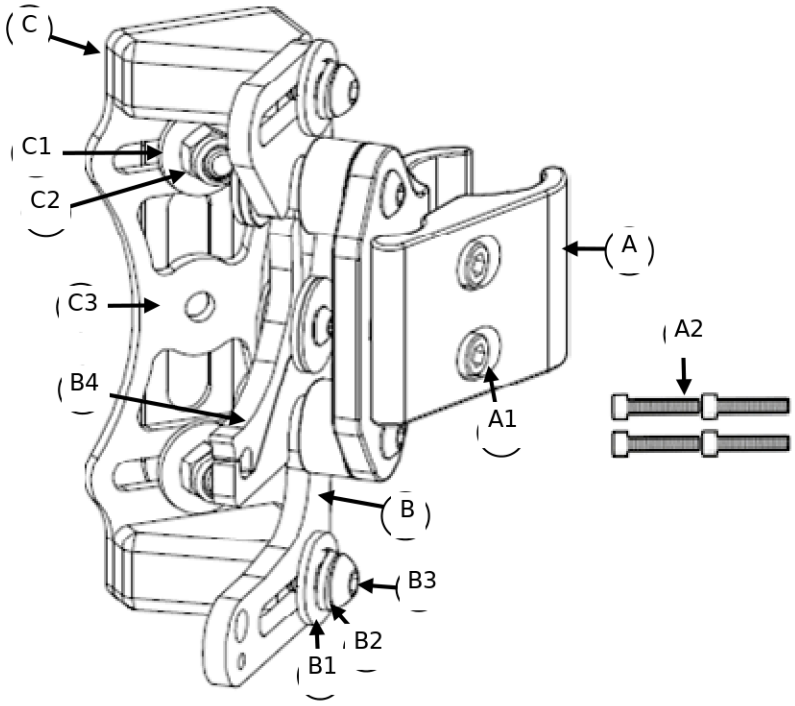


Descriere
A Clemă cu eliberare rapidă pentru montantul spătarului (2) A1 M5 x .8 x 22 mm SHS[1] (4)
A2 M5 x .8 x 25 mm SSH[2] (4)
B Ansamblu zăvor cu eliberare rapidă (2) B1 Șaibă lată M6 x 18 mm (4)
B2 Șaibă elastică M6 (4)
B3 M6 x 1 x 20 mm BHS (4)
B4 Pârghie de blocare
C Bloc U cu eliberare rapidă cu placă cu știfturi (2) C1 Șaibă lată M6 x 18 mm (2)
C2 Piuliță de blocare din nailon M6 x 1 (2)
C3 Placă cu știfturi (2)

1. Utilizat pentru montarea pe tuburi de 3/4”
și 7/8”.
2. Utilizat pentru montarea pe un tub de 1”.

1.4.2 Unelte necesare pentru instalare și reglare

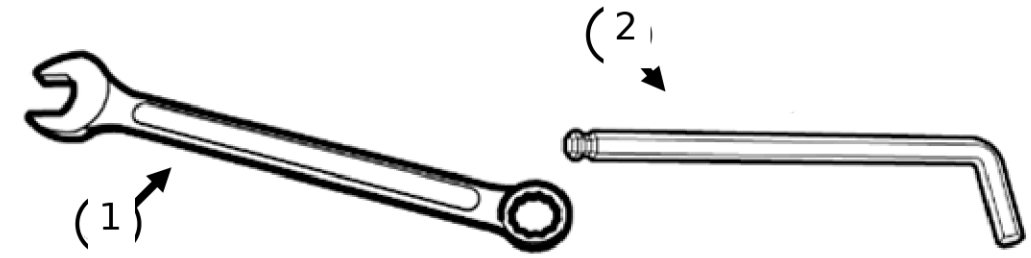

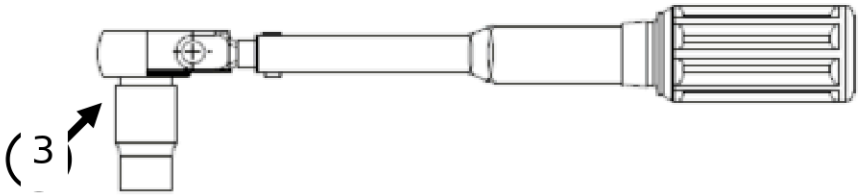

Unelte*	Descriere
1	**Cheie Cheie de 10 mm**
2	**Cheie imbus/mâner T Cheie imbus de 4 mm**
3	**Cheie dinamometrică lb-in**

1.4.3 Specificația cuplului


Număr piesă	Specificații cuplu
BR5001 (C2)	117 in-lbs/13,2 N-m
BR1100 (A2)	45,1 in-lbs/5,1 N-m
BR1101 (B3)	77 in-lbs/8,7 N-m

* Uneltele nu sunt incluse în pachetul hardware.

1.5.1 Instalarea plăcii cu știfturi și a blocului U (pachet BR5001)

Pasul 1: Determinați poziția dorită pentru placa cu știfturi, de-a lungul fantelor predecupate din carcasa spătarului*.
Pasul 2: Introduceți placa cu știfturi pe spătar. Aliniați placa cu știfturi cu blocul U.

Pasul 3: Strângeți piulițele de blocare cu cheia dinamometrică pentru fixare fermă. Consultați secțiunea 4.3 pentru valorile corecte de strângere a hardware-ului.

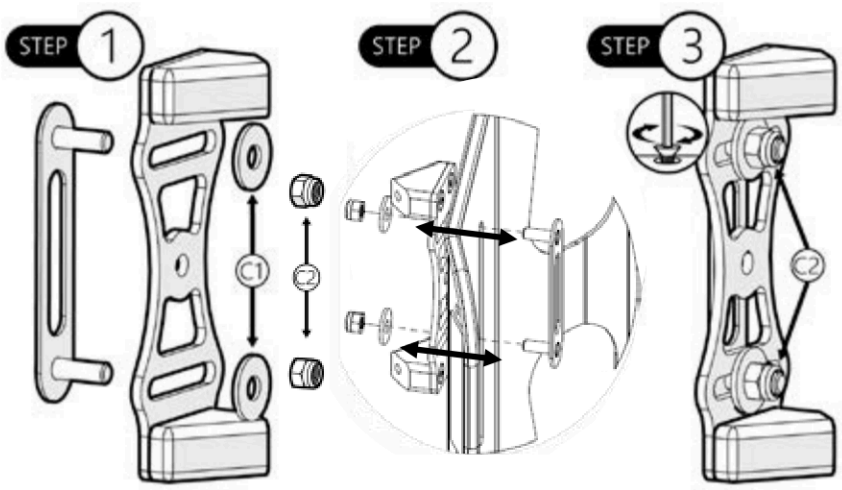

NOTĂ

Instalarea blocului U pe spătar va fi necesară dacă hardware-ul este achiziționat separat de spătar.

Stealth va instala hardware-ul dacă este comandat împreună cu spătarul.

⚠ ATENȚIE Instalați blocul U înainte de a pune husa peste spătar.


O carcasă seria AL de 16” este prezentată ca referință. Dimensiunile variază în funcție de tipul și mărimea carcasei.

1.5.2 Fixarea ansamblului zăvorului cu eliberare rapidă pe blocul U

Pasul 1: Introduceți șurubul M6 (B3) (x2) în șaibe (B1, B2) și atașați ansamblul zăvorului pe partea stângă și dreaptă a blocului U, folosind cheia imbus de 4 mm. Înainte de strângere, glisați zăvorul înainte și faceți reglajele necesare. Pasul 2: Cu cheia dinamometrică, strângeți piulițele M6 (B3). Consultați secțiunea 4.3 pentru valorile corecte de cuplu.


NOTĂ

Este esențial ca șaibele elastice incluse să fie utilizate în toate cele patru puncte de fixare, pentru a menține unghiul dorit și reglajul adâncimii spătarului.

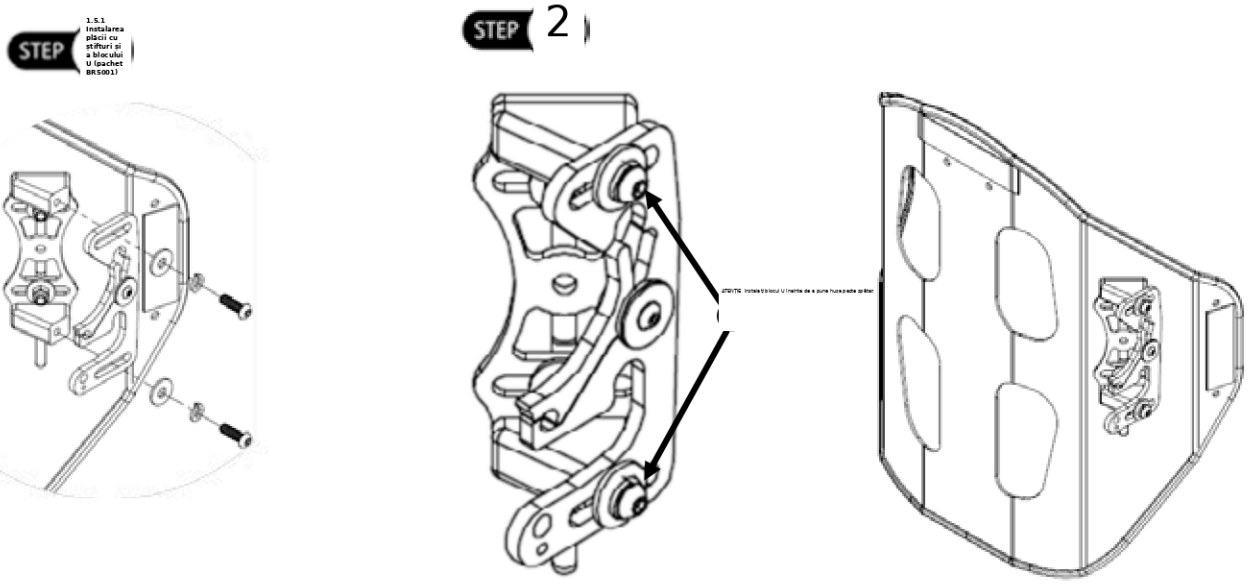

1.5.3 Ansamblul clemei pe montantul spătarului scaunului rulant

Pasul 1: Determinați vizual înălțimea dorită a noului suport de spate ADI. Marcați pe fiecare montant al spătarului poziția necesară pentru atașarea ansamblurilor de cleme.
Pasul 2: Slăbiți șuruburile M5 (A2) și, cu două degete, prindeți și țineți deschisă partea din spate a clemei pentru montant, pentru a glisa ansamblul clemei peste partea superioară a montantului spătarului (montantul de recepție orientat spre interior). Șuruburile nu trebuie îndepărtate complet din hardware pentru a glisa clema peste montant.
Pasul 3: Strângeți ușor fiecare șurub M5 cu o cheie imbus de 4 mm. Aliniați ansamblul clemei paralel cu baza șezutului scaunului rulant.

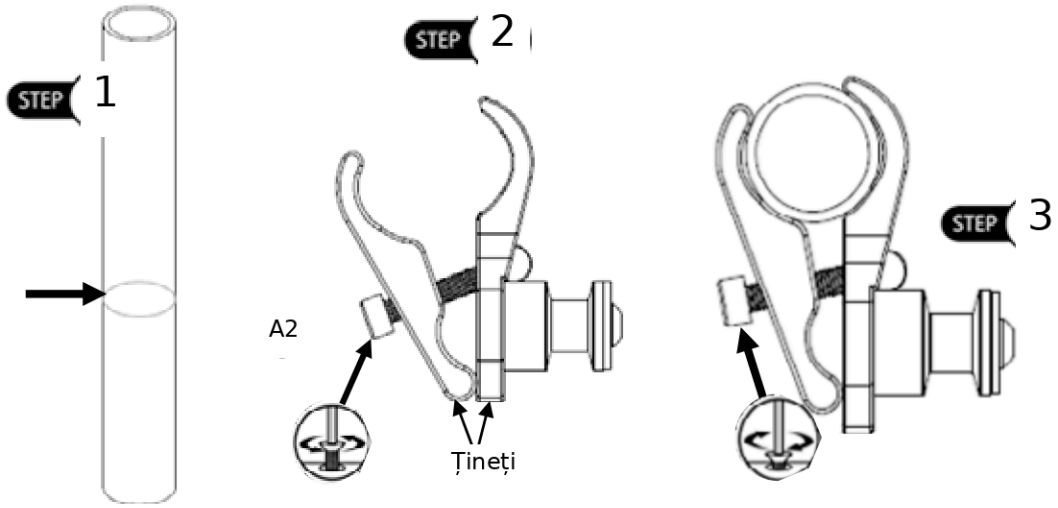

⚠ ATENȚIE Pentru tub de 1”, utilizați șuruburile cu cap imbus de 25 mm (A2) furnizate.


NOTĂ

Hardware-ul de montare trebuie instalat la înălțimi egale pe partea stângă și dreaptă și paralel cu cadrul șezutului.

NOTĂ

Strângeți șuruburile clemei, dar permiteți mișcarea astfel încât să puteți regla montanții de recepție.

Pasul 4: Pentru a obține alinierea corectă, deplasați ușor hardware-ul de montare spre interior sau exterior și/sau în sus sau în jos. Faceți reglaje până când spătarul se atașează și se îndepărtează ușor de pe montanții de recepție superiori și inferiori.
Pasul 5: După finalizarea reglajului, strângeți toate șuruburile (A2) cu cheia dinamometrică la specificațiile corecte. Acest lucru va asigura poziționarea sigură și funcționarea în siguranță.

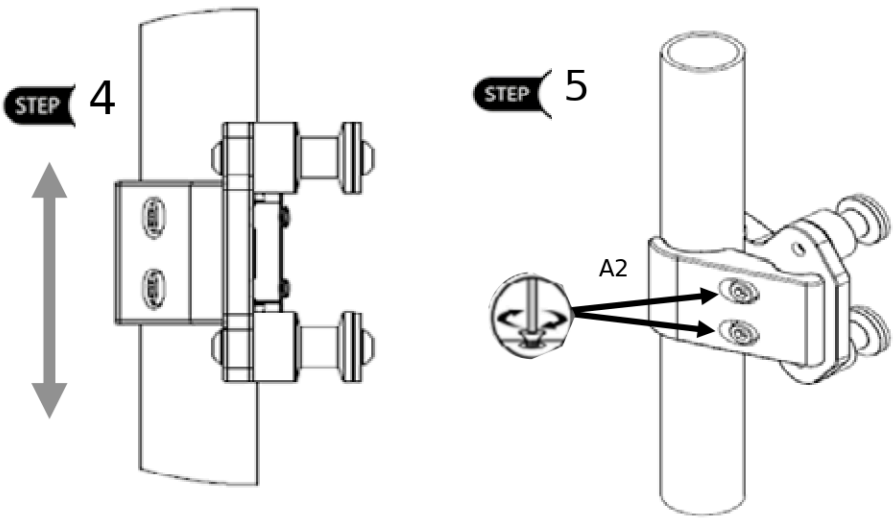


NOTĂ Centrarea zăvorului poate necesita reglarea lățimii.

⚠ **ATENȚIE**

Dacă hardware-ul se blochează sau nu se mișcă ușor, poate fi necesar să realiniați punctele de recepție de pe montanți.

1.5.4 Reglarea înălțimii seria AL/AFT

Pasul 1: Cu o cheie de 10 mm, slăbiți piulițele M6 (C2) de pe placa cu știfturi.
Pasul 2: Glisați placa cu știfturi în sus sau în jos de-a lungul fantei predecupate din carcasă pentru a obține înălțimea dorită.
Pasul 3: Strângeți și fixați piulițele M6 cu cheia dinamometrică. Consultați secțiunea 4.3 pentru specificațiile de cuplu.

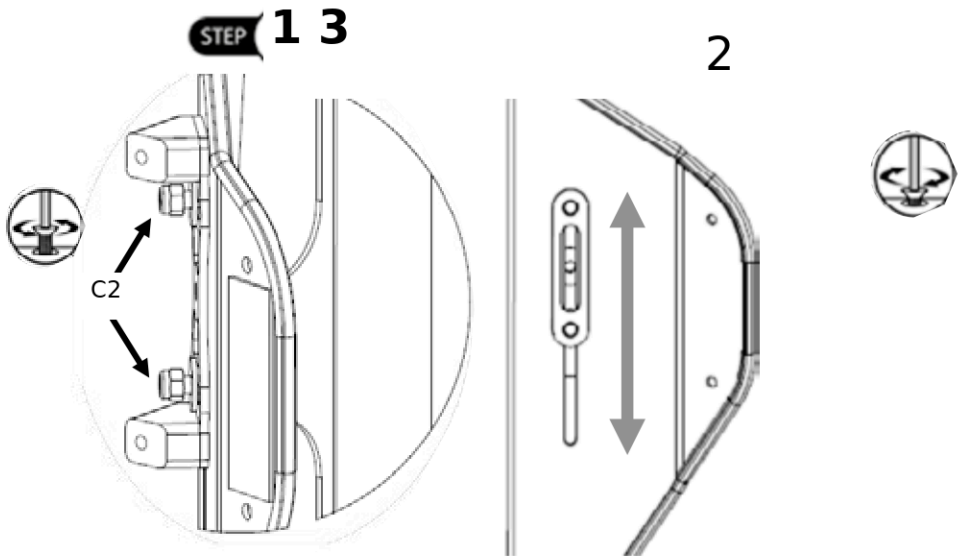


ATENȚIE

Stealth nu recomandă găurirea spătarelor CF pentru repoziționarea hardware-ului la o altă înălțime.

1.5.5 Reglarea lățimii

Pasul 1: Pe fiecare parte a hardware-ului, slăbiți șuruburile de sus și de jos (C2) de pe placa cu știfturi, folosind o cheie de 10 mm.
Pasul 2: Reglați hardware-ul spre interior sau exterior pe placa cu știfturi (C3) pentru a obține lățimea necesară a scaunului.
Pasul 3: După finalizarea reglajelor, strângeți toate piulițele M6 cu cheia dinamometrică. Consultați secțiunea 4.3 pentru specificațiile de cuplu.
* La seria CF, pentru șuruburile interioare se folosește o cheie imbus de 4 mm.

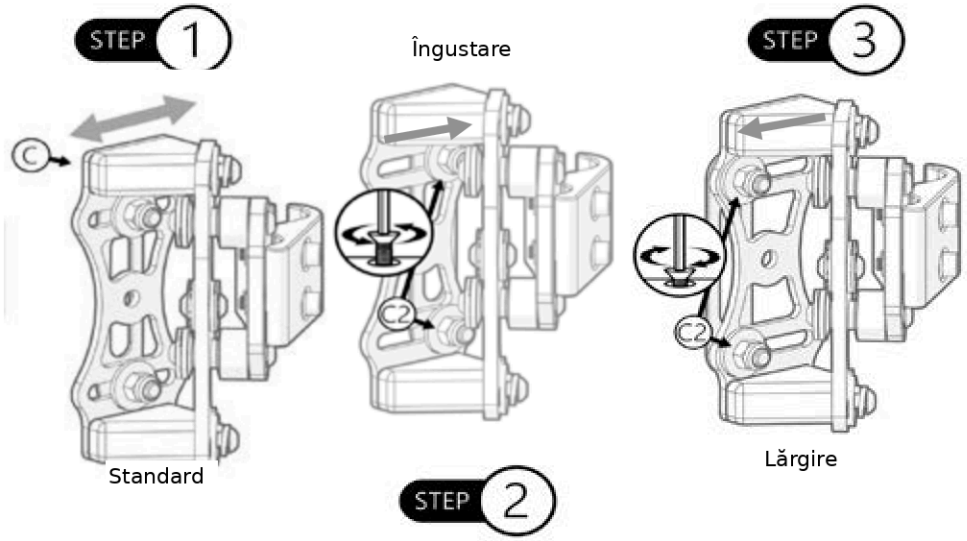


NOTĂ

Intervalul minim și maxim de creștere pentru lățimea hardware-ului este de 1”.

NOTĂ

Spătarele din seria AFT oferă încă un inch de reglare a lățimii (2 inch în total) pe carcasă datorită unei fante predecupate în carcasă.


Dimensiuni minime și maxime* pentru reglarea lățimii:

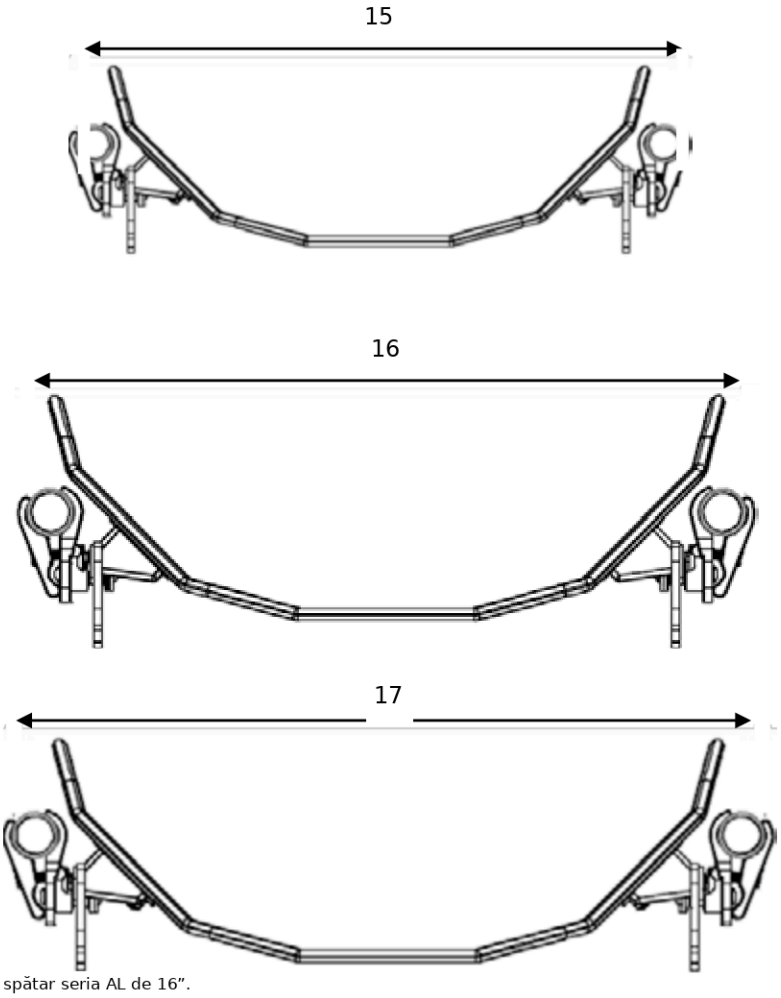

*Dimensiunile indicate sunt pentru un spătar seria AL de 16”.


1.5.6 Reglarea unghiului

Pasul 1: Pe fiecare parte a hardware-ului, slăbiți șuruburile M6 de sus și de jos (B3) cu o cheie imbus de 4 mm.
Pasul 2: Reglați suportul de spate pentru a obține unghiul dorit de utilizator.
Pasul 3: După finalizarea reglajelor, strângeți toate șuruburile la specificația corectă de cuplu.

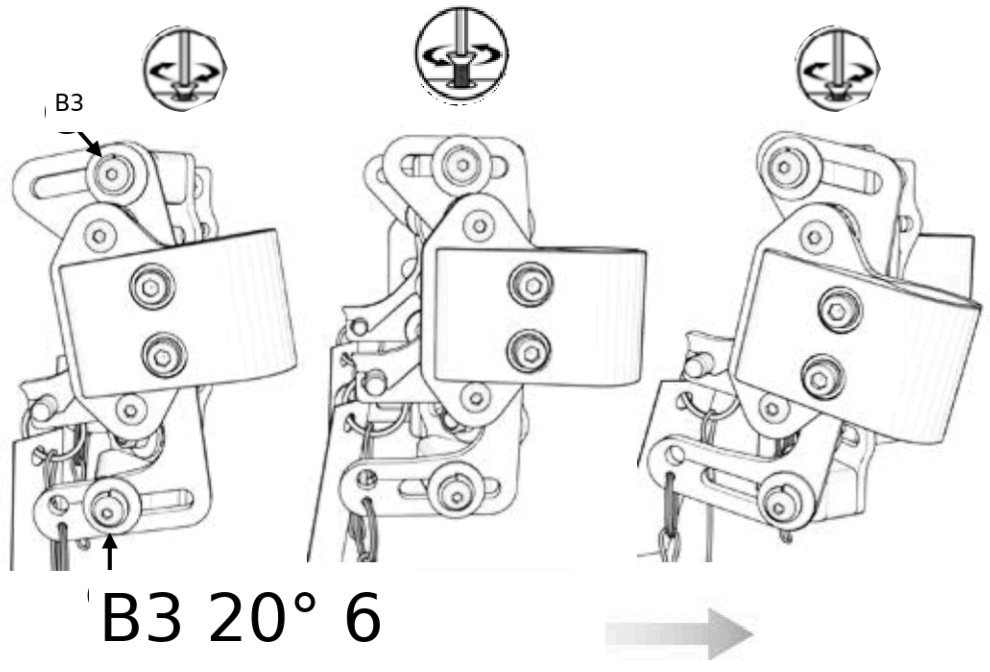


1.5.7 Reglarea adâncimii

Pasul 1: Pe fiecare parte a hardware-ului, slăbiți șuruburile M6 de sus și de jos (B3) cu o cheie imbus
Pasul 2: Glisați suportul de spate înainte sau înapoi de-a lungul ansamblului zăvorului (B)
pentru a obține adâncimea dorită.
Pasul 3: După finalizarea reglajelor, strângeți toate șuruburile la specificația corectă de cuplu.

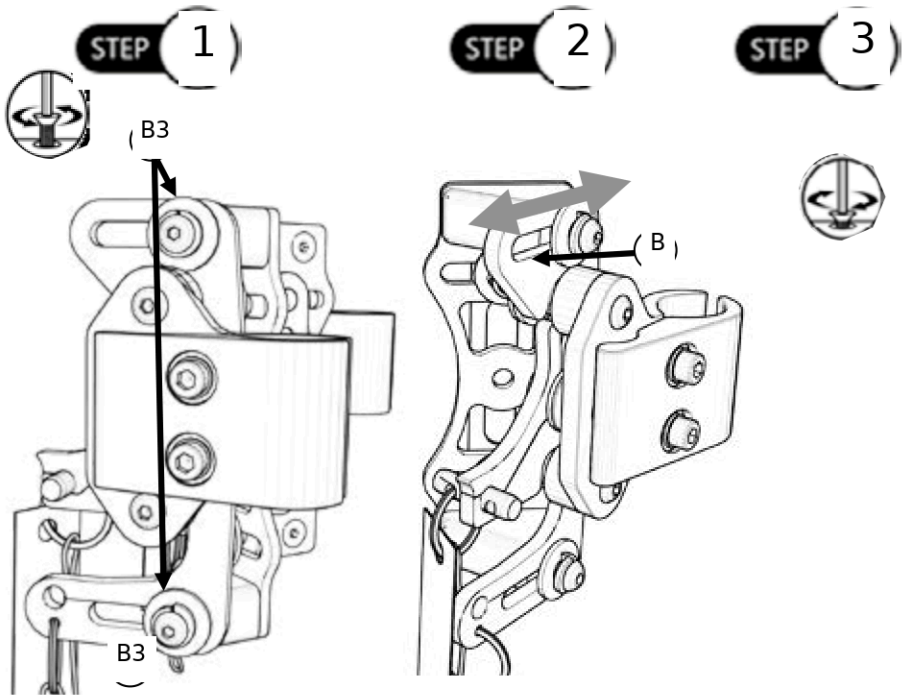


1.5.8 Instalarea spătarului pe cleme

Pasul 1: Cu spătarul ușor înclinat înainte, coborâți cârligele inferioare stânga și dreapta (B4) pe montanții inferiori de recepție (A).
Pasul 2: După ce cârligele inferioare sunt în poziție, înclinați suportul de spate spre spate până când cârligele superioare sunt complet cuplate pe montanții superiori de recepție (A).

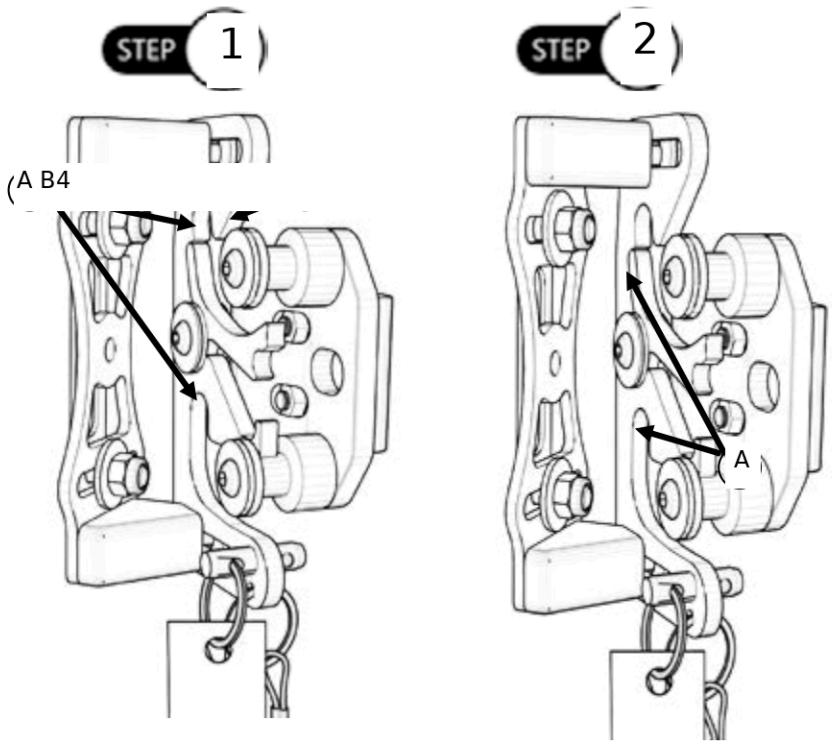

Pasul 3: După ce fiecare montant de recepție este așezat complet în cârligele de sus și de jos, apăsați manual pârghiile de blocare stânga și dreapta (B4) în poziția blocat/jos.
Pasul 4: Coborâți pârghiile de blocare (B4) de pe ansamblul zăvorului și asigurați-vă că hardware-ul este fixat sigur pe scaun și pe montantul spătarului.

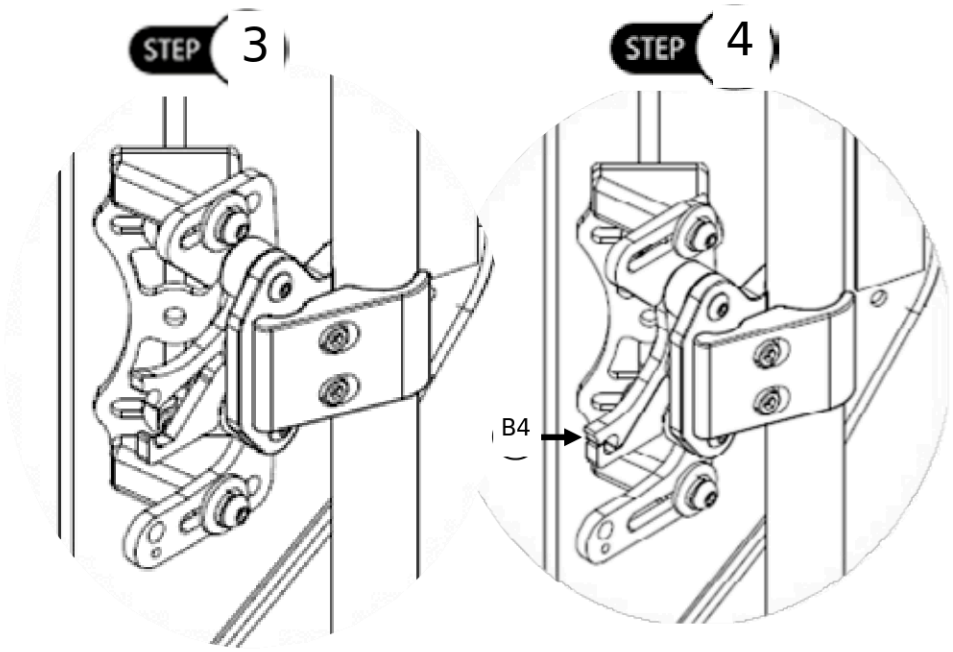


ATENȚIE

Protejați toate spătarele de lovituri puternice care pot cauza deteriorări și/sau rupere.

ATENȚIE


Dacă puteți plia tuburile spătarului, spătarul trebuie să fie în poziția pliată atunci când transportați scaunul rulant, în special înainte de încărcarea pentru transport aerian.

ATENȚIE Înainte de utilizare, confirmați că pârghiile de blocare sunt în poziția blocată.

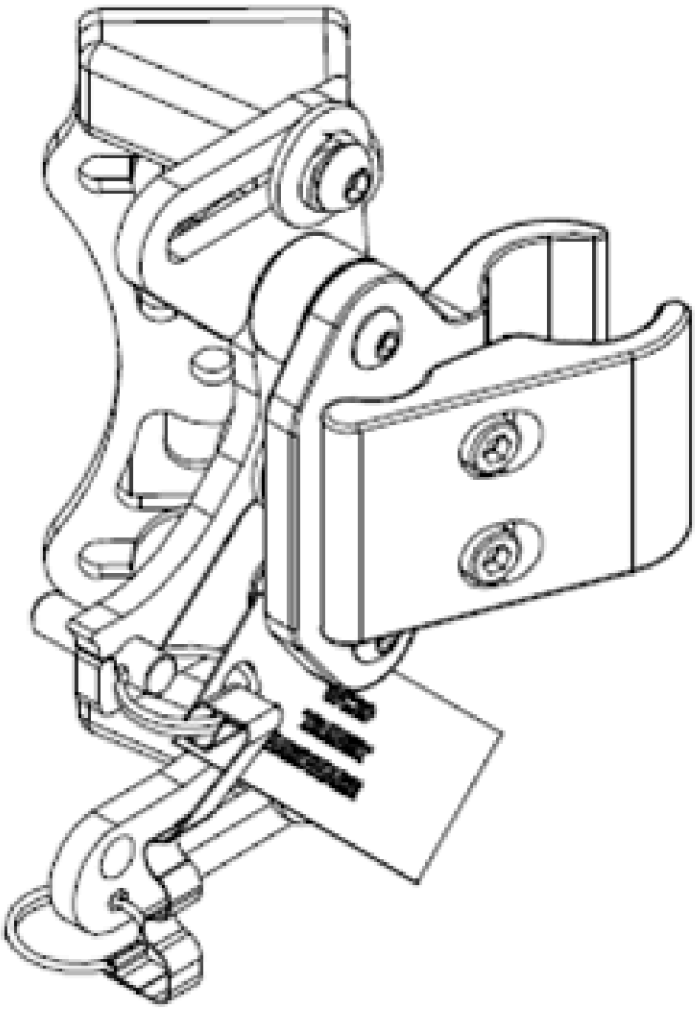

2.0 Hardware de montare cu eliberare rapidă aprobat WC20

Pentru toate suporturile de spate din aluminiu

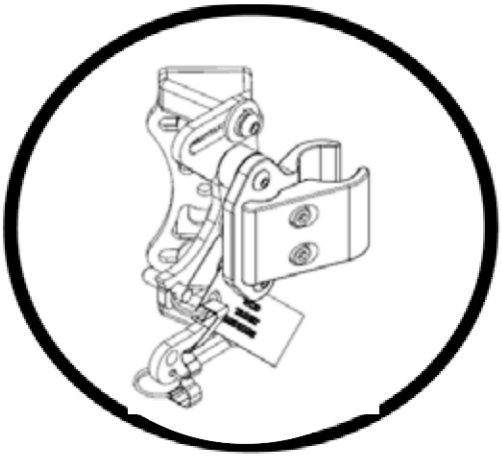

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR

Stealth Products:BR1102 cu BR6005

Compatible with

Stealth's: ADI Aluminum Spătare seria /AFT

2.1 Aprobat WC20

2.1.1 Hardware cu eliberare rapidă WC20

Hardware-ul cu eliberare rapidă poate fi comandat ca pachet WC20. Acesta include clema pentru montantul spătarului și zăvorul cu știftul de transport.

Hardware-ul de montare cu eliberare rapidă a îndeplinit cerințele și prevederile WC20 și ISO16840-4. Piesa de blocare poate fi comandată ca articol aprobat WC20 cu știfturi de transport.

WC20 stabilește cerințe de proiectare și performanță și metode de testare pentru sisteme complete de ședere care constau din șezut, suport de spate și hardware de atașare.

⚠ ATENȚIE

Hardware-ul cu eliberare rapidă aprobat WC20 și spătarele AL/AFT trebuie utilizate numai conform instrucțiunilor producătorului.

NOTĂ

Dacă comanda BR6005 este plasată după ce a fost comandată o carcasă, eticheta corespunzătoare TREBUIE fixată permanent pe husă pentru ca hardware-ul să fie conform WC20.

SIGURANȚĂ Spătarele din seria CF de la ADI NU sunt aprobate WC20.

2.2 Informații de transport WC20

2.2.1 Înainte de transport

• Utilizatorii trebuie să se transfere pe scaunul vehiculului și să folosească centurile vehiculului.

• Înainte de transport, verificați sistemele de ancorare și hardware-ul.

• Verificați curelele: fără rupturi sau uzură; înlocuiți-le dacă este necesar.

• Verificați cârligele deteriorate sau ancorările slăbite.

• Verificați șuruburile sistemului de ședere; să fie fixe, nu strânse excesiv.

• Hardware-ul cu eliberare rapidă trebuie fixat sigur; știfturile introduse corect.

⚠ PERICOL

Hardware-ul cu eliberare rapidă aprobat WC20 și spătarele AL/AFT sunt concepute special pentru ocupare pe scaune rulante orientate înainte în autovehicule.

⚠ PERICOL

Hardware-ul cu eliberare rapidă aprobat WC20 și spătarele AL/AFT au fost concepute pentru a permite utilizarea corectă a centurilor de retenție ancorate în vehicul și pentru a asigura evaluarea sistemelor de ședere în ceea ce privește ușurința poziționării corecte a centurilor pe pasagerul din scaunul rulant și gradul în care poate fi obținută poziționarea corectă.

⚠ PERICOL

Nu trebuie făcute modificări sau înlocuiri ale sistemului de ședere sau ale pieselor și componentelor acestuia fără consultarea producătorului.

Poziționarea centurii

• Centura pelvină trebuie purtată jos, peste partea frontală a pelvisului, aproape de joncțiunea pelvisului cu coapsele.
• Catarama centurii de retenție în trei puncte trebuie plasată în contact cu corpul ocupantului și la distanță de componentele scaunului rulant.

• Joncțiunea dintre centura de umăr și centura pelvină a sistemelor de retenție în trei puncte trebuie să fie aproape de șoldul opus umărului peste care trece centura diagonală, nu aproape de linia mediană a ocupantului.

Poziționarea corectă a centurilor pe ocupant



• Centurile de retenție pentru partea superioară a trunchiului trebuie să treacă direct peste mijlocul umărului și să fie în contact cu acesta.

SIGURANȚĂ

Centurile de retenție trebuie reglate cât mai strâns posibil, în concordanță cu confortul utilizatorului.

SIGURANȚĂ

Centurile de retenție trebuie poziționate pe ocupantul scaunului rulant conform instrucțiunilor producătorului WTORS.

Poziționarea incorectă a centurilor pe ocupant




• Centurile de retenție nu trebuie trecute în afara roților scaunului rulant sau peste suporturile de braț și nu trebuie ținute departe de corp de componente sau piese ale scaunului rulant.

SIGURANȚĂ

Centurile de retenție nu trebuie purtate răsucite într-un mod care reduce suprafața de contact a chingii cu ocupantul.

Atât centurile pelvine, cât și centurile de umăr care respectă RESNA WC-4:2012, secțiunea 18 și/sau 4.6, 5.2, 5.3 din RESNA WC-4:2012, secțiunea 19, trebuie utilizate pentru a limita mișcarea ocupantului în caz de accident și pentru a reduce probabilitatea ejectării ocupantului din vehicul și/sau a contactului vătămător cu interiorul vehiculului.

Centura pelvină trebuie să fie înclinată între 30° și 75° față de orizontală când este privită din lateral și, ideal, între 45° și 75°, așa cum se arată în figura de mai jos.

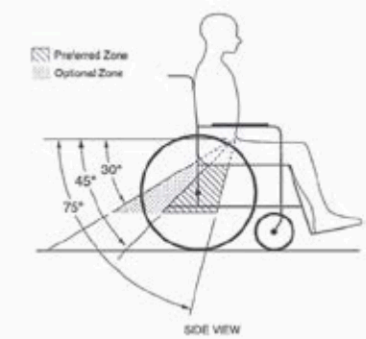

⚠ AVERT.

Spătarele cu unghi reglabil nu trebuie înclinate cu peste 30° față de verticală în timpul transportului, decât dacă este necesar medical sau postural.

⚠ AVERT.

Dacă suportul de spate trebuie reglat la un unghi mai mare de 30° față de verticală în timpul deplasării, punctul superior de ancorare al centurii de umăr trebuie reglat spre spate pentru a menține contactul centurii cu umărul și pieptul ocupantului scaunului rulant.

Tăvi

Tăvile rigide montate pe scaunul rulant, care nu sunt concepute special pentru utilizare în timpul deplasării în autovehicule, trebuie să fie:

- Îndepărtate și asigurate separat în vehicul.
- Fixate pe scaunul rulant astfel încât să nu se desprindă în caz de accident.
- Poziționate cu un spațiu de cel puțin 75 mm (3 in.) între marginea din spate a tăvii și abdomenul și/sau pieptul ocupantului, pentru a nu interfera cu utilizarea corectă a centurii.
- Prevăzute cu căptușeală absorbantă de energie între marginea din spate a tăvii și ocupantul scaunului rulant.


2.3.1 Siguranța utilizatorului


Utilizarea unei centuri pelvine posturale atașate la baza scaunului rulant sau la cadrul șezutului este încurajată în timpul deplasării. Aceste centuri trebuie poziționate astfel încât să nu interfereze cu poziționarea corectă a centurilor rezistente la impact și nu trebuie considerate protecție în caz de accident, decât dacă centura posturală respectă cerințele RESNA WC-4:2012, secțiunea 19.

Trebuie asigurat suficient spațiu liber înainte și înapoi în jurul ocupantului scaunului rulant.

Zona de spațiu liber frontal (FXZ) trebuie să fie mai mare atunci când nu se utilizează o centură de umăr.

Când montați hardware-ul cu eliberare rapidă WC20 pe spătarul AL sau AFT, consultați instrucțiunile de instalare care încep la pagina 3.
Specificațiile de cuplu pentru hardware sunt listate în secțiunea Piese și accesorii de la pagina 2.

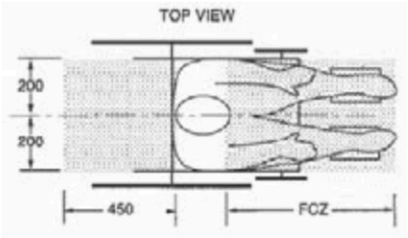

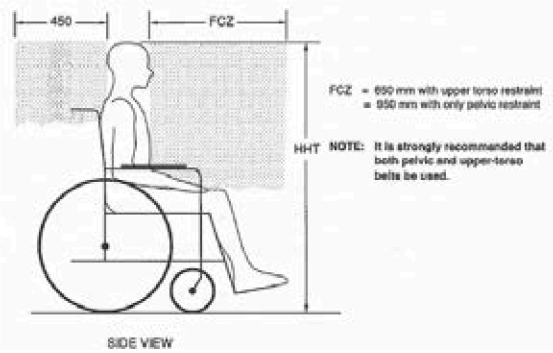

⚠ PERICOL

Hardware-ul cu eliberare rapidă aprobat WC20 și spătarele AL/AFT sunt concepute NUMAI pentru utilizare cu cadre de scaune rulante care au fost testate cu succes la cerințele de impact frontal ale RESNA WC-4:2012, secțiunea 19.

⚠ PERICOL

Hardware-ul cu eliberare rapidă aprobat WC20 și spătarele AL/AFT TREBUIE utilizate pe un cadru de scaun rulant care oferă patru puncte de fixare si puncte de ancorare pentru centura pelvină conforme cu cerintele RESNA WC-4:2012, sectiunea 19.


2.4.1 Instalarea hardware-ului WC20

Pentru a instala știftul pe hardware-ul de montare:

Pasul 1: Treceți inelul de chei (B) prin orificiul mic de la baza hardware-ului (A). Asigurați-vă că inelul este trecut sigur prin orificiu.


Pasul 2: Introduceți știftul în ansamblul zăvorului (C). Testați dacă zăvorul este sigur trăgând ușor. Bila de pe zăvor trebuie să se prindă și să nu iasă din ansamblul zăvorului.

NOTĂ Asigurați-vă că pârghia roșie este complet cuplată înainte de a trece la pasul 2.

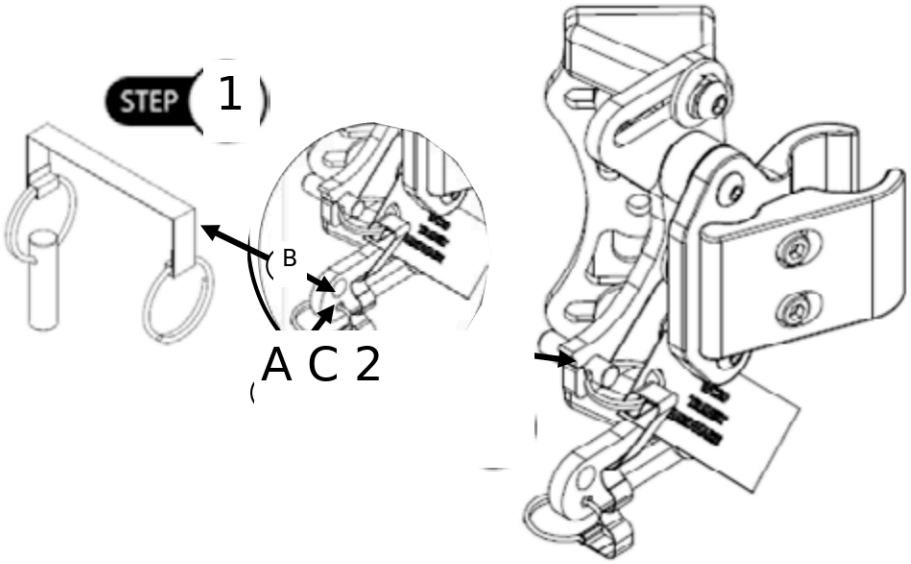

2.4.2 Instalarea etichetei pe husă

Eticheta WC20 trebuie fixată pe husa spătarului ADI dacă știfturile WC20 sunt comandate separat de spătar și hardware. Eticheta trebuie cusută pe husă pentru a fi conformă WC20.

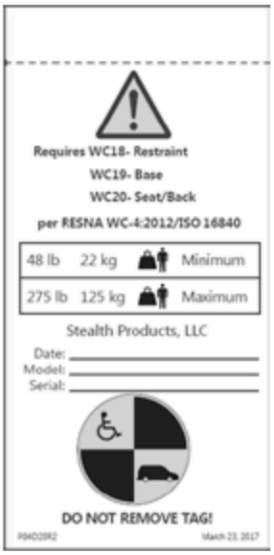

Avertisment!

Trebuie să respectați următoarele pentru utilizarea corectă în transport!

Nerespectarea poate duce la vătămări grave sau decesul utilizatorului!

Minim: _____

Maxim: _____

Stealth Products, LLC

Dată: _____

Model: _____

Serie: _____

Acest sistem de ședere a trecut testarea la impact cu un ATD masculin de talie medie conform RESNA WC-4:2012/ISO16840, folosind metodele descrise în Anexa A din WC-4:2012, Sec. 20, și a îndeplinit cerințele când a fost atașat unui scaun rulant echipat cu sisteme de ancorare specificate în WC-4:2012, Sec. 20.

NU ÎNDEPĂRTAȚI ETICHETA!


2.4.3 Scoaterea știftului WC20

Când scaunul nu este în tranzit, știfturile pentru hardware-ul cu eliberare rapidă pot fi îndepărtate și plasate într-un loc de păstrare de pe hardware.

Pentru a scoate știftul:

Pasul 1: Trageți știftul (C) din ansamblul zăvorului. Poate fi necesară o tragere ușoară pentru a scoate știftul.

Pasul 2: Introduceți știftul în orificiul pre-găurit (D) de lângă baza hardware-ului.

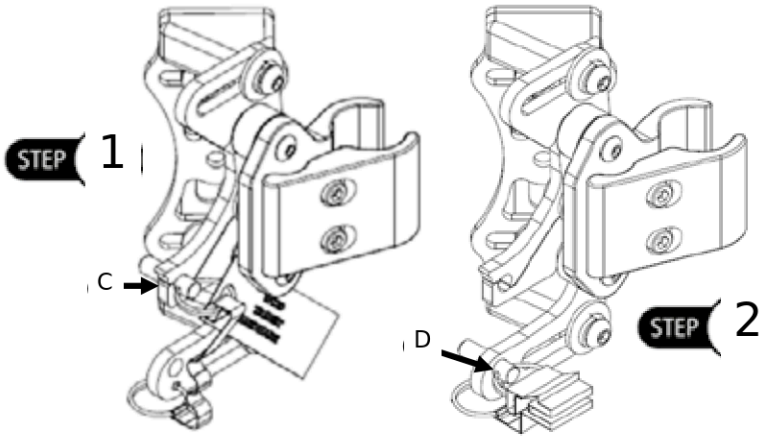

SIGURANȚĂ

Știftul trebuie plasat întotdeauna în orificiul pre-găurit desemnat de lângă baza hardware-ului. Lăsarea știftului să atârne liber poate deteriora scaunul sau poate răni utilizatorul.

2.5.1 Curățare

- Folosiți o lavetă moale pentru a curăța carcasa spătarului.
- Spălați manual husa pernei din spumă cu apă și săpun blând sau detergent și lăsați-o să se usuce.
- Perna din spumă nu trebuie să se ude.

⚠ AVERTISMENT Nu spălați manual în apă la temperaturi de peste 160°F (70°C).

⚠ AVERTISMENT Nu spălați și nu uscați la mașină.

2.5.2 Dezinfectare

- Ștergeți ușor cu o lavetă umezită cu un dezinfectant de uz casnic.
- Lăsați spuma să se usuce complet la aer.

⚠ AVERTISMENT Nu scufundați spuma în apă.

⚠ **ATENȚIE**

Verificați întotdeauna tot hardware-ul de montare, asigurându-vă că fiecare element de fixare este strâns corect înainte de a utiliza suportul de spate.

⚠ ATENȚIE Limită de greutate utilizator: 250 lb (113,40 kg).

NOTĂ

Modificarea în orice fel a unui spătar ADI și/sau instalarea necorespunzătoare anulează garanția.

2.6 Prima utilizare

2.6.1 Asistență din partea distribuitorului

La prima utilizare de către client, se recomandă ca distribuitorul sau tehnicianul de service să asiste și să explice configurarea clientului (utilizatorului [illegible]).
Dacă este necesar, distribuitorul poate efectua reglajele finale.

⚠ ATENȚIE Nu atașați spătarul cu utilizatorul în scaun.

SIGURANȚĂ

Nu atașați spătarele ADI cu utilizatorul în scaun și nu le utilizați în timpul transportului decât dacă folosiți zăvorul cu eliberare rapidă aprobat WC20.

2.6.2 Testarea de către utilizator

Este important ca utilizatorul să fie pe deplin informat despre instalare, modul de utilizare și ce poate fi reglat pentru a obține cât mai multă mobilitate.

Ca distribuitor, procedați astfel:

• Explicați și arătați clientului cum ați efectuat instalarea și explicați funcția hardware-ului.

• Dacă este necesar, reglați hardware-ul în poziția corectă.

• Explicați clientului posibilele probleme și modul de remediere.

2.6.3 Condiții de utilizare

Hardware-ul ADI este destinat utilizării așa cum este instalat de distribuitor, conform instrucțiunilor de instalare din acest manual.
• Condițiile de utilizare prevăzute sunt comunicate utilizatorului și/sau însoțitorului de către distribuitor sau tehnicianul de service la prima utilizare.
• Dacă condițiile de utilizare se schimbă semnificativ, contactați distribuitorul sau un tehnician de service calificat pentru a evita uzura excesivă sau deteriorarea neintenționată.
• Este posibil ca spătarul CF să nu se potrivească fiecărui scaun. Consultați clinicianul sau furnizorul care vă asigură echipamentul.

2.7 Garanție

Produsele noastre sunt proiectate, fabricate și realizate la cele mai înalte standarde. Dacă se constată un defect de material sau de fabricație, Stealth Products va repara sau înlocui produsul la discreția sa. Orice garanție implicită, inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop, nu se va extinde dincolo de durata acestei garanții. Stealth Products, LLC nu garantează daunele datorate, dar fără a se limita la:
• Utilizarea greșită, abuzivă sau aplicarea necorespunzătoare a produselor.
• Modificarea produsului fără aprobarea scrisă a Stealth Products, LLC.
• Orice modificare sau lipsă a numărului de serie, acolo unde este cazul, va anula automat această garanție.
• Stealth Products, LLC este răspunzătoare numai pentru piesele de schimb.
• Stealth Products, LLC nu este răspunzătoare pentru costurile de manoperă suportate.

Nicio persoană nu este autorizată să modifice, să extindă sau să renunțe la garanțiile Stealth Products, LLC.

Stealth Products garantează împotriva defecțiunilor datorate materialelor sau fabricației defectuoase:

Huse: 180 de zile

Hardware: 5 ani

Electronică: 3 ani

2.7.1 În caz de defectare a produsului

În cazul unei defecțiuni a produsului acoperite de garanția noastră, vă rugăm să urmați procedurile descrise mai jos:

1. Sunați la Stealth la +1 (512) 715-9995 sau gratuit la +1-800-965-9229.
2. Solicitați Departamentul Retururi sau obțineți un RA de la Departamentul Retururi și urmați instrucțiunile departamentului sau ale documentației.